

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MINI CUPPING
MASSZÁZS KÉSZÜLÉKHEZ

ÁBRÁK LEÍRÁSA

FONTOS FIGYELMEZTETÉS, ŐRIZZE MEG TOVÁBBI HASZNÁLATHOZ



Figyelem! Hivatkozás a mellékelt dokumentumokra



Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, kérem



Ne helyezzen be gombostűket



DC (egyoldali)



Elektronikus információs termékek környezetvédelmi élettartama

* A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat és őrizze meg őket megfelelően!

OLVASSA EL HASZNÁLAT ELŐTT

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- ① Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást a termék használata előtt.
- ② Ez a termék nem gyógyászati segédeszköz, és nem ajánlott orvosi használatra.
Nem javallott kórházi orvosi kezelésre.
- ③ A termék fűtőfelülettel rendelkezik, és nem használhatják olyan személyek, akik nem hőérzékenyek, kisgyermekek vagy olyanok, akik nem tudnak gondoskodni magukról.
- ④ A terméket gyermekek nem használhatják, kivéve, ha a szülők vagy a gyámok nem állítják be előre, vagy ha a gyerekek nem kaptak **elegendő** információt a használatához.
- ⑤ Használatkor ügyeljen a bian kő melegítés utáni hőmérsékletére, ezt saját hőtartományának megfelelően válassza ki, különösen a bőr számára elfogadható hőmérsékleten, és ne melegítse túl égési sérülések elkerülése érdekében.
- ⑥ Használatkor ne vigyen fel más, saját hőképző tulajdonságú anyagot a melegített részekre, például pórsáfrányolaj, tigriscsontpaszta stb.
- ⑦ Ha a terméknek az illóolajjal történő használata után illatos marad, kérjük, törölje le egy tiszta, nedves kendővel, hogy a termék tiszta maradjon. Mielőtt másoknak adná, 75%-os alkohollal fertőtlenítsa a fertőzés elkerülése érdekében.
- ⑧ A termék bian terméskőből készült. Természetes, hogy apró repedésekkel rendelkezik.
- ⑨ A feltöltés ideje alatt ne használja a készüléket.
- ⑩ Kapcsolja ki a készüléket a használat befejezése előtt.
- ⑪ A terméket nem szabad leejteni, és semmi sem eshet rá nagy magasságból.
Óvatosan és odafigyeléssel kezelje, mert törékeny.
- ⑫ Ez a készülék nem vízálló. Szigorúan tilos nedves kézzel és lábbal használni, és szigorúan tilos nedves környezetben használni.
- ⑬ Szigorúan tilos vegyi oldószereket használni a géptest és a töltőkábel tisztításához.
- ⑭ Ne szerelje szét a készüléket önkezüleg, a vállalati technikusokon kívül bárki által okozott működési károkért a felelősséget a magánszemélyek viselik.

OLVASSA EL HASZNÁLAT ELŐTT

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A TERMÉK HASZNÁLATA ESETÉN

- ① Az illóolajok használata előtt a sérülésre hajlamos és érzékeny bőrű embereknek tesztelniük kell azt a kar belső oldalán vagy a fül mögött. Hagyja abba a használatát, ha bőrpír, duzzanat vagy viszketés jelentkezik.
- ② Használat előtt fertőtlenítse a termék alját (75%-os alkohol használata javasolt).
- ③ Használatkor kérjük, ügyeljen a helyiség hőmérsékletére, ne használja a terméket légkondicionált, szellőztetett és hidegebb helyiségekben. A 25 °C körüli szobahőmérséklet megfelelőbb.
- ④ Használat közben egy irányba masszírozzon. Ne húzza fel-le, sem balra-jobbra.
- ⑤ Használata során akkor jelennek meg nyomok, amikor a helyi mikrokeringés gyenge, és a Gua Sha nyomok maguktól felszívódnak. Ez normális.
- ⑥ Napi használatra, főleg gyengéd masszázssal. Ne próbálja megtalálni a Gua Sha nyomokat, használja, amíg a pörusok ki nem tágulnak, és a bőr vörös és forró nem lesz.
- ⑦ A használat ideje ne legyen túl hosszú, nem szabad nagy felületű masszázst alkalmazni.
- ⑧ Használat után törölje le az illóolajat a felületről tiszta papírtörülkövel vagy gyapjúval.
- ⑨ Használat után kerülje a hideget és a szelet, ne egyen nyers vagy hideg ételt.
- ⑩ Használat után célszerű meleg vizet inni és kb. 15-20 percet pihenni.
- ⑪ Használat után a bőr felszínén lévő erek kitágulnak, ezért várjon 30-45 percet zuhanyzás előtt.
- ⑫ A gyengék, idősek és kisebb betegségben szenvedők könnyedebb technikákat alkalmazhatnak.
- ⑬ A fej és az arc síkosító anyagokkal, például arckrémekkel kezelhető, a napi használat ruházaton keresztül is elvégezhető.
- ⑭ A Gua Sha jegyek jellemzői: A jegyek színe élénkpiros, téglapiros, lila és fekete, szétszórta, sűrűn vagy ezek kombinációjában helyezkednek el.

OLVASSA EL HASZNÁLAT ELŐTT

TILTOTT HASZNÁLAT

- ① Vérző vagy vérzésre hajlamos személyeknek tilos a használata. Szintén tilos pacemakerrel rendelkezők számára, mert szívelégtelenség léphet fel.
- ② Műtéten átesett pácienseknél (bypass, sztent, szívbillentyű műtét stb.) óvatos használat javasolt.
- ③ Tiltott várandós nők számára!
- ④ Tilos lázas és megemelkedett testhővel rendelkező páciensek számára.
- ⑤ Tilos daganattal vagy rákos megbetegedéssel diagnosztizált páciensek számára.
- ⑥ Használata olyan kritikus betegségek esetén, mint a súlyos szívbetegség, veseelégtelenség, májcirózis, aszcitisz és az egész test súlyos ödémája, tilos.
- ⑦ A bőr erősen allergiára hajlamos. Tilos a használata olyan bőrbetegségek esetén, mint a felszakadt bőrfekélyek, új vagy be nem gyógyult sebek és traumás törések.
- ⑧ Használata olyan vérzésre hajlamos betegek esetén, mint thrombocytopenia, leukémia, hemofília, allergiás purpura és egyéb vérzési rendellenességek esetén tilos.
- ⑨ Használata túl szomjas, túl éhes, túl jóllakott, túl fáradt, részeg vagy túlmelegedett személyek esetében tilos. (Étkezés után két órán belül tilos használni).
- ⑩ Óvatosan alkalmazza krónikus betegek, idősek, rendkívül vékony, alultáplált emberek, mozgássérültek, valamint a bőr rugalmasságának elvesztésével küzdők esetében.
- ⑪ Tilos akut ficamok, fájdalmas sérülések és törések esetén használni.
- ⑫ Menstruáció alatt óvatosan masszírozza az alhasat, terhesség alatt pedig hagyja ki az alhasat és a Hegu pontot.
- ⑬ Óvatosan kell alkalmazni alacsony vérnyomásban, irreleváns vércukorszintben, túlzott gyengeségben és idegfenntartásban szenvedő betegeknél.
- ⑭ Bármilyen speciális egészségügyi probléma esetén, a készüléket orvos felügyelete mellett használja.



Tiltott várandós nők számára.



Ne használja alvás közben.

OLVASSA EL HASZNÁLAT ELŐTT

TILTOTT HASZNÁLAT

- ① Tilos bőrbetegségekkel, anyajegyekkel, sebekkel vagy fekélyekkel rendelkező személyek számára.
- ② Használata tilos a szemén, fülön, orrlyukon, nyelven és az arc verbális vonásain.
Tilos elől és hátul, a köldökön (Shenque pont) stb.
- ③ Azokon a részeken, amelyekről hiányzik a bőr alatti szövet és az izom, nagyon közel vannak a csontokhoz, mint például a kulcscsont. Az elülső sípcsonton végzett masszázs tesztek tilosak.
- ④ Ha a baba koponyája nincs még jól benőve, tilos a fej és a nyak masszázsa.
- ⑤ Hagyja ki a vizeletviszatartásban szenvedő betegek hasát.
- ⑥ Akut sérülések, ficamok és zúzódások esetén tilos.

AJÁNLÁSOK:


- ① Ha a hevülő felület hőmérséklete túl magas/kivörösödött, akkor ajánlott csökkenteni a sebességet.
- ② Ha hosszabb ideig használja a terméket, módosítani kell a folyamatos használatra ajánlott alacsony (hőmérsékleti) szintre.

ALACSONY HŐFOKÚ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK:

Bár alacsony hőmérsékletről van szó, a bőr ugyanazon részével való hosszan tartó érintkezés túlmelegedés és fájdalom nélkül égési sérülést okozhat. Kérjük, legyen óvatos.

LÉPÉSEK LEÍRÁSA

A TERMÉK BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEI

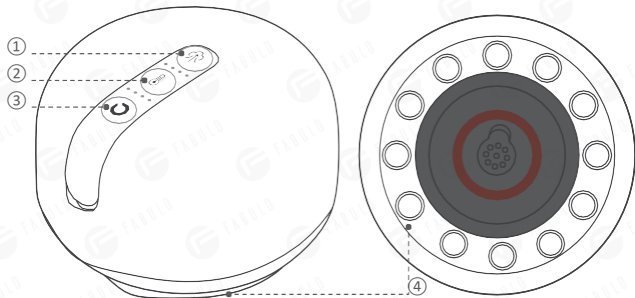



- ① „Szívó gomb ② Melegítés gomb ③ Funkciós (főkapcsoló) gomb ④ A Bian kő alapzata

LÉPÉSEK LEÍRÁSA


TERMÉKBIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A KÉSZÜLÉK FŐKAPCSOLÓJA


ON : A készülék bekapcsolásához nyomja meg a [Főkapcsolót ] 1 másodpercre, felgyullad a piros fény, a melegítő- és a szívó funkció jelzőfényei felvillannak, és megszólal a jelzőhang: "Píp" ; (alapértelmezett üzemmód: szívó és fűtési funkció 1. fokozat, vörös fény funkció bekapcsolva)



OFF : A készülék bekapcsolásához nyomja meg a [Főkapcsolót ] 1 másodpercre, minden funkció és a megfelelő jelzőfény kialszik, és megszólal a jelzőhang: "beep beep".

MELEGÍTÉS FUNKCIÓ:


Bekapcsolt állapotban nyomja meg [Melegítés ] gombot a sebességfokozatot 1 fokozattal növeli, a pozíciók sorrendje: Ciklikus kapcsolás "0. sebességfokozat (ki) - 1. sebességfokozat - 2. sebességfokozat - 3. sebességfokozat - 4. sebességfokozat" és a hangjelzés megszólal: "Píp"

VÖRÖS FÉNY FUNKCIÓ:

Bekapcsolt állapotban a vörös fény funkció alapértelmezetten be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [Melegítés ] gombot a vörös fény funkció kikapcsolásra kerül és megszólal a hangjelzés: „Píp“

Bekapcsolt állapotban a vörös fény funkció alapértelmezetten be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [Melegítés ] gombot a vörös fény funkció kikapcsolásra kerül és megszólal a hangjelzés: „di-di tút“; a [Melegítés ] gomb ismételt megnyomásával felgyullad a vörös fény és megszólal a hangjelzés: „píp píp“, sebességfokozat: „on-off“ ciklus átkapcsolása.





SZÍVÓ FUNKCIÓ

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden az [Szívó ] gombot, a sebességfokozat 1 fokozattal növekszik, helyzet sorrend: ciklikus kapcsolás „0. sebességfokozat (ki) - 1. sebesség - 2. sebesség - 3. sebesség - 4. sebesség“ és a hangjelzés megszólal: "Píp"

LÉPÉSEK LEÍRÁSA

TERMÉKBIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

NYOMÁSCSÖKKENTÉS FUNKCIÓ

A szívó állapotban röviden nyomja meg a [Főkapcsoló ] gombját vagy a [Szívó gombot , a készülék elindítja a "nyomáscsökkentő" funkciót, és megszólal a jelzőhang: „píp píp”; a nyomáscsökkentő funkció alatt nyomja meg a [Főkapcsolót ] vagy az [Szívó gombot , a szívó fokozat visszatér a dekompreszió előtti fokozathoz.

MEGJEGYZÉS:

Ha mind a fűtési, mind a szívó funkció ki van kapcsolva (0. sebességfokozat / dekompreszió), a szívó és melegítés jelzők 60 másodpercig villognak (kivéve, ha ezalatt a fűtési vagy a szívó funkciót újra aktiválják), a készülék automatikusan kikapcsol.

UTASÍTÁSOK

A készülék indítása után válassza ki a készülék funkcióját igényei szerint, vigye fel az illóolajat arra a testrészre, ahol használni szeretné, és kezdje el használni.

AKKUMULÁTOR SZINT KIJELZŐJE

Gyenge elem	Megszólal a hangjelzés: „di, di, 3x csippan”, a jelzőfény felvilágul és 5 másodpercnyi villogás után kikapcsol
Töltés	A szívó és melegítés jelzők egyszerre villognak
Teljesen feltöltve	A szívó és melegítés jelzők világítanak. A töltési folyamat során a termék nem használható, a töltő leválasztása után a termék kikapcsol; a termék kikapcsol, ha a töltő csatlakoztatva van, és a készülék töltődik.

Megjegyzés: A terméket nem lehet bekapcsolni töltés közben, kérjük, húzza ki a töltő tápkábelét a készülék bekapcsolása előtt.

HASZNÁLAT

A SZŰRŐ DUGÓJÁNAK CSERÉJE



Távolítsa el a szűrő dugóját a termék alján, a szűrő dugóját tisztíthatja vagy kicserélheti.

※ Ügyeljen a fenti tartozékokra a sérülések elkerülése érdekében. A szűrődugó hatékonyan blokkolja az illóolaj bejutását a termékbe masszázs közben, amely hatékonyan meghosszabbíthatja a termék élettartamát. (Ismételt használat esetén tisztítani vagy cserélni kell. Vizes mosás után papírtörölkővel óvatosan törölje át és szárítsa hűvös helyen.)

OLVASSA EL HASZNÁLAT ELŐTT

A MASSZÁZS VÁZLATOS ÁBRÁJA


Általánosságban a fej, a nyak, a hát, a mellkas, a has, a felső végtagok, az alsó végtagok részeit dörzsölje.




dörzsölés a fején




dörzsölés az arcon

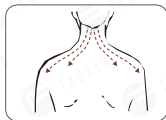

dörzsölés a vállon

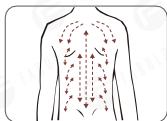

dörzsölés a háton

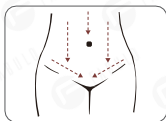


dörzsölés a hason



dörzsölés a hason



dörzsölés a hason

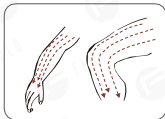

dörzsölés a felső vagy alsó végtagokon

OLVASSA EL HASZNÁLAT ELŐTT

MASSZÁZS- ÉS ÜZEMIDŐK

- 1 Általánosságban elmondható, hogy az egyes részek masszázsanak ideje 20x kevesebb, ami nem szabványos a Sha esetében. Ha a Sha nem jelenik meg, ne nyomja a Shát. Ha a Sha megjelent a masszázs során, hagyja abba a masszázst, hogy elkerülje a bőr károsodását.
- 2 A használt erő legyen a gyengétől az erősig, a kicsitől a nagyig.
- 3 Általánosságban minden használat során 3 ~ 5 testrészt válasszon.
- 4 Minden személy életkorának, testalkatának és a masszázs helyének megfelelően a masszázs ideje rugalmasan állítható.
- 5 Használat közben ügyeljen arra, hogy ne masszírozzon nagy területet, a gyengébb embereket csak lokálisan lehet masszírozni.
- 6 Általában a Sha az első masszázs után 3-6 napig észlelhető, majd a második masszázs után is. Túlnyomóan visszahúzódik a bőrön (sha foltok eltűnnek).
- 7 Az első masszázs után ügyeljen arra, hogy ugyanazon a helyen használja, amikor Sha visszahúzódik.
- 8 A napi használat esetén nincs szigorú idő- és fokozatkorlátozás a használat során, és nincs szükség a Sha kaparására. 3-10 perc minden alkalommal, saját kényelmének megfelelően.

KARBANTARTÁS

KARBANTARTÁS

- ① Tegyen óvintézkedéseket a nedvesség, a rágcsálók és a szennyeződések ellen.
- ② Használat után tárolja a terméket biztonságos helyen. Ne hagyjon nehéz tárgyakat a terméken, hogy elkerülje a Bian kő károsodását és deformálódását.
- ③ Meghibásodás esetén kérjük, időben forduljon a műszaki személyzethez a javítással kapcsolatban, ne szerelje szét a terméket önkezüleg.
- ④ Tárolja a terméket jól szellőző helyiségben, kerülje az erős napfényt, a korrozív gázokkal és folyadékokkal való érintkezést az erózió elkerülése érdekében.
- ⑤ A termék gyermekektől távol tartandó.
- ⑥ Ha nem használja, tárolja az alábbiak szerint: Miután a termék lehűlt, húzza ki a tápkábelt az áramforrásból és a készülékből, és tárolja a terméktől elkülönítve.
- ⑦ Ha hosszabb ideig nem használja, tegye a terméket és a tartozékokat a csomagolásba, és tárolja száraz és jól szellőző helyen, vagy takarja le porvédővel a por elkerülése érdekében. Ne tegye ki a terméket napsugárzásnak, hogy elkerülje a kifakulást vagy megrepedezést.
- ⑧ Ne használja a terméket más céllal.
- ⑨ Mindig ellenőrizze, hogy a készüléken nincs-e kopás vagy sérülés jele. Ha van ilyen jel, vagy ha a készüléket nem megfelelően használta, az újbóli használat előtt juttassa vissza a forgalmazóhoz.
- ⑩ A terméket legalább havonta egyszer fel kell tölteni, ha hosszabb ideig nem használja. Kapcsolja ki.

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

- 1 Ügyeljen a tisztításra és a védelemre, kerülje a sérülést és a szennyeződéseket.
- 2 Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg kihűl.
- 3 Ezután puha és viszonylag száraz szivaccsal vagy kicsavart, vízzel és semleges tisztítószerrel megnedvesített puha ronggyal tisztítsa meg.
- 4 Tisztításkor ne merítse folyadékba, hogy elkerülje a rövidzárlatot és az áramütés általi sérüléseket.
- 5 Ne használjon maró hatású tisztítófolyadékot, súrolószert, kefét, benzint, kerozint, üveget, bútorfényezőt és festékhígítót a termék tisztításához, ellenkező esetben, ha a szerkezet korrodálódik, a termék megsérül.
- 6 Használat után időben tisztítsa meg a terméket.
- 7 A termék tisztítása után fertőtlenítése javallott 75%-os alkoholba mártott vattatamponnal.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Környezeti hőmérséklet: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$;

Relatív páratartalom: $\leq 80\%$;

páratartalom:

Szállítás:

A termék egyszerű korróziógátló eszközökkel van felszerelve, alkalmas légi, vasúti, közúti és hajós szállításra is. Szállítás közben kerülni kell az esőt és havat, a felborulást és az ütközést.

KARBANTARTÁS

HIBAELHÁRÍTÁS

Működés közbeni meghibásodás esetén ellenőrizze a következőket:

ALAPSZINTŰ HIBA	LEHETSÉGES OK	KIZÁRÁSOS ALAPMETÓDUS
Nem lehet bekapcsolni	Alacsony akku feszültség	Töltse fel a terméket
	A termék töltődik	Használat előtt töltse fel
Nem töltődik, vagy a töltő kijelzője nem világít	Az USB kábel helyesen vagy helytelenül van csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy az USB kábel mindkét vége helyesen van-e csatlakoztatva
Nincs meleg érzet	Alacsony akku feszültség	Töltse fel a terméket
Nem szív	Alacsony akku feszültség	Töltse fel a terméket

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:

A termék és a csomagolás likvidációja során nem szabad azokat önkényesen szétszedni, kidobni vagy elégetni. Ezeket a vonatkozó nemzeti törvényeknek és előírásoknak megfelelően hulladék-újrahasznosító állomáson kell leadni.

A TERMÉK PARAMÉTEREI

A TERMÉK PARAMÉTEREI

A termék megnevezése	MINI CUPPING MASSZÁZS KÉSZÜLÉK
Modell	CI162A
A töltő paraméterei	5V --- 1A
Névleges feszültség	3.7 V ---
Névleges teljesítmény	11 W
Akkumulátor kapacitása	2000 mAh
Töltési idő	Kb. 160 min
Időzítés	Kb. 15 min
Anyag	Bian kő, ABS, Szilikon, stb.
Nettó tömeg	Kb. 220 g
A termék méretei	Kb. 82×80×55 mm
Biztonsági besorolás	III besorolási osztályú készülékek
Gyártó	New Design Biotechnology Co., Ltd
Cím	Room 101, No. 1 Building, No. 265, Chigang West Road, Haizhu District, Guangzhou
Gyártási tételszám	Lásd a címkén
Termékváltozat	E-01

※ Az olyan paraméterek, mint a termék mérete és súlya csupán referenciaértékek, és végső soron a tényleges termék értékei élveznek elsőbbséget.