



Relieve. Recover. Restore.

NOVA REZGŐ MASSZÁZS KÉSZÜLÉK



HU

Használati útmutató a Nova rezgő masszázskészülékhez



Tisztelt Vásárló,

A Nova rezgő masszázs készülék ideális nemcsak professzionális terapeuták számára, hanem mindenkinek, aki törődik teste egészségével. A Nova masszázs eszköz hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat és -merevséget, a mély szöveti és fasciás feszültséget, javítja a mobilitást és a mindennapi élet minőségét. Célja az izom- és mélyszöveti fáradtság enyhítése és az általános jó közérzet elérése.

Reméljük, hogy élvezni fogja Nova rezgő masszírozónk funkcióit.

Az Ön Fabulo.hu csapata

MŰSZAKI JELLEMZŐK



- 1 Cserélhető masszázsfaj
- 2 Beépített LG tölthető lítium-ion akku
- 3 Csendes szénmentes motor nagy nyomatékkal
- 4 LED sebességjelző (3 sebesség)
- 5 Főkapcsoló és sebességbeállító gomb

- 6 Az akkumulátor állapotát jelző LED
- 7 Töltő port
- 8 Töltő / AC/DC átalakító
- 9 Teljesítményjelző

Cserélhető fejek



Lapos

Gömbölyű

Villás

Töltény

Légpárna

Váll

Ívelt

Rezgéshérszékencia

- 1. fokozat - 30Hz 1800 impulzus/perc
- 3. fokozat - 48Hz 2900 impulzus/perc

- 2. fokozat - 40Hz 2400 impulzus/perc

Töltő:

Bemenet: 100-240V 50/60Hz 0.8A Kimenet: 26V DC (egyenáramú) 1.0 A

Működési idő (terhelés nélkül): 11,5 óra (gömbölyű fej, nyomás nélkül)

Működési idő (terheléssel): 4–6 óra (a használat során alkalmazott sebesség és nyomás szintjétől függően)

Súly:

875g

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

NE MERÍTSE VÍZBE. Tartsa távol folyadékoktól és hőforrásoktól. Óvja a szellőzőnyílásokat portól és szennyeződésektől.

NE TÁVOLÍTSA el a csavarokat, és ne próbálja szétszerelni a készüléket.

NE MŰKÖDTESSE folyamatosan egy óránál tovább. Hagyja a készüléket 30 percig pihenni, mielőtt újra felhasználná.

Töltés után vagy használat előtt válassza le a töltőt az eszköz akkumulátoráról.

Csak felnőttek számára. Ne használja, ha megsérült. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VESZÉLY: AZ ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT A KÉSZÜLÉKET CSAK AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁVAL SZABAD HASZNÁLNI:

- Kizárólag felnőtt személyek használhatják.
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva, vagy olyan helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá.
- Ez a készülék nem élelmiszer. Kérjük, ne tegye a masszázsfőzet vagy bármely részét a szájába.
- Kívánt esetben csak a test lágy szövetein használja. Ne használja a fején vagy a test kemény és csontos területein.
- Ne használja ezt az eszközt a következő testrészekon: nemi szervek, arc, szem, műtét utáni sérülések, bármilyen típusú fertőzött rész, fertőzött vagy sérült bőr, sérült csontok és ízületek.
- Kizárólag száraz, tiszta testfelületen HASZNÁLJA a ruházat felett, enyhén nyomja és mozgassa a testfelületen kb. 60 másodpercig minden helyen.
- Fájdalom vagy egyéb kellemetlenség esetén azonnal hagyja abba a használatát.
- Csak a Hi5 által forgalmazott fejeket használja és alkalmazza a test megfelelő részeire.
- Függetlenül a vezérlés beállításától és az alkalmazott nyomástól felléphet bőrirritáció. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és azonnal állítsa le a kezelést már a fájdalom vagy kellemetlenség első jelei esetén.
- Tartsa távol ujjait, haját vagy teste bármely más részét a tengelytől és a fej hátsó részétől, mert ez becsípheti a testrészeket.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék szellőzőnyílásaiba.
- Csak a mellékelt 24 V DC feszültségű Hi5 töltővel töltsse fel.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort.
- Ne végezzen módosításokat a készüléken, a átalakítón vagy a dugón, és ne alakítsa át azokat.
- Soha ne hagyja a Nova rezgő masszírozót felügyelet nélkül működés közben vagy a töltőn.
- A töltőt csak a készülék töltésére lehet használni, tilos más célokra használni. Tilos a készülék töltésére más töltőket használni.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK



ELLENJAVALLATOK

KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A NOVÁT VAGY EGYÉB REZGŐ KÉSZÜLÉKET, HA MÉG NEM KONZULTÁLT ORVOSÁVAL, HA A KÖVETKEZŐK KÖZÜL BÁRMELYIK ÖNRE IS VONATKOZIK:

Terhesség, cukorbetegség, olyan szövödményekkel, mint neuropathia vagy retinakárosodás, beültetett pacemaker, közelmúltbeli műtét, epilepszia és migrén, porckorong sérülések, spondylolisthesis, spondylolysis vagy spondylosis, nemrégiben cserélt ízületek vagy méhen belüli eszközök, fém implantátumok vagy lemezek, vagy bármilyen problémája van testi egészségével kapcsolatban.

A sérülékeny egyének és gyermekek csak felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a rezgő készüléket. Ezek az ellenjavallatok nem azt jelentik, hogy nem használhat rezgő vagy tornagépet, de ennek használatáról először kérje ki orvosa tanácsát.

Folyamatos kutatások folynak a rezgésterápia konkrét egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatásairól. Ez valószínűleg lerövidíti a fent felsorolt ellenjavallatok listáját. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs terápia integrálása a kezelési folyamatba sok esetben ajánlott. Ezt orvos ajánlására és orvos, szakember vagy gyógytornász kíséretében kell végezni.

GARANCIA

HA A VÁSÁRLÁS DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTVÁ KÉT ÉVEN BELÜL EZ A TERMÉK GYÁRTÁSI HIBÁK FOLYTÁN MEGHIBÁSODIK, AKKOR A HI5 KIJAVÍTJA, CSERÉLI VAGY A SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEKET INGYEN SZÁLLÍTJA.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK:

- a) Baleset, visszaélés, nem megfelelő kezelés vagy szállítás által okozott károkra;
- b) Jogosulatlanul javított alkatrészekre;
- c) A rendeltetéstől eltérő használatra;
- d) A termékkeltséget meghaladó károkra;
- e) Nem megfelelő tárolás és / vagy biztonsági körülmények miatt fellépő meghibásodásokra;
- f) A dátummal ellátott vásárlási igazolás bemutatásának elmulasztása esetén.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FELTÖLTÉS

- Az első használat előtt hat órán át tölts fel teljesen az akkumulátort.
- A töltéshez dugja be az AC / DC átalakítót egy konnektorba, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültségjelző LED világít, csatlakoztassa az oldalsó DC (egyenáramú) kábel végét a töltőporthoz.
- Ha az átalakítón az áramjelző zöld színnel világít, azt jelenti, hogy a töltés jelenleg nincs folyamatban, vagy hogy a töltés befejeződött. Ha az átalakító jelzője piros, az a töltési folyamatot jelzi.
- Töltés közben a készüléken lévő akkumulátor állapotjelző LED villog, jelezve az akkumulátor állapotát és az aktív töltést. Ha az első jelzőfény világít, azt jelenti, hogy a jelenlegi teljesítmény 0–10%; ha a második jelzőfény világít, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi teljesítmény 11%–40%; ha a harmadik jelzőfény világít, azt jelenti, hogy a jelenlegi teljesítmény 41%–70%; ha a negyedik jelző világít, azt jelenti, hogy a jelenlegi teljesítmény 71%–100%.
- A teljes töltés kijelzése akkor jelenik meg, amikor az összes akkumulátor állapotjelző abbahagyja a villogást és folyamatosan világít.
- Az akkumulátor bármikor és bármilyen szintű töltöttségnél feltölthető.
- Nem ajánlott teljesen lemeríteni az akkumulátort a piros LED szintjére.
- Biztonsági okokból a készülék nem kapcsolható be töltés közben.
- Az átlagos üzemidő 4–6 óra, a használat közben alkalmazott sebességtől és nyomásszinttől függően.

ÜZEMELTETÉS

- A rezgés bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a főkapcsolót, amíg az 1. szint jelző világítani nem kezd.
- A rezgés kikapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig a főkapcsolót, amíg a sebességjelző LED és az akkumulátor állapotjelzője kialszik.
- A rezgés intenzitásának és gyakoriságának növeléséhez nyomja meg ismét a főkapcsolót és a sebességkapcsolót a 2. szintre, majd újra a 3. szintre váltáshoz. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a főkapcsolót és a sebességkapcsolót. A sebességjelző LED (3 sebesség) jelzi a megfelelő sebességet.
- Húzza le enyhe csavarással a fejet a KIKAPCSOLT készülékről.
- Helyezze fej a fejet a KIKAPCSOLT készülékre, szorosan nyomja rá, amennyire csak lehet.
- A test izomszövetének vastagságától és a masszírozott személy igényeitől függően tanácsos a rezgések frekvenciáját a kliens kényelméhez igazítani a fájdalom és egyéb kellemetlenség elkerülése érdekében.
- Biztonsági okokból az egység 20 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A készülék tisztításához használjon enyhén nedves törölkendőt, majd puha kendővel törölje szárazra.
- Tárolás vagy utazás közben vegye ki az akkumulátort és tárolja a mellékelt dobozban.
- A termék tisztításához ne használjon alkoholt vagy alkoholalapú tisztítószeret.
- Kis mennyiségű semleges tisztítószerrel törölje át a terméket, ügyelve rá, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe.

HÁTMASSÁZS

A hátmasszázsban részesülő személynek ellazultnak kell lennie, és egy kényelmes masszázstasztalra vagy puha felületre kell feküdnie.




- ▷ Válassza a villás fejet, helyezze a fej két végét a gerinc két oldalára, masszírozza át a gerinc teljes területét. 1. szintű rezgési sebesség ajánlott. Ne alkalmazza közvetlenül a gerincen.



- ▷ Válassza az ívelt fejet, és finoman és többször megismételve masszírozza át a derék bal és a jobb oldalát. 2–3. szintű rezgési sebesség ajánlott. Ennek a vibrációs eszköznek a vesekövek kezelésére gyakorolt hatását klinikai vizsgálatok során nem igazolták. Használat előtt konzultáljon orvosával.



- ▷ Válassza a lapos vagy légpárnás fejet a lapockák és hát masszírozására. 1. szintű rezgési sebesség ajánlott.

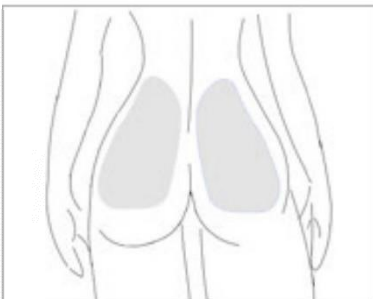


- ▷ Válassza a keskeny vagy gömbölyű fejet és masszírozza át az izomszövetet a derék alsó részének mindkét oldalán. 2–3. szintű rezgési sebesség ajánlott.

NYAKMASSÁZS



- ▷ A nyak- és vállizmokra a gömbölyű, a légpárna és lapos fejek használata javasolt. Ne használja a fejen. Javasoljuk, hogy a vékony vagy kevésbé izmos helyeken használja a légpárnás fejet a fájdalom vagy kellemetlenség elkerülése érdekében.

KAR ÉS TENYÉR

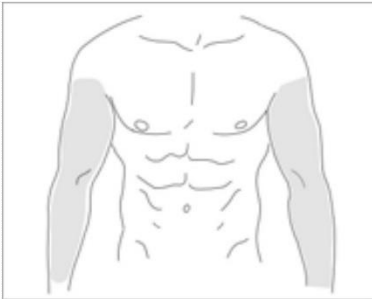


- ▷ A karizmokra a gömbölyű, a légpárna és lapos fejek használata javasolt. Vékonyabb testalkatú személyeknél használja a légpárna fejet 1. rezgésfokozaton, a fájdalom vagy kellemetlenség elkerülése érdekében. Túlsúlyos vagy jól kidolgozott izmokkal rendelkező ügyfelek számára használja a gömbölyű fejet 2–3-as sebességi fokozaton a kezelés hatásának növelése érdekében.



- ▷ A töltény alakú fej a talpakon javasolt, a kis izomszöveteken, az íveken és az ízületeken. Ezért ajánlott az 1–2. rezgésszint.

LÁBAK ÉS TALPAK

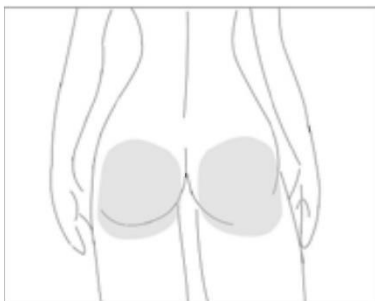

- ▷ A kezelés hatásának javítása érdekében a gömbölyű, lapos és ívelt fej ajánlott a csípőízület izmaira. Ne használja közvetlenül a gerincen vagy a gerinc mentén.



- ▷ A gömbölyű, lapos és ívelt fej ajánlott a combizmokra 2–3 rezgési szinten.



- ▷ A fenti fejek a comb és a vádli izmainak mély masszázshoz is használhatók.




- ▷ A töltény alakú fej a talpakon javasolt, a kis izomszöveteken, az íveken és az ízületeken. Ezért ajánlott az 1–2. rezgésszint.

TESTMASSÁZS


HAS

A rezgő hasmassázs során kérjük, álljon mozdulatlanul, ne nyomja a rezgő masszázskészüléket. A has területén a 3. szintű rezgési intenzitás ajánlott, amely gyors lökeshullámokat alkalmaz a bőr alatti zsírszövetre. Az emésztőrendszer káros reakcióinak elkerülése érdekében ne használja a has területén a masszázskészüléket 5 percnél tovább. A hason történő alkalmazás passzív testmozgásként, fogyás és alakformálás elérésére szolgál. A rezgő hasmassázs sportolás után ajánlott.

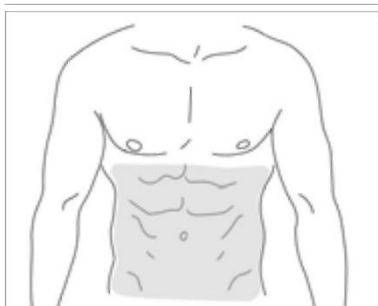

- ▷ Az íves fej ajánlott a has és a gyomor zsírszövetének területén.
- ▷ Kérjük, ne masszírozza a hasát közvetlenül étkezés után.

TUDNIVALÓK A VIBRÁCIÓS MASSZÁZSRÓL

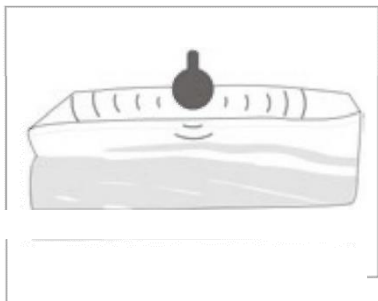

- ▷ Függetlenül attól, melyik masszázsféjet használja, ennek az eszköznek a lökeshullámai képesek rezegni a bőrön és a felszíni szöveteken. A kezelés során a masszázseszközre gyakorolt nyomás növelése növeli a lökeshullámok intenzitását és mélységét, és ezáltal növeli a kezelés hatásfokát anélkül, hogy befolyásolná a rezgések gyakoriságát.



- ▷ A rezgéshullámok intenzitásának és mélységének növelése érdekében a kezelt terület körüli izomterületeket ajánlott határozottan kézzel megtartani. Megakadályozva a lökeshullámok szétszóródását a bőrön és a szövetek felületén, a vibrációs eszköz mélyebb hatást érhet el az izomterületeken.

Folyamatosan kutatjuk a különféle kezelési módszereket és fejlesztjük a rezgő masszázs hatását. Reméljük, hogy a fenti kezelési módszer az Ön érdeklődését is elnyeri. Értékes megjegyzéseit és tapasztalatait mindig szívesen fogadjuk az info@fabulo.hu címen.

KISZERELÉSEK

SZÍN



■ Piros

■ Ezüst

■ Lila

■ Fekete

■ Zöld

MASSÁZS SZETTEK



Masszázs szett 1+4



Masszázs szett 1+6



Masszázs szett 1+7

CSOMAGOLÁSOK



Színes kartondoboz 



Alumínium koffer



Nejlon táska



Relieve. Recover. Restore.

**NOVA
REZGŐ MASSÁZS KÉSZÜLÉK**

iM3 s.r.o.

Kistejed u. 515/8 (Malotejedská u.)
929 01 Dunaszerdahely (Dunajská Streda)

Ügyfélszolgálat:

E-mail: info@fabulo.hu

Tel.: 06 1 700 9448 | 06 70 282 6028 (hétfő - péntek: 8:00-16:00)