

Használati útmutató Quirumed 9500 nyirokmasszázs készülék



* Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és jól őrizze meg későbbi használatra is.

* Az útmutatót a termékkel együtt frissítjük. A specifikációk és a termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Forgalmazó: iM3, s.r.o., Kistejedi u. 515/8, 92901 Dunaszerdahely

Web: www.fabulo.hu


Jellemzők

A mandzsettákkal végzett rendszeres nyomásmasszázs ellazítja és megmozgatja a feszült izmokat, karcsúbbá és szebbé teszi a lábakat, különösen alkalmas azoknak, akiknek nem sportolnak, pl. az időseknek és irodai dolgozóknak.

3 funkciócsoport 6 masszázsmód

Intelligens működés, állítható intenzitás

Könnyen használható

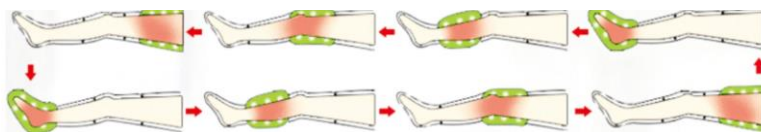

Leírás

Bemenet: AC110V~240V / 50HZ~ 60HZ

Üzemi feszültség: DC12V / 2A

Teljesítmény: 12W

Kategória: II

Izoláció: E

Szabvány: BG4706.10~2008

Idő: 10 perc, 20 perc, 30 perc



A termék nem gyógyászati segédeszköz!



Üzemeltetés



- 1, Helyezze a mandzsettát a test megfelelő részére.
- 2, Csatlakoztassa a csöveket és a mandzsettákat.
- 3, Csatlakoztassa megfelelően az adaptert és a vezérlőt.
- 4, Győződjön meg róla, hogy a levegőcsövek úgy vannak elhelyezve, hogy megfelelően működhessenek.
- 5, 6 masszázs üzemmód:
 - A : Minden lámpa világít, felfújás fokozatosan az 1,2,3,4 csövön keresztül. Amikor az egyik szekció felfújódik, az előtte levő leereszt.
 - B : Minden lámpa világít, felfújás az összes csövön keresztül, szinkronban tartva és felfújva. Felfújja az elő részt, megtartja benne a levegőt, és közben elkezdi felfújni a a második részt. Megtartja a levegőt az első és második részben , miközben elkezdi felfújni a 3. részt, és így tovább.
 - C B+ Minden lámpa világít, felfújás az összes csövön keresztül, szinkronban tartva és felfújva. Igény szerint kikapcsolható az egyes részek felfújása az 1-2-3-4 gombok megnyomásával.
 - C : Minden lámpa világít, felfújás egyszerre az összes csövön keresztül. Egyidejűleg fújja fel, tartja benne a levegőt és ereszt le az összes szekciót.
 - C+: Minden lámpa világít, felfújás egyszerre az összes csövön keresztül. Igény szerint kikapcsolható az egyes részek felfújása az 1-2-3-4 gombok megnyomásával.

Termékbiztonság

Emlékeztető: kattintson duplán az /B/C-re az B+/C+ üzemmódra való váltáshoz.

6, Minden üzemmódban növelheti + vagy csökkentheti - az intenzitást.

Product Safety

- 1, Ne használja ugyanazt a csatlakozót egyszerre más készülékkel.
- 2, Hagyja abba a használatát, ha nem érzi jól magát.
- 3, Kizárólag az eredeti adpatert használja..
- 4, Ne szerelje szét a masszírozót.
- 5, A masszírozót az utasításoknak megfelelően használja.

Biztonságos használat

- 1, Ne használja a masszírozót más, a kézikönyvben nem említett testrészen.
- 2, Ne használja a masszírozó készüléket más orvosi eszközök használata közben.
- 3, Ne használja a masszírozót, ha bármilyen súlyos betegsége van, vagy használat előtt konzultáljon orvosával.
- 4, Hagyja abba a masszírozó használatát, ha kényelmetlenül érzi magát, vagy bármilyen bőrreakciót észlel.
- 5, Gyermekek és olyan személyek, akik nem képesek felismerni a veszélyt, nem használhatják a masszírozót, tartsa távol tőlük a készüléket.
- 6, Ne használja a masszírozót fürdőszobában, magas hőmérsékletű környezetben.
- 7, Ne használja alvás közben.

Nem gyógyászati segédeszköz!

Tartozékok



1, Lábmandzsetta



2, Karmandzsetta



3, Derékmandzsetta



4, Levegőcsövek



5, Vezérlő




6, DC12V adapter




7, Rezgő talppárnák

Vezérlő

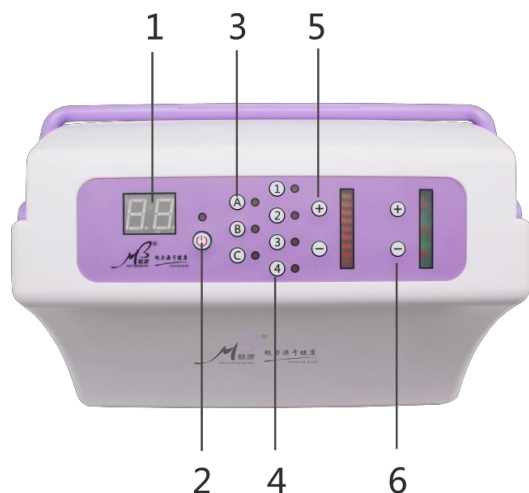


- 1, Időkijelző
- 2, BE/KIKAPCSOLÁS
- 3, A/B/B+/C/C+
- 4, 1,2,3,4 cső kiválasztása
- 5, Intenzitás beállítása
- 6, Idő beállítása

Összeszerelés

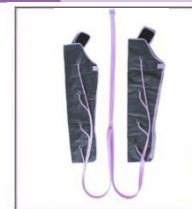

Csatlakoztassa a csöveket a masszírozóhoz a fenti képek szerint.

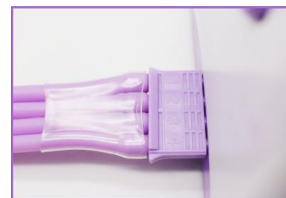

Csatlakoztassa a levegőcsöveket a vezérlőhöz az ábrán látható módon (a számok felül legyenek).



Csatlakoztassa az adaptert a vezérlőhöz az ábrán látható módon.

Funkciók

- * 9 fokozatú állítható intenzitás
- * A készülék bekapcsolásakor az 5. intenzitási szint a gyárilag beállított. Az intenzitást a bal +/- gombbal növelheti + vagy csökkentheti -.
- * A LED kijelző visszaszámolja a leállásig hátralévő időt. A megjelenő 20-as szám azt jelenti, hogy 20 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
- * A készülék bekapcsolásakor alapértelmezett értéként 20 perc a beállított idő. Az időt a jobb oldali +/- gombbal növelheti + vagy csökkentheti -.