


Az F-833 készülék összeszerelésének menete


- 1) Az egyes alkatrészek kicsomagolása után a mellékelt csavarhúzóval szereljük le az oszlop hátsó burkolatát.





- 2) A mellékelt csavarok és alátétek segítségével rögzítjük az oszlopot a kerek alpra.

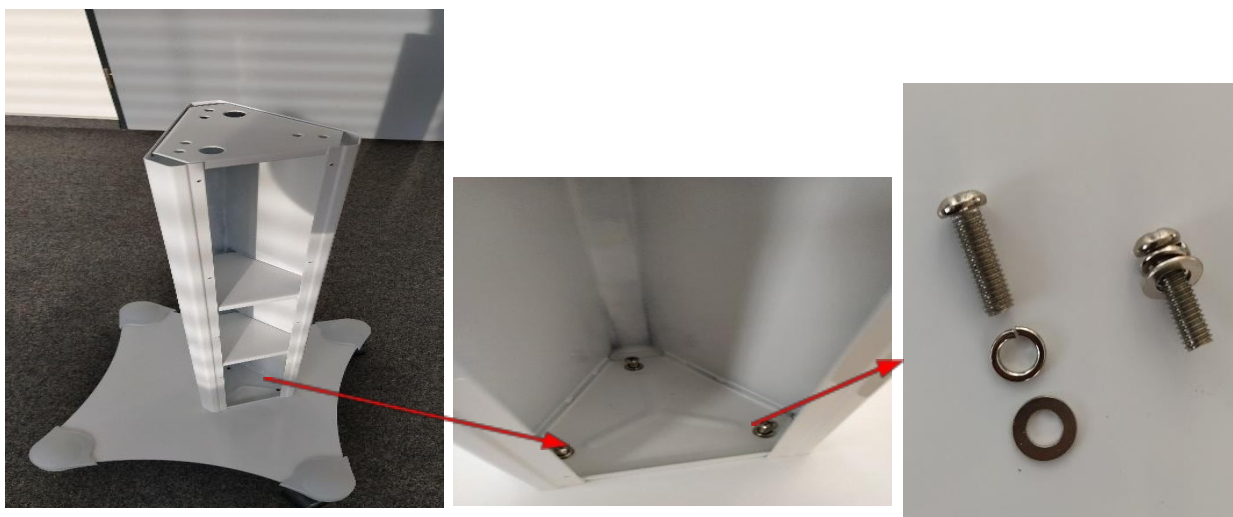

3) Helyezzük a gumialátétet az oszlop felső részére a kivágásoknak megfelelően.

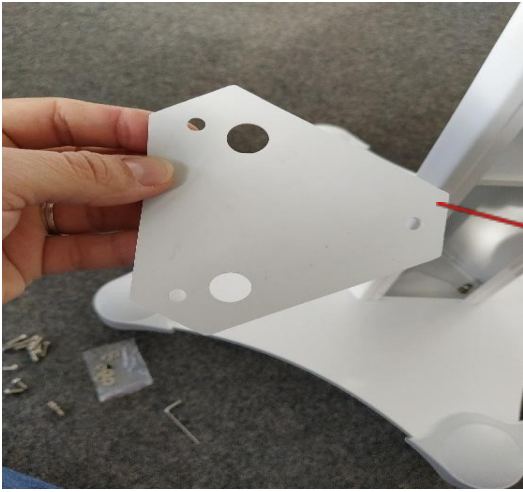


4) Helyezzük a masszírozó készüléket a gumialátétre, és a rögzítéshez használjuk ugyanazokat a csavarokat, mint az alsó részen.

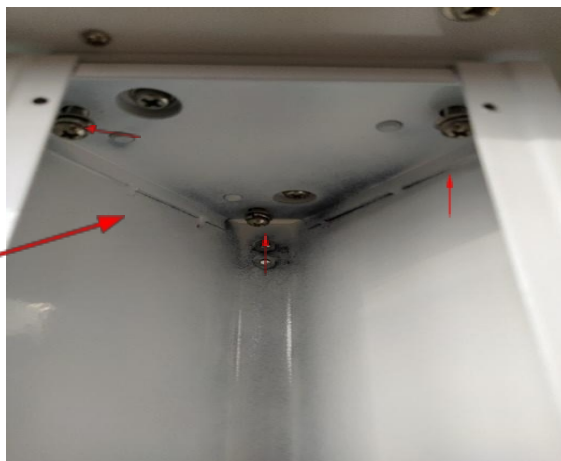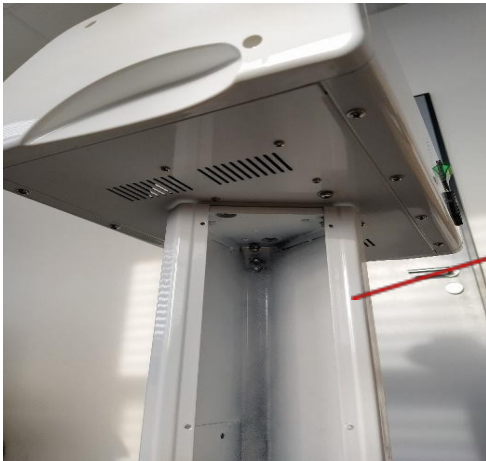

5) A műanyag tálca tartóját az oszlop elülső oldalára rögzítjük ugyanazokkal a 4 csavarokkal, mint eddig, de alátétek nélkül. A tartó rögzítése után a tálcát egyszerűen behelyezzük a keretbe.



- 6) A tárolótartót rögzítjük az oszlop és a készülék bal oldalára. Ehhez 3 csavart használunk, amelyek eltérnek az eddig használtaktól. A készülékhez való rögzítéshez alátéteket is használunk. Az oszlophoz rögzített csavar alátét nélkül van.

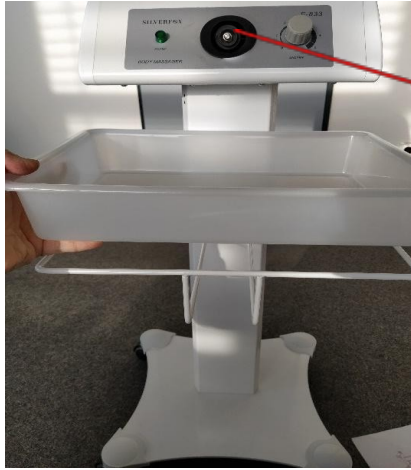

- 7) A masszírozó készülék tömlőjét imbuszkulccsal rögzítjük. Gondosan ellenőrizzük, hogy teljesen be van-e dugva és megfelelően rögzítve van-e.



8) Csavarjuk a kábel védőburkolatát a kijelölt helyre.



9) Helyezzük fel a műanyag védőburkolatot a masszírozófejre, majd csavarjuk rá a fejet a kábelre.



10) Csavarjuk a masszírozó készülék fejére a fejrészt, attól függően, hogy a test melyik részét szeretnénk masszírozni.



11) A hálózati csatlakozás után a készülék használatra kész.

