



H₂-O₂

Használati útmutató

Bevezetés

Először is köszönetünket fejezzük ki azoknak a vásárlóknak, akik megvásárolták cégünk berendezéseit. Ez a kézikönyv azért készült, hogy az ügyfél jobban tudja használni ezt az eszközt. Remélem, hogy a cég termékei és szolgáltatásai meghozzák Önnek az Ön által kívánt szolgáltatási színvonalat.

Vegye figyelembe

Ezt a terméket szigorúan a jelen kézikönyvben meghatározott felhasználási módnak megfelelően kell használni, ennek be nem tartása esetén minden következményt saját felelősségére visel, ez esetben a cég nem vállal felelősséget.

A Vállalat semmiféle garanciát nem vállal, beleértve (de nem kizárólagosan) az eladhatóságra és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. A vállalat nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben szereplő hibákért, illetve a kézikönyv biztosításával, teljesítésével vagy használatával kapcsolatos véletlen vagy következményes károkért.

Ez a kézikönyv olyan védett információkat tartalmaz, amelyeket a szabadalmi törvények védenek. Minden jog fenntartva. A kézikönyv egyetlen része sem másolható vagy fordítható le más nyelvre a vállalat írásos hozzájárulása nélkül.

A kézikönyv tartalma a felhasználó előzetes értesítése nélkül változha.

A gyártó felelőssége

A cég csak az alábbi esetekben vállal felelősséget a készülék biztonságáért és megbízhatóságáért: az összeszerelést, utánállítást, javítást és karbantartást a cég által elismert személyzet végzi, a vonatkozó elektromos berendezések megfelelnek a nemzeti szabványoknak, és a készüléket az utasításoknak megfelelően használják.

 Figyelem

Ez egy kozmetikai eszköz. Ha a műszer használatáért felelős kozmetikai intézmény nem éri el a megfelelő működési eljárásokat, az a műszer rendellenes meghibásodását okozhatja, és veszélyes lehet az emberi egészségre. Jelenleg cégünk egy bekötési rajzot bocsát rendelkezésre külön kalibrációs módszerek listájával és egyéb információkkal, hogy segítse a felhasználót a műszer azon alkatrészeinek javításában, amelyeket cégünk a felhasználó által szervizelhetőnek minősít, a felhasználó kérésére, térítés ellenében.

Garancia

Gyártási folyamat és alapanyagok: A cég garantálja, hogy a készülék (alkatrészek kivételével) normál használati és karbantartási feltételek mellett a szállítástól számított egy évig nem fog meghibásodni a gyártási folyamat és az alapanyagok hibái miatt.

Ebben a használati útmutatóban

Ez a használati útmutató minden általános információt tartalmaz erről az eszközről. Ez a kiindulópont az új felhasználók számára a műszer használatához, mivel általános bevezetést nyújt a rendszerhez, elmagyarázza annak működését, leírja a műszer telepítését és a különböző működési módokat. A szükséges információkat a nyilvántartáson keresztül találja meg. Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy megismertesse Önt ezzel a készülékkel, és hogy a kozmetikai eszközök használatában jártas kezelőszemélyzet elolvassa.

Kérjük, használja biztonságosan

A készüléken és a kézikönyven a következő szimbólumok szerepelnek. A készülék helyes használata, a kezelő és a beteg sérülésének elkerülése, a készülék sérülések elleni védelme, az anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, ügyeljen az alábbi szimbólumok típusára és jelentésére.

 Figyelem	Azt jelzi, hogy a működési hibák következtében halál vagy súlyos sérülés következhet be		A címke kötelező elemeket jelöl
 Veszély	Azt jelzi, hogy a működési hibák következtében halál vagy súlyos sérülés következhet be		A jel azt jelenti, hogy a projekt le van tiltva
 Figyelem	Azt jelzi, hogy a személyzet megsérülhet, és a készülék meghibásodhat a helytelen működés miatt		A jel a figyelem tárgyát jelzi
 Figyelem	Kérjük, ellenőrizze a kézikönyvet		Azt jelzi, hogy a védelem típusa, amelyhez az eszköz tartozik, B típusú
Emlékeztető	Emlékeztető figyelmeztetés, amely kiemeli a fontos információkat		

1.1 Óvintézkedések a használat során

Figyelem

- 1) Ne használjon elosztókat a tűz elkerülésére;
- 2) A biztosíték cseréjekor a főkapcsolót ki kell kapcsolni a tűz, áramütés elkerülése érdekében;
- 3) 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz tápegységet és földelt aljzatot kell használni
- 4) Sérült vagy elhasználódott tápkábel használatakor tűz vagy áramütés veszélye áll fenn;
- 5) Ne hajlítsa meg vagy csavarja túlságosan a tápkábelt a tűz vagy áramütés elkerülése érdekében;
- 6) Ha a szerszám meglazult vagy sérült, időben lépjen kapcsolatba a céggel;
- 7) Ne használja a készüléket instabil környezetben, például dőlés, vibráció, ütés esetén;
- 8) Víz vagy szennyeződés nem kerülhet a készülék belsejébe, idegen tárgy esetén forduljon a céghez;
- 9) A készülék mozgatásakor a hálózati csatlakozót ki kell húzni,
- 10) A vibráció elkerülése érdekében a műszert át kell helyezni;
- 11) A készüléket stabil helyre kell helyezni, legalább 5 cm-es helyet hagyva alatta, hogy biztosítva legyen a levegő keringése, ami segít elvezetni a készülékből kibocsátott hőt ;
- 12) A készüléket nem lehet letakarni semmivel, ami megakadályozza a szellőzőnyílások eltömődését;
- 13) Kerülje a készülék használatát az alábbi környezetben: napfénynek való kitettség; magas páratartalmú környezet; vízközelí környezet; vibráció, ferde hely; erős mágneses mező környezet; elektromágneses hullám, lökésfeszültség helye; vegyszerraktár, korrozív gázokkal rendelkező helyek;
- 14) Ezt a készüléket nem szabad rádiók, televíziók, fénymásolók, faxok stb. közelébe helyezni;
- 15) Nem használható más eszközökkel (például mikrohullámú sütővel) együtt, hogy elkerülje az eszközök közötti kölcsönös interferenciát, amely hibás működést okozhat

1.2 Használat előtti információk

Figyelem

- 1) A készülék bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A kezelőnek ismernie kell a használati utasítást és a kezelési módokat, a készüléket egy személynek kell kezelnie;
- 2) Állítsa be a működési paramétereket a beállítási szakértők irányítása mellett;

Figyelem

- 3) Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék normál üzemmódban van-e;
- 4) Ellenőrizze, hogy a földelő vezeték megfelelő-e;
- 5) Győződjön meg arról, hogy minden vezeték csatlakoztatva van és biztonságos;
- 6) Ha a készülékkel együtt használja, akkor azt helyesen kell használni, különben veszélyes lehet, és nagyon óvatosnak kell lennie..

1.3 Biztonsági intézkedések használat közben

Figyelem

- 1) Ha a készülék vagy a beteg működés közben nem működik, a kezelő azonnal átadja a kezelőkart a páciensnek, megnyomja a főkapcsolót, és abbahagyja a készülék használatát.

Figyelem

- 2) A készülék működése során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a vendég helyzetét a kozmetikai eljárás során és a készüléken, illetve figyelemmel kell kísérni, hogy nem fordul-e elő kóros helyzet;
- 3) A készülék helyes használatát bízta tapasztalt kezelőre, a készüléket a kezelő technikuson kívül más személy nem használhatja.

1.4 Biztonsági intézkedések használat közben

Figyelem

- 1) Működés után a vezérlőkar visszatér a vezérlőkar állványához.
- 2) A vezérlőkart a sonda használata után meg kell tisztítani, hogy készen álljon a további használatra.

1.5 Üzemzavar, tárolás, ellenőrzési intézkedések

Figyelem

- 1) Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően. Füstszag esetén a készüléket nem lehet tovább működtetni, ha tovább használja, áramütés veszélye áll fenn. Gyorsan nyomja meg a stop gombot, kapcsolja ki a tápellátást, húzza ki a dugót a konnektorból, és azonnal lépjen kapcsolatba a céggel vagy a forgalmazóval;
- 2) ha nem technikus. A készülék javítása és újrah használata teljességgel lehetetlen. A készüléket nem szabad szétszedni.

Figyelem

- 3) Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a szerszámokat és alkatrészeket
- 4) Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek károsítják a szerszám védőbevonatát, például keféket és seprűt;
- 5) Ha a szerszámot 2 hétnél tovább nem használják, a következő használat előtt alaposan ellenőrizni kell.

1.6 Megjegyzés és gyors utasítások.

Figyelem

Ha a nagyfrekvenciás eszközt és ezt a műszert egyidejűleg ugyanahhoz a pácienshez csatlakoztatják, a műszer elektródahelyzete égési sérüléseket okozhat a páciens bőrszövetében, és a műszer könnyen megsérülhet. Ha a készüléket nagyfrekvenciás vagy mikrohullámú berendezés közelében (1 m) használja, előfordulhat, hogy a készülék kimenete nem lesz stabil a mikrohullámú interferencia miatt. Az elektródák használata a mellkas közelében növeli a szívfibrilláció kockázatát..

2. Ellenjavallatok

-  1, Érzékeny bőr, súlyos akne
-  2, Szívritmus-mérő készülék, beültethető szívdefibrillátor vagy más elektromágneses beültethető orvosi eszköz
-  3, Súlyos cukorbetegség, magas vérnyomás és magas koleszterinszint
-  4, Bőrfertőzésben szenvedő beteg.

3. Bevezetés



4.1 Nyissa ki a csomagot és ellenőrizze

4.1.1 Vegye ki a készüléket és az összes alkatrészt a csomagolásból, legyen óvatos, majd őrizze meg jól a kartondobozokat és a habszivacsot, ha szállításra használja, ellenőrizze az összes alkatrészt az alkatrészlista szerint.

4.1.2 ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e, ha bármilyen probléma van vele,

Figyelem

Kérjük, forduljon cégünk értékesítési osztályához vagy képviselőjéhez.

4.2 helyezze a készüléket tiszta és szellőző helyiségbe, amelynek hőmérséklete kb. 5°C~40°C, a páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílás nyitva legyen, a készülék körül legalább 5 cm-nek kell lennie. és győződjön meg arról, hogy nincsenek dolgok az eszközön, még ideiglenesen sem..

4.3 Az eszközök mindkét oldalán a kimeneti interfészek alatti szövegek és képek szerint a megfelelő vezérlőkarok a fő keretekre vannak felszerelve.

4.4 Készülékleírás a készülék hátoldalán.



Hálózati bemenetel biztosíték vezeték hálózati kapcsoló


⚠ Figyelem

- A műszerek eltávolítása előtt dobja ki az A, B, C, D palackban lévő oldatokat és a hulladékoldat-palackokat. Ellenkező esetben a készülék megsérül, ha mozgás közben oldat kerül bele.

⚠ Figyelem

Ha gyakorlati használat közben zümögő hangot ad ki a készülék, figyelje a hulladékoldatot tartalmazó tartályon lévő jelzőt. Ha villog, öntse a hulladékfolyadék a palackba, és helyezze vissza a hulladékfolyadék-palackot.

5.1 A hidroabrázió használata

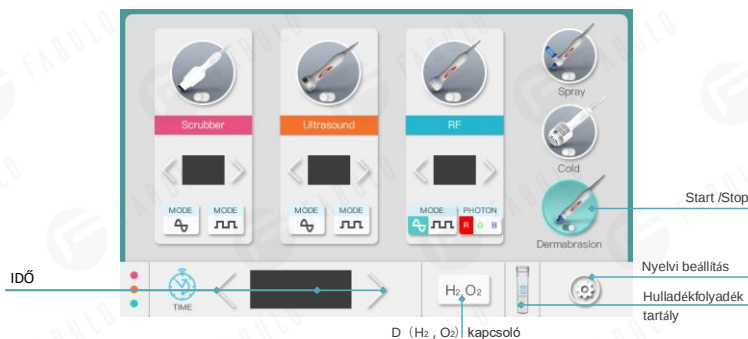

5.1.1 : Arctisztítás

5.1.2 : Válassza ki a vásárló arcának megfelelő hegyet, válassza ki a megfelelő termékpalackot a gombbal: ABC vagy D

5.1.3 : Válassza ki a vákuumot, a vízáramlást, indítsa el a készüléket, és kezdje meg az arc tisztítását.




Kattintson a H₂O₂-re a képernyőn, és várjon 3 percet a D palack használata előtt. H₂O₂-t kell termelnie.



Miután befejezte a terméket a palackokban, tisztítsa meg az ABCD palackokat és a csövet, hogy elkerülje az eltömődést.


5.2: Az oxigén spray felhasználása

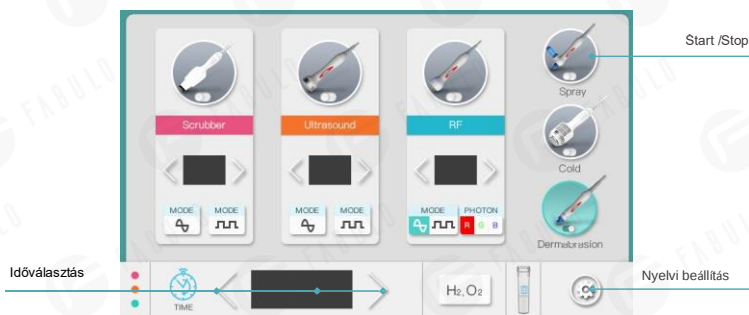

- 5.2.1 Vezérlőalkatrészek tisztítás közben;
- 5.2.2 Öntse a hígított esszenciát a szórópisztoly tartályába.
- 5.2.3 Kattintson a szórópisztoly gombra a képernyőn;
- 5.2.4 A szórópisztoly a pozícióra mutat és működésbe lép.
- 5.2.3 Hideg és meleg érzéstelenítő vezérlőkarok használata


⚠ Ha a fúvóka eltömődött, a szórófej segítségével távolítsa el a tüt a fúvókáról a törmelék eltávolításához.

5.3 : A cold head/ hide fej használata

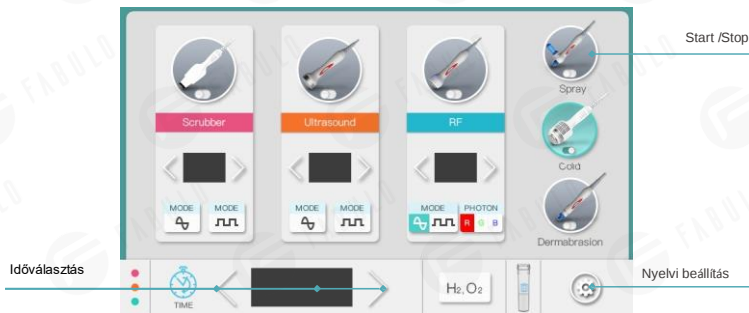

- 5.3.1 : Arctisztítás
- 5.3.2 : Kattintson a Start gombra
- 5.3.3 : Érintse meg az kliens bőrét, és indítsa el a műveletet

5.4 : A rádiófrekvencia használata

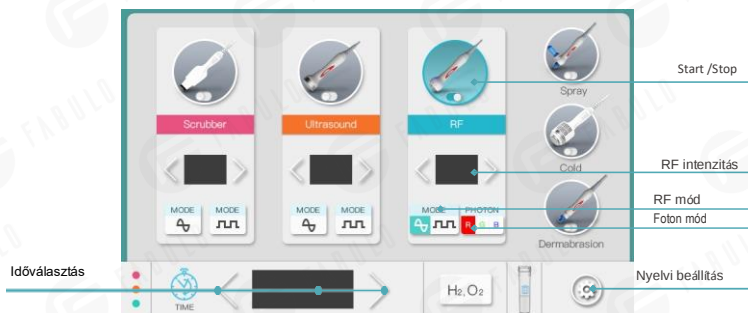

5.4.1 : Az arc tisztítása


5.4.2 : Használja a gélt a műtét helyén

5.4.3 : Válassza ki a megfelelő munkaidőt, intenzitást és üzemmódot

5.4.4 : Kattintson a Start gombra a művelet elindításához

5.4.5 : Az arcvonalaktól függően minden vonal felfelé vagy felfelé görbül

5.5 : Ultrahang használata

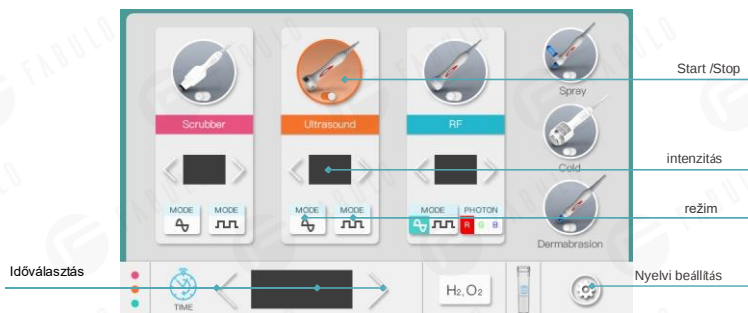

5.5.1 : Az arc tisztítása


5.5.2 : Használja a terméket a műtét helyén

5.5.3 : Válassza ki a megfelelő munkaidőt, intenzitást és üzemmódot

5.5.4 : Kattintson a Start gombra a művelet elindításához

5.5.5 : Lassan körözzünk felfelé a kontúrvonalak mentén 5-8 perc

5.6 : A kavitációs peeling használata

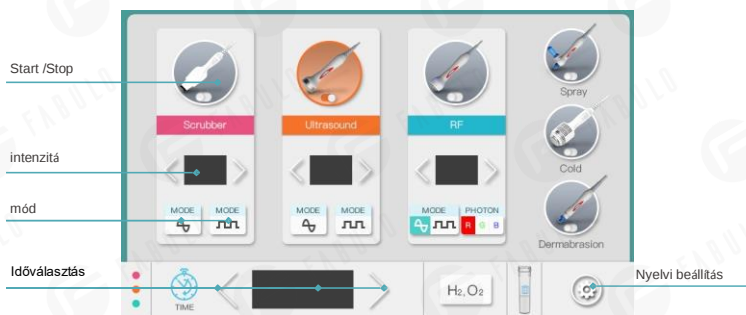

5.6.1 : Tisztítási módszer: Távolítsa el a szennyeződések

A : Tisztítsa meg az arcot

B : Tartsa a tapaszt mindkét oldalán.

C : Vigyen fel elegendő vizet a bőrre.

D : A vezérlőkar alulról felfelé 45°-ban döntött. Mint az 1. ábrán

E : üzemidő: 20 perc


5.6.2 : Kezdés : Nyirokmasszázs

A : Tisztítsa meg az arcot

B : Tartsa a tapaszt mindkét oldalán.

C : Vigyen fel elegendő mennyiségű terméket a bőrre.

D : Erősen nyomja a bőrt, és haladjon az izomszerkezet felé. Mint az 2. ábrán

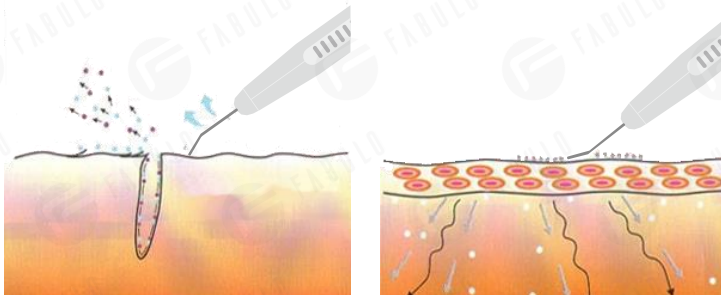

6. Amikre figyelni kell

Figyelem

6.1 Kezelés után 24 órán belül ne használjon irritáló kozmetikumokat, kozmetikumokat és ügyeljen a fényvédőkre

6.2 Használja a hidratáló maszkot folyamatosan 1 héti.

6.3 Az Evigation tollat nem használhatja olyan személyek, akiknek vékony a bőrük vagy sok vörös vér van az arcsontjukon.

6.4 Amikor az RF-videó működik, nem tarthat túl sokáig azoknak az embereknek, akiknek vékony a bőrük vagy sok a vörös vér az arcsontjukon.

6.5 Súlyos anafilaxiás vagy súlyos aknés betegek nem dolgozhatnak vele.

Figyelem

Ha a betegek kényelmetlenül érzik magukat, a biztonság érdekében állítsa le a készüléket a kézi vezérlő megnyomásával.

7. Jó állapotban tartás és karbantartás

7.1 Jó állapotban tartás

7.1.1 Napi ellenőrzés

A vezetőknek ellenőriznie kell az eszközöket és az összeszerelési egységeket.

a) Ha a konnektor nincs földelve, cserélje ki.

b) Az elektromos vezetékek deformálódtak, megrepedtek vagy szabad szemmel ki vannak választva. Ha igen, az tűzvesztéshoz vezethet. Azonnal cserélje ki az elektromos vezetéket egy újra.

c) A vezérlőkar nincs rendben vagy eltört - szabad szemmel látható, hogy a kimeneti vezetékek sérültek-e vagy deformálódtak, ha igen, azonnal cserélje ki.

d) A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a tipp helyes-e. Ha a tipp hibás, hagyja abba a használatát.

7.1.2 Tisztítás

A szerszám tisztításakor a port száraz és puha ruhával, a szennyeződések pedig puha, nedves ruhával kell letörölni.

A készülék tisztítása előtt a főkapcsolót ki kell kapcsolni, és az elektromos vezetékeket le kell választani.

7.1.3 A biztosíték cseréje

a) A tápegység biztosítékának műszaki adatai 8A (Φ5×20mm)

b) A biztosíték cseréjekor a következő lépések szerint járjon el:

1) Kapcsolja ki a főkapcsolót;

2) Húzza ki a hálózati csatlakozót;

3) Nyissa ki a biztosíték fedelét egy csavarhúzóval.

4) Távolítsa el a sérült biztosítékot, és cserélje ki egy újra.

5) Tegye vissza a biztosíték fedelét az eredeti helyzetébe;

6) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót;

Figyelem

A biztosíték cseréjekor kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a dugót a konnektorból, hogy elkerülje az áramütést.

7.1.4 A hosszú ideig (több mint egy éve) használt műszert szakképzett karbantartó személyzettel kell karbantartani a belső hamufoltok tisztítására.

7.1.5 Használaton kívül a készüléket szellőző és száraz helyen kell elhelyezni, és porálló burkolattal le kell fedni.

7.2 Karbantartás

- 7.2.1 A készülék megvásárlása után töltse ki a garancialapot, és küldje el a gyártónak vagy az értékesítési képviselőnek. Ekkor a garancia érvényes lesz; minőségi probléma esetén a főmotorra a vásárló értesítésétől számított egy évig ingyenes garanciát vállalunk. (Megjegyzés: Kérjük, a karbantartás során mutassa meg a megjegyzéseket és a jótállási jegyet; a garancia a fő motorra korlátozódik, kivéve az alkatrészeket és egyéb fogyóeszközöket, amelyeket időnként cserélni kell.
- 7.2.2 A jótállási idő lejártá után forduljon közvetlenül a gyártóhoz a jótállás utáni szervizhez.
- 7.2.3 Ha az utasítást meg kell őrizni, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy az eladóhoz. Ne javítsa saját maga a készüléket. Felbontás után a cég nem vállal felelősséget a garanciáért.

8. Gyakori problémák és elhárításuk módszerei

- 8.1 Ha az eszközök nem működnek megfelelően, ne szerelje szét és ne szerelje fel őket saját maga. A probléma okának meghatározása érdekében lépjen kapcsolatba a vállalat ügyfélszolgálati részlegével vagy forgalmazójával.
- 8.2 Mielőtt szervizbe kérne, ellenőrizze a készüléket az alábbi tippek alapján, és győződjön meg arról, hogy meg tudja-e oldani a problémát saját maga..

Hogyan nyilvánul meg a hiba	A hiba oka	Az elimináció és a megoldás módjai
Indítás után nincs reakció	Kihúzott tápcsatlakozó; A kapcsoló ki van kapcsolva; A tápegység biztosítéka megszakadt.	Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva a konnektorbá;
A vezérlőkar nem működik megfelelően	Nem nyomta meg a start gombot. A szonda helytelen beszerelése. Sérült munkafej. A csatlakozók helytelen felszerelése a készülék mögött.	Nyomja meg a start gombot Ellenőrizze, hogy a szonda megfelelően van-e telepítve Cserélje ki a munkafejet vagy a szilikon hurkot Telepítse újra a készüléket
Folyadék szívárgás	A szilikongumi tömítőgyűrű sérült vagy hiányzik. A telepítési utasításokat nem követték	Cserélje ki a szilikon gumigyűrűt Forduljon vissza a gyártóhoz az átdolgozáshoz

9. Gyártási felelősség

9.1 A termékeknek meg kell felelniük a termékszabványnak. Ha ezek nem megfelelőek, cégünk feladata a készülékek cseréje és visszaszolgáltatása.

9.2 Cégünk felelősséggel tartozik a termék hibájából eredő egészség- és anyagi károkért, kivéve az alábbi eseteket:

- a) A vásárlók és üzemeltetők a termékeket nem az utasításoknak, biztonsági intézkedéseknek és figyelmeztetéseknek megfelelően használják.
- b) Szállításra, telepítésre, használatra, karbantartásra, tárolásra és egyéb rendelkezések megszegése.

9.3 Cégünk a termék élettartamra szóló karbantartását és műszaki szervizelését ígéri. A megadott minőségi garanciális időszak alatt fellépő minőségi problémákat díjmentesen kijavítjuk..

10. Alkatrészek cseréje.

Az alkatrészek cseréjekor azokat cégünkől kell megvásárolni.

11. Tárolás és szállítás

- 11.1 Tárolás: Tároláskor a készüléket az eredeti csomagolásban kell elhelyezni, és jól szellőző tiszta helyiségben kell elhelyezni. A csomagolódoboznak ellenállnia kell a -10 C és 40 C közötti környezeti hőmérsékletnek és a 93%-nál nem magasabb relatív páratartalomnak. Nincsenek káros gázok, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok és korrozív gázok.
- 11.2 Szállítás: A készülék a csomagolási körülmények között autópályára, vasútra, légi közlekedésre és vízi utakra alkalmas. A kezelés és a szállítás során erős rezgések és ütések nem fordulhatnak elő. Nem lehetnek nedvesek, és nem keverhetők gyúlékony vagy korrozív anyagokkal. A konkrét követelményeket az adásvételi szerződés tartalmazza.

12. Élettartam

- 12.1 Ennek a szerszámnak a garanciális ideje 1 év. (Megjegyzés: az ember okozta károk nélkül)
- 12.2 Az alkatrészek jótállási ideje 3 hónap. (Megjegyzés: az ember okozta károk nélkül)
- 12.3 Az elhasznált eszköz használatát a technikusnak jóvá kell hagynia, és a technikusnak rendszeresen ellenőriznie kell az eszköz működőképességét a későbbi használat során.
- 12.4 A kiselejtezett szerszámokat és az elhasznált alkatrészeket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.