

Kozmetikai készülék AM 60 -


Mikrodermabrázió

Előszó

A mikrokristályos dermabráziót először a firenzei Mattioli javasolta, és több mint 20 éves múltja tekint vissza. Ezt a fajta technológiát az első időkben csak bőrgyógyászok és orvosok számára volt elérhető, de fokozatosan a gyógyfürdők és szépségszalonok is elkezdtek használni, és az orvosi szépségápolás legjobb módszereként üdvözölték. Ezt a módszert Európában már több éve sikeresen fejlesztik, több ezer páciens kezelnek, és rendkívül kielégítő a hatása.

Most szeretnénk bemutatni a **gyémánt dermabráziót**, amely a mikrokristályos dermabrázió kreatív továbbfejlesztése. A gyémánt dermabrázió egy nem sebészeti bőrfelszín-megújító eljárást biztosít, amely steril gyémántfejekkel csiszolja vagy kaparja le a bőr legfelső rétegét, majd a részecskéket a törmelékkel együtt kiszívja a bőrből, majd az elhalt hámrétegek visszahúzódnak.

Ez az eljárás eltávolítja a bőrmaradványokat, a bőrhibákat, a ráncokat és a nem kívánt pigmentációt a bőrön. A gyémánt dermabrázió következetes alkalmazása, valamint a bőr felső rétegén keresztül a dermisz szintjéig behatoló bőrgyógyászati termékek segítik a természetes tápanyagok felszívódását, a sejtek aktivitásának helyreállítását és támogatják az egészséges bőr kialakulását. A mikrodermabráziós kezelés utáni eredmény általában egészséges, ragyogó és szép bőr.

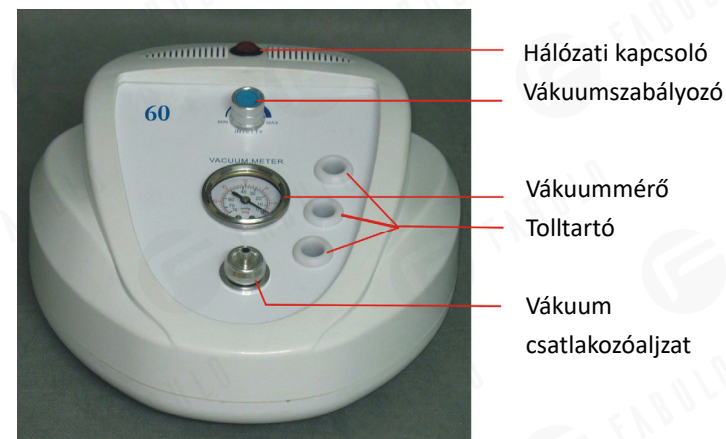

*** Előkezelés előkészítése

1. A konzultáció magában foglalja a bőrvizsgálatot, a kezelési tervet.
2. A kezelőnek vinil kesztyűt és arcmaszkot kell viselnie.
3. Zsíros vagy pattanásokra hajlamos bőr esetén a kezelés előtt gőzölőt lehet használni, vagy a tisztítás előtt zsirtalanító krémet lehet alkalmazni.
4. Tisztítsa meg a bőrt tisztító géllal vagy vízzel, majd törölje át vattakoronggal. Hagyja a bőrt megszáradni.

Használati utasítás a gyémánt

dermabrázióhoz

1. Nyomja meg a hosszabbítón lévő rézfúvóka mozgó gyűrűjét, és húzza ki a 6x4-es vákuumtömlőt. Ezután nyomja be a vákuumtömlőn lévő fekete műanyag gyűrűt.
2. Vigyen fel egy csepp tejszínt vagy tejet a vákuumtömlő fúvókájára, nyomja meg a mozgó gyűrűt, és tolja be teljesen a vákuumtömlőt.
3. Helyezze a vattapamacst a gyémántfejbe, majd rögzítse a gyémántfejet a fogantyúhoz. Minden kezelés után távolítsa el a vattapamacst.
4. Kapcsolja be a főkapcsolót.
5. Állítsa be a vákuum intenzitását a vákuumvezérlővel a következő referencia táblázat szerint, az intenzitás megjelenik a vákuumjelzőn, és ellenőrizze az ügyfél kényelmét.

Ajánlott vákuumintenzitás a kezelt felületen

A kezelés területe	Normál (inHg)	bőr	Érzékeny (inHg)	bőr
Face	12-22		8-12	
Fejléc	12-22		10-12	
Mellkas	15-20		15-18	
Orr	10-15		10-14	
Krk	18-18		10-15	
Szemkörnyék	8-12		8-10	

Kezelési ütemterv táblázat


Kezelés	Gyakoriság (napokban)	Látogatások száma összesen
Arc hámlás	6-10	3-5
Finom vonalak	7-13	6-8
Krk	12-14	3-5
Pattanásos hegek	7-12	8-10
Hiperpigmentáció	7-12	8-10

6. Használja a rögzítőelem ferde területét a bőrfelülettel való érintkezéshez. Folytassa lassú csúszó mozdulattal. Ne tartsa túl sokáig egy helyben a tartozékot, ez károsítja a bőrt.
7. Lassan állítsa be a kristály áramlási sebességét a vákuumszabályzóval a minimumtól a maximumig. Normál használat esetén ne állítsa az áramlási sebességet a maximumra,

hacsak nem szükséges.

8. Finoman feszítse meg a bőrt a hüvelykujjával és egy ujjával, és csúsztassa a tartozékot 2-3 alkalommal a kezelt területen. Ezután keresztezze újra különböző irányokban, hogy elkerülje sávok kialakulását (mint a referenciaképen). Ecsetvonásokat vagy csiszoló mozdulatokat lehet alkalmazni a különböző területeken.

A JAVASOLT MOZGÁSOK DIAGRAMJA ÉS A DERMABRÁZIÓRA SZÁNT TERÜLETEK

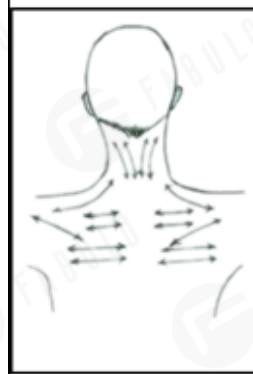

*** Kövesse a nyilak irányát.**

9. A kezelés után puha kefével távolítsa el az elhalt bőr maradványait, és nedves szivaccsal vagy nedves hideg törülközővel öblítse le.

10. Hagyja megszáradni a bőrt, majd alkalmazza a kívánt bőrápoló terméket.

11. A gyémántfej tisztításához egy kevés alkohollal megnedvesített fogkefével vagy vattapamaccsal törölje le a szennyeződések, majd UV-fénnyel vagy magas hőmérsékleten sterilizálja.

Biztonsági figyelmeztetés

Fontos figyelmeztetés a készülék használata előtt:

Soha ne használja ezt a készüléket olyan személyen, akinek az alábbiakban leírt egészségügyi állapota van vagy szenved. (A szalon vagy az üzemeltető megfontolhatja, hogy az ügyfél aláírjon egy lemondó nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs semmilyen súlyos egészségügyi állapota).

1. Szívbetegség
2. Szívzörej vagy szabálytalan szívverés
3. Pacemakerrel vagy más típusú szívritmus-szabályozóval rendelkezik
4. Terhesség
5. Epilepszia
6. Alkoholizmus
7. Fekély
8. A gyomor, a belek, a máj vagy a hasnyálmirigy betegsége

9. Mellrák

10. Folyamatban lévő kezelés bármilyen rákos megbetegedés miatt

11. Az előző évben komoly műtéten esett át

12. Asztma

13. Megfázás, influenza vagy gyomorrontás

14. Bármilyen súlyos betegség vagy betegség, amely a fentiekben nem szerepel

Ne használja a következő területeken:

1. Érzékeny bőr

2. Bőrkéreg

3. Sérült, gyulladt vagy fertőzött bőr

4. 12 hónapnál nem régebbi műtéti heg

5. Duzzadt bőr

6. A szondákat nem lehet a szemgolyóba irányítani

7. Nemi szervek

1. Mindig óvatosan kezdje el a kezelést, és figyelje meg a bőr érintésére és megjelenésére gyakorolt hatásokat. A túl nagy vagy túl nagy vákuumteljesítmény gyulladáshoz vezethet.

2. A kezelés után ödéma és bőrpír jelentkezhet, de ezek néhány órán belül elmúlnak.

3. A túl agresszív technikák a következő 3-4 napban enyhe hámlást okozhatnak. A túl agresszívan kezelt epidermisz vérzéshez vezethet a felszíni dermiszben.

4. A gyémánt dermabrázió nem alkalmazható érzékeny területeken, például a szemhéjakon. A szemhéjakat az eljárás alatt mindig le kell zárni, és nedves vattakoronggal le lehet takarni.

5. A következő területek kezelésre alkalmatlannak minősülnek: Bőrdaganat, anyajegyek, angioma, ajkak, szem, herpesz, bőrrák és májfoltok.

6. **Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket, a karbantartáshoz forduljon szakemberhez.**

Problémamegoldás

Ha a készülék nem működik megfelelően, a karbantartás igénylése előtt végezze el a következő eljárásokat.

1. Alacsony szívóteljesítmény/alacsony vákuumnyomás:

Ellenőrizze még egyszer, hogy a vákuumtömlő jól csatlakozik-e a csatlakozóaljzathoz, majd a tartozékhoz. Ezután fordítsa a vákuumszabályozót a maximumra, majd indítsa el a gyémánt dermabráziót, majd az ujjával zárja el a tartozékon lévő lyukat. Normál esetben a vákuummérő 24 hüvelyk Hg értéket tud mérni.

**** Ellenőrizze az O-gyűrűt a gyémánt tollakban és az O-gyűrűt a foglalatban!**

Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon a forgalmazójához. Ne nyissa ki saját maga a készüléket a technikus utasításai nélkül.

2. Nincs válasz, amikor bekapcsolják a készüléket.

Kérjük, cserélje ki a biztosítékot. És csatlakoztassa helyesen a tápkábelt. Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.

Kellékek és tartozékok

Gyémánt dermabráziós gép x 1

PVC vákuumtömlő 6*4 x 1

Gyémánt toll x 2

Tollak doboza és hab x1

Gyémánt fej x 9

Fejek doboza és hab 1

O-gyűrű x 2

Pamut szűrő x 1 csomag

Tápkábel x 1

Biztosíték x2

Kézikönyv x 1

Műszaki adatok:

Tápegység: 240V/50/60Hz

220V/50/60Hz

115V/60Hz

Teljesítmény: 65 VA Biztosíték: 2A