

BeautyOne AM 60 mikrodermabráziós és narancsbőr elleni készülék

BeautyOne AM60

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



CE

1. A készülék működési elve

A cellulógia egy olyan kezelés, amely a mechanikus vákuumos masszázst kombinálja a bőrredők egyidejű feszesítésével (szívás) és a mozgó görgőkkel történő görgetéssel. Ennek az alkalmazásnak köszönhetően a cellulológia a bőrre és a bőr alatti zsírszövetre hat, és ez a módszer a kötőszöveti masszázhhoz sorolható. Ezt a masszázst gyakran lipomasszázsnek is nevezik. A kezelés a zsírsejtek lebontásával a cellulit eltávolítását és a testkörfogat látható csökkenését eredményezi. A hegek és striák láthatóan csökkennek. A mikrokeringés serkentése következtében csökken a duzzanat. A celluloterápia során a mellék kivételével az egész testet masszírozzák egy speciális csésze alakú fejjel, amely 6 mozgatható görgővel van felszerelve, amelyek egy szívócsőhöz csatlakoznak. A masszázsokat különösen a cellulit által érintett területeken végzik. Leggyakrabban a combokat, a hasat és a fenéket masszírozzák. A kezelések teljesen invazív és biztonságosak, és támogatják a szervezet természetes folyamatait.

2. A berendezés a következőkből áll:

- Egyedi AM60 berendezés
- Kezelőfejek 5 db
- Szilikon cső 2 db

Szűrőrendszer tartályai

- Hálózati kábel
- Garancialevél

Használati utasítás



1. ábra: AM60 készülék




2. ábra: kezelőfej



4. ábra: Szilikoncső



3. ábra: szűrőrendszer tartálya

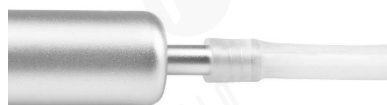

5. ábra: A csövek csatlakoztatása

3. A készülék telepítése

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez, majd egy konnektorhoz.
2. Csatlakoztassa a szilikon tömlőt a készülékhez, majd a szűrőrendszer tartályához.
3. Csatlakoztassa a szilikon tömlőt a szűrőfejhez egy fél fordulatot végrehajtva, majd csatlakoztassa a szilikon tömlő másik részét a szűrőrendszer tartályához.
4. Kapcsolja be a készüléket a készülékház felső burkolatán lévő piros gomb megnyomásával.
5. A potenciométer segítségével az elvégzendő kezelésnek megfelelően változtassa meg a készülék szívóteljesítményét.
6. Kapcsolja ki a készüléket a piros gomb segítségével, és válassza le a hálózatról.

4. A berendezés tisztítása

Minden egyes eljárás után a fejet, a csöveket és a szűrőt meg kell tisztítani az eljárás során használt termékmaradványoktól.

5. A fejek meghatározása



1. Heg és striák fej Ø15 mm
2. Hasi és vállfej Ø 25 mm
3. Hasi és vállfej Ø 35 mm
4. Comb és fenékfej Ø 55 mm
5. Comb és fenékfej Ø 80 mm

6. Az eljárással kapcsolatos ajánlások

- cellulit eltávolítása
- a bőr feszesítése
- testformálás
- a vérkeringés serkentése
- striák és hegek kisimítása
- a duzzanat csökkentése
- előkészítés a zsírleszívásra
- öregedésgátló kezelés
- hegek, égési sérülések, duzzanatok támogató kezelése
- relaxációs kezelések

7. Kontraindikációk

- rák
- terhesség
- bőrgyulladás
- a bőr mechanikai sérülése
- vérzésre és petechiákra (véraláfutásokra) való hajlam
- törött hajszálerek
- keringési elégtelenség
- láz, gyengeség és kachexia
- előrehaladott artériás magas vérnyomás

Mikrodermabrázia

Előszó

Használati utasítás a gyémánt dermabráziához

1. Nyomja a rézfúvóka mozgatható gyűrűjét a hosszabbítóra, és húzza ki a 6x4-es vákuumtömlőt. Ezután nyomja be a fekete műanyag gyűrűt a vákuumtömlőn.
2. Vigyen fel egy csepp tejszínt vagy tejet a vákuumtömlő fúvókájára, nyomja meg a mozgatható gyűrűt, és tolja be teljesen a vákuumtömlőt.
3. Helyezze a vattapamacsot a gyémántfejbe, majd rögzítse a gyémántfejet a fogantyúhoz. Minden kezelés után távolítsa el a vattapamacsot.
4. Kapcsolja be a főkapcsolót.
5. Állítsa be a vákuumintenzitást a vákuumvezérlővel az alábbi referenciatáblázat szerint, az intenzitás megjelenik a vákuumjelzőn, és ellenőrizze az ügyfél kényelmét.

Ajánlott vákuumintenzitás a kezelt felületen


A kezelés területe	Normál bőr (inHg)	Érzékeny bőr (inHg)
Arc	12-22	8-12
Homlok	12-22	10-12
Melkas	15-20	15-18
Orr	10-15	10-14
Nyak	18-18	10-15
Szemkörnyék	8-12	8-10

Kezelési ütemterv táblázat

Kezelés	Frekvencia (napok)	Látogatások száma összesen
Arc hámlás	6-10	3-5
Finom vonalak	7-13	6-8
Nyak	12-14	3-5
Pattanásos hegek	7-12	8-10
Hiperpigmentáció	7-12	8-10

6. Használja a rögzítőelem ferde területét a bőrfelülettel való érintkezéshez. Folytassa lassú csúszó mozdulattal. Ne tartsa túl sokáig egy helyben a tartozékot, ez károsítja a bőrt.
7. Lassan állítsa be a kristály áramlási sebességét a vákuumszabályzóval a minimumtól a maximumig. Normál használat esetén ne állítsa az áramlási sebességet a maximumra, hacsak nem szükséges. Ez a jobb kényelmi intenzitás érdekében történik.
8. Finoman feszítse meg a bőrt a hüvelykujjával és az ujjával, és csúsztassa a tartozékot 2-3 alkalommal a kezelési terület fölé. Ezután húzza át ismét különböző irányokban, hogy elkerülje a csíkos vonalakat, mint a referencia képen. Ecsetvonásokat vagy csiszoló mozdulatokat lehet alkalmazni a különböző területeken.

* Kövesse a nyilak irányát.

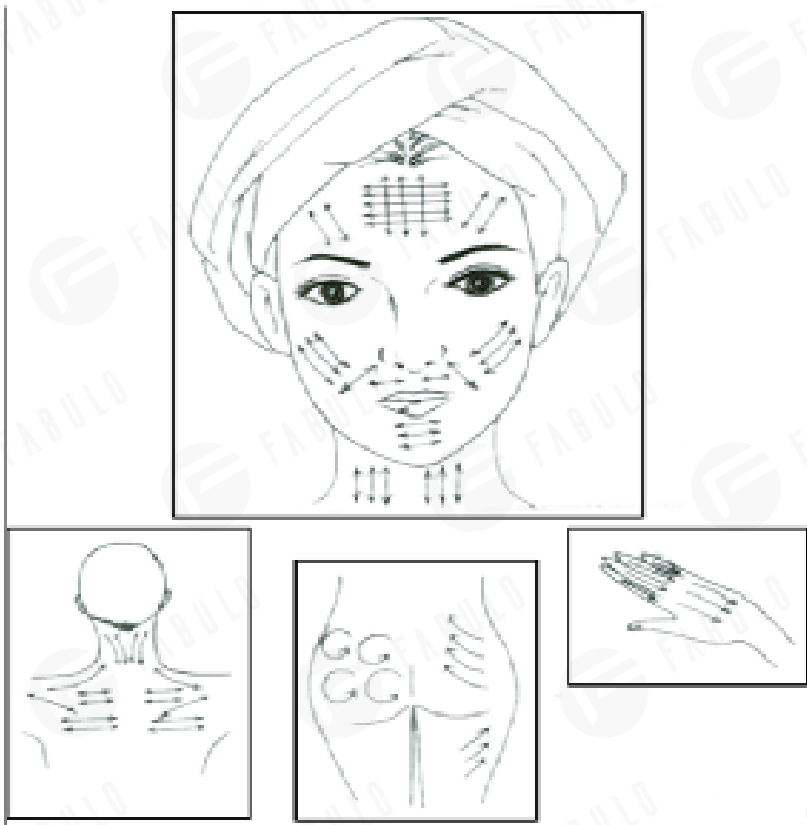

9. A kezelés után puha kefével távolítsa el az elhalt bőr maradványait, és nedves szivaccsal vagy nedves hideg törülközővel öblítse le.

10. Hagyja megszáradni a bőrt, majd alkalmazza a kívánt bőrápoló terméket.

11. A gyémántfej tisztításához egy kevés alkohollal megnedvesített fogkefével vagy vattapamaccsal törölje le a szennyeződések, majd UV-fénnyel vagy magas hőmérsékleten sterilizálja.

Biztonsági figyelmeztetés

Fontos figyelmeztetés a készülék használata előtt:

Soha ne használja ezt a készüléket olyan személyen, akinek az alábbiakban leírt egészségügyi állapota van vagy szenved. (A szalon vagy az üzemeltető fontolóra veheti, hogy az ügyfél aláírjon egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs semmilyen súlyos egészségügyi állapota).

1. Szívbetegség
2. Szívzörej vagy szabálytalan szívverés
3. Pacemakerrel vagy más típusú szívritmus-kiegyenlítővel rendelkezik.
4. Terhesség
5. Epilepszia
6. Alkoholizmus
7. Fekélyek
8. A gyomor, a belek, a máj vagy a hasnyálmirigy betegségei.
9. Mellrák.
10. Folyamatban lévő kezelés a rák bármely formája miatt.
11. Tavaly nagyobb műtéten esett át.
12. Asztma
13. Megfázás, influenza vagy gyomorrontás
14. Bármilyen, a fentiekben fel nem sorolt súlyos betegség vagy betegség.

Ne használja a következő területeken:

1. Érzékeny bőr
2. Bőrkütiés
3. Sérült, gyulladt vagy fertőzött bőr.
4. 12 hónapnál nem régebbi műtéti heg.
5. Duzzadt bőr.
6. A szondákat nem lehet a szemgolyóba irányítani.
7. Nemi szervek.

1. Mindig óvatosan kezdje el a kezelést, és figyelje meg a bőr érintésére és megjelenésére gyakorolt hatásokat. A túl nagy vagy túl nagy vákuumteljesítmény gyulladásos reakciót okozhat.

2. A kezelés után ödéma és erythema jelentkezhet, de néhány órán belül elmúlik.

3. A túl agresszív technikák enyhe hámlást okozhatnak a következő 3-4 napban. A túl agresszívan kezelt epidermisz vérzéshez vezethet a felszíni dermiszben.

4. A gyémánt dermabráziót nem szabad érzékeny területeken, például a szemhéjakon alkalmazni. A szemhéjakat az eljárás alatt mindig le kell zárni, és nedves vattakoronggal lehet letakarni.

5. A következő területek nem tekinthetők alkalmasnak a kezelésre: Bőrdaganat, anyajegyek, angioma, ajkak, szemek, herpesz, bőrrák és májfoltok.

1. A készülék a szépségszalonokban használatos professzionális berendezés. A készüléket csak képzett szépségápolási szakemberek kezelhetik, hogy elkerüljék a kezelés során fellépő káros hatásokat.

2. A berendezést nem szabad szétszerelni, és nem szabad a jelen használati utasításban meghatározottaktól eltérő célokra használni. 3. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy használni - a készülékbe nem kerülhet folyadék.

4. Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon hivatalos szervizhez

a) Folyadék került a készülékbe,

b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki,

c) a tápkábel megsérült,

d) a készüléket feldöntötték vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor befejezte a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a készülék nyílásába, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leejti.

9. A készülék élettartamának garantálása érdekében ajánlott betartani az egyperces intervallumot

a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).

10. A tápegységnek meg kell felelnie a készülék címtábláján szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a hibás működés, a károsodás vagy akár a sebességváltó kiegészének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz - ezzel megelőzhető minden veszély.

2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek és csökkent fizikai és szellemi képességű, valamint a berendezéssel kapcsolatos nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy a berendezés biztonságos használatára vonatkozó oktatást biztosítanak, hogy a vele járó veszélyeket megértették.

3. A berendezés nem arra szolgál, hogy a gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést, ha a közelben gyermekek vagy a berendezés használatához nem megfelelő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.

5. Ez az elektromos berendezés nem játék. Az elektromos berendezés nem megfelelő használata vagy az elektromos berendezéssel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a berendezést gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.