

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

BeautyOne Sillon Classic 3 elektromos kozmetikai kezelőszék



*** A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT *.**

Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz a készülék üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban. A készülék használata előtt olvassa el a mellékelt használati útmutatót. Használja a készüléket a leírtak szerint. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy minden olyan személy, aki a készüléket használhatja, megismerje azt.

A Sillon elektromos szépségágy egy professzionális berendezés, amely tökéletes bármely szépségszalon számára. Ideális masszázshoz, szépségkezelésekhez és fizioterápiához is. Az ágyat úgy tervezték, hogy teljes kényelmet biztosítson, miközben a kezelés alatt rajta fekszik. Az ágy négy részből és egy kivehető párnából áll. Az ülés két oldalán fogantyúk találhatók, ahová a távirányítót akaszthatja, így az mindig kéznél van.


A termék teherbírása: 150 kg

A széktest maximális terhelhetősége 150 kg. Ne emeljen többet a megadott súlynál, mint amit a szék elbír. Ne ugráljon a háttámlán, és ne gyakoroljon nagy nyomást a karfákra, hogy ne sérüljön meg a termék szerkezete.



Figyelem

A csomagoláshoz kartont és külső dobozokat használunk, összesen 10 réteg papírral, amelyek védelmet nyújtanak a termékeknek. Javasoljuk az eredeti csomagolás megőrzését a későbbi használatra, különösen a garanciális időszak alatti visszaküldések esetén. Biztonsági okokból két emberre van szükség a kozmetikai ágyak a dobozból való kiemeléséhez. Emeléskor álljon a szék fej- és lábtámlájának mindkét oldalára. Ne feledje, hogy az ágyat csak a fej- és lábtartó helyzetéből lehet felemelni, a karfa mindkét oldaláról nem.

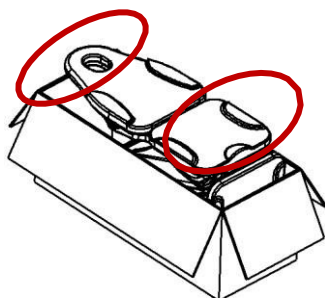

A szék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e, és nem sérült-e meg a szállítás során. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, a készülék átvételétől számított 2 napon belül értesítse a szállító céget vagy az értékesítés utáni személyzetet. Győződjön meg arról, hogy a szállításkor minden tartozék teljes. Ha a tartozékok a szállításkor hiánytalanok. Ha a szállításkor hiányoznak a tartozékok, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni munkatársakkal.


Az elektromos kozmetikai széket zárt, száraz helyiségben kell használni. A helyiség hőmérsékletének $+10^{\circ}$ és -40° között kell lennie, a relatív páratartalomnak pedig 30% és 75% között kell lennie. Ha az elektromos kozmetikai szék 0° alatti hőmérsékletnek volt kitéve, használat előtt várjon legalább 5 órát, hogy a készüléknek legyen ideje elérni a szobahőmérsékletet.

Az elektromos kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és tegye meg a következőket:


1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolítottak.
2. Győződjön meg arról, hogy az ágy működőképes.
3. Helyezze az elektromos kozmetikai széket arra a helyre, ahol használni fogja.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.

Megjegyzés! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad az elektromos kozmetikai szék közelében játszani. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózatról, és ne hagyja felügyelet nélkül. Húzza ki a tápkábelt is.

A készülék méretei:

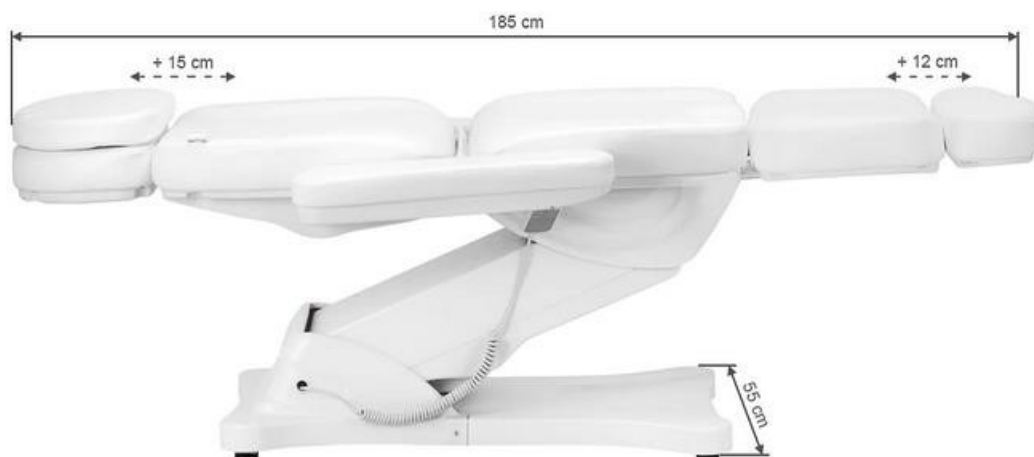

A készülék felépítése:

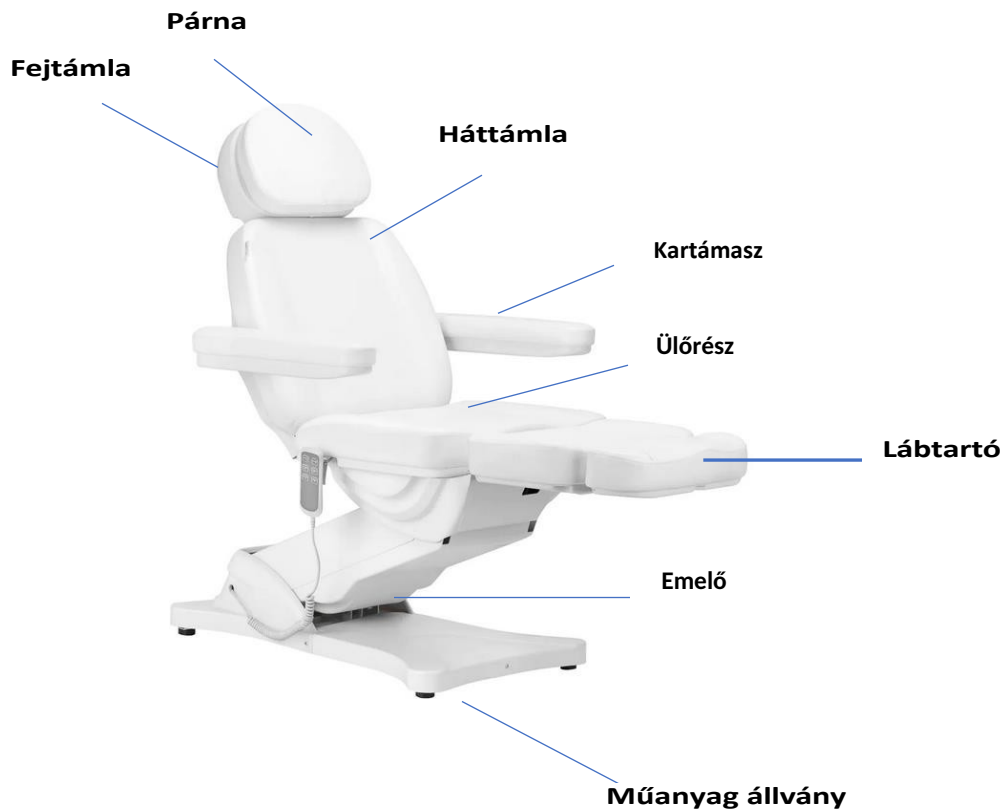

Figyelmeztetés

1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.
2. Ne üljön közvetlenül a karfára és a lábtartóra.
3. Ne használja az elektromos nőgyógyászati vizsgálószéket gyúlékony gázok közelében.
4. Ne emeljen nagyobb súlyt, mint amekkorát a szék elbír.
5. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzatok közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

Megjegyzés:

1. Biztonsági okokból a tápkábelt mindig földelt konnektorba csatlakoztassa.
2. Ne kösse a tápkábelt a készülékhez, mert a tápkábel felemelése vagy húzása károsíthatja azt. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel vészhelyzetben könnyen eltávolítható.
3. Az elektromos szépségágy mozgatása előtt távolítsa el a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.
4. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja az ágyat, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.
5. Ne engedje, hogy olyan személy irányítsa a távirányítót, aki nem az eljárást végzi.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.
7. Győződjön meg róla, hogy a szék körül elegendő szabad hely van, hogy szabadon össze- és széthajtható legyen.
8. Győződjön meg róla, hogy a szék körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.
9. Ne módosítsa a készüléket saját maga. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.

A készülék használata

A készülék rendelkezik ülés- és háttámla-fűtés funkcióval, amely lehetővé teszi az izmok ellazulását és a pihenést a kezelés során. A fűtés bekapcsolásához egyszerűen válassza ki a fűtés ikonját a vezérlőpanelen, majd nyomja meg azt. A fűtés kikapcsolásához nyomja meg ismét az ikont.




1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy külső 110V~240V-os tápegységhez.


A kartámasz beépítési módja:

Az ülésnek vízszintes helyzetben kell lennie ahhoz, hogy a kartámaszokat rá lehessen szerelni. Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található furatba. A kartámasznak szilárdan kell rögzülnie. Csavarja el jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére kerüljön. Ugyanígy járjon el a másik kartámasszal is.

A kartámasz merőleges a talajra (függetlenül az ágy szögétől). 180°-kal elforgatható.

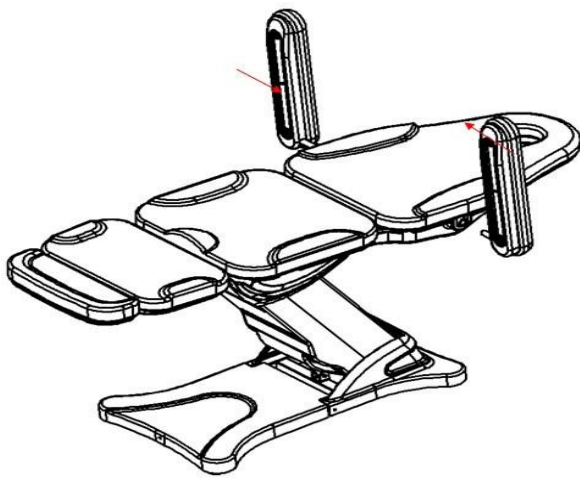

1. Kézi vezérlés funkció (emelési magasság: az ágy 58~82cm a talajtól)

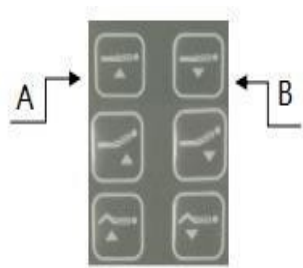


B

A



2. Kézi vezérlési funkció (Hátemelési szög 0-80 °, lábemelési szög 0-90°)

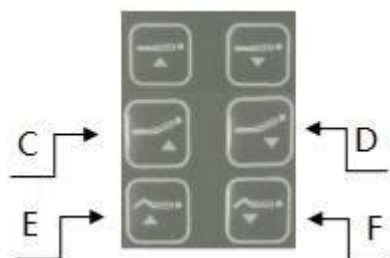

D


C



F

3. Lábtartó behúzható funkció (lábtartó behúzható hossza 0 ~ 12 cm)

0~ 12cm

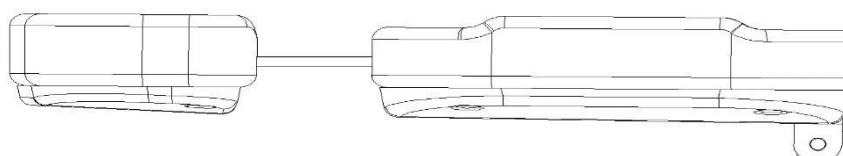

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- A felület jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Ajánlatos évente egyszer alapos fertőtlenítést végezni.
hónapban.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

- A tisztítás enyhe tisztítószerekkel a legjobb. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket és savakat a tisztításhoz.

IV Fotel felülete

- Törölje át a szék felületét egyenletesen egy speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy kárt okozhatnak a készülékben, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos szépségágyat vagy tartozékait, ha azok nem működnek megfelelően.
4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok vezetékeit. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő dolgok állapotát és működését:

1. Tápkábel és annak rögzítése
2. Motor bekötése
3. A vezérlődoboz és annak kábelezése
4. Akár tartozékok is vannak csatlakoztatva
5. A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon hivatalos szervizközpontba. Csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki a működtető/vezérlőegységet. Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a hálózati kábelt, és hagyja abba a készülék használatát. Ezután értesítse a szervizt.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
A kézi vezérlés nem reagál	Ellenőrizze, hogy a kézi vezérlővezeték összekötő interfész nem laza-e (Ellenőrizze, hogy van-e probléma az áramköri lapon), ne felejtse el megjelölni az eredeti dugó helyzetét.
A motor nem reagál	Kapcsolja a motor dugójának helyzetét

A vezérlődoboz cseréjéhez és egyéb pótalkatrészek megrendeléséhez forduljon a s z e r v i z h e z , a kapcsolatfelvétel előtt írja le a problémát:

1. modell
2. a vásárlás dátuma

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék egy professzionális berendezés, amelyet szépségszalonokban használnak. A készülék kizárólag képzett kozmetikusok által történő működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. Ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg a készüléket a jelen kézikönyvben megadottaktól eltérő célokra használni. Minden szervizmunkát és javítást csak hivatalos szerviztechnikus végezhet.
3. Ne telepítse vagy működtesse a készüléket folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - így nem kerülhet folyadék a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o. o. által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne tegyen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. Ha leejti, a készülék megsérülhet.
9. A készülék meghatározott hasznos élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a névtáblán szereplő specifikációknak. Ellenkező esetben fennáll a veszélye a készülék helytelen működésének, károsodásának és akár megégésének.

Megjegyzés:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- ezzel elkerülhető a veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű személyek és a készülékkel kapcsolatban tapasztalatlan és nem jártas személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítást kapnak, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésére kerüljenek.
3. A berendezés nem gyermekeknek való játékra szolgál. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a berendezéssel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a készülék közelében.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék nem megfelelő használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek elől elzárva használja és tárolja.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékek, berendezési tárgyak és csomagolások ártalmatlanítása a nyersanyag-újrafeldolgozó központokban a környezetvédelmi elveknek megfelelően. Ne dobja ki az elektromos készülékeket a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a következőkkel összhangban

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni, majd az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőközpontjaiba kell szállítani. Hasznos élettartamuk végén és a régi készülékek teljes értékű újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon kell leadni, valamint az ACTIVSHOP Sp. z o.o. részére is átadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak az eredeti csomagolásban, a (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.