

4-kamrás nyirokmasszázs készülék
Fabulo AirGo 4



Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és jól őrizze meg a későbbi .

I Tartalom

Biztonsági óvintézkedések	1
Gyakran ismételt kérdések	2
Műszaki paraméterek	4
Problémamegoldás	5
Termékleírás	6
Használati útmutató	7
Megjegyzések használat után	9
Tisztítás	10
Tárolás és karbantartás	10
Eltávolítás	10
A csomag tartalma	10

I Óvintézkedések

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket az újratölthető kompressziós levegő visszanyerő rendszer biztonságos és megfelelő használatának biztosítása érdekében.

■ Figyelem

- Ezen a berendezésen semmilyen módosítás nem megengedett.
1. Ha használat közben erős fájdalmat, szokatlan tüneteket tapasztal, vagy ha vészhelyzetben szeretné eltávolítani az újat:
- Nyomja meg a bekapsológombot a gép leállításához vagy a tömlők leválasztásához;
 - Vegye le az ujjakat, és forduljon orvoshoz.
2. A készülék használata előtt konzultáljon orvosával, ha az alábbi állapotok bármelyikében szenved:
- Folyamatos gyulladás, fertőzés, ismeretlen eredetű fájdalom az alkalmazás helyén vagy annak közelében;
 - Önmek csonttörése vagy csontfurdulása van az alkalmazás helyén vagy annak közelében.
 - Ön orvosi kezelésben részesül, vagy olyan ellenjavallat áll fenn, amely bármely orvosi kezeléység használata szükségessé teszi.
 - Pacemaker vagy más, elektromos interferenciára érzékeny orvosi eszközök használata;
 - Fájdalom rosszindulatú daganatokban;
 - Fájdalom a szívbetegségekn;
 - Fájdalom a csonttritkulásban

- Súlyos perifériás neuropátia vagy érzékelési zavar cukorbetegség miatt;
 - Alkalmatlanság a masszázsa a test sérülése ;
3. Csecsemők, gyermekek és olyan személyek elől elzárva tartandó, akik nem tudják önállóan használni.
4. Ne használjon az eredetiltől eltérő hálózati adaptert.
5. Ne karcolja meg, ne sértsé meg, ne hajlítsa, ne húzza és ne csavarja meg túlzottan a hálózati adapter tápkábelét. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be vagy a csatlakozó megsejül.
6. Nem szabad használni, ha a hálózati adapter nem működik megfelelően.
7. Ne csatlakoztassa vagy válassza le a hálózati adaptert nedves kézzel.
8. Ne tegye a vezérlőt takaróba, és ne használja a készüléket magas hőmérsékleten.
9. Tilos a készüléket engedély nélkül átépíteni, szétszerelni vagy javítani.

I Figyelmeztetés

1. Csak a rendszerhez mellékelt tápegységet használja. Más használata a rendszer meghibásodását okozhatja.
2. Ne használja a fürdőszobában vagy más nedves .
3. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4. Húzza ki hálózati adaptert, ha nem használja.
5. Ne a készülék használata közben, illetve ne viseljen újat.
6. Ne hagyja a rendszert, a tápegységet vagy a tartozékokat olyan helyen, ahol gyermekek, háziállatok, kártevők vagy folyadékok kárt tehetnek bennük.
7. A tartozékokat úgy tervezték, hogy egyszerre csak egy személy tudja használni őket.

I Gyakran ismételt kérdések


1. kérdés: Hogyan működik ez a termék?
- V: Ez egy légkompressziós eszköz, 4 légkamra (láb, vádli, felső vádli és comb), amelyet kétféle szivattyúval látják el: leeresztették a kézi masszáz és simogatás ösztönzésére, maximalizálja a vérkeringést, az egész testben, ezáltal segít csökkenteni az izomfájdalmat és/vagy fájdalmat a kezelt , és javítja a vérkeringést.
2. kérdés: Hány masszázsmód létezik és mi a különbség?
- A2: 3 áll rendelkezésre, lásd a különbséget az alábbiakban:

-2-


1. üzemmód: Szekvenciális üzemmód



2. üzemmód: keringtetési üzemmód

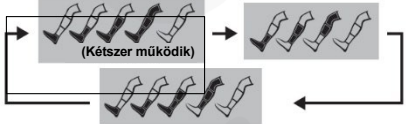

3. üzemmód: Kombinált üzemmód

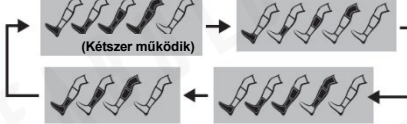

3. kérdés: Használat közben be kell-e dugni a tápegységet egy konnektorb?

- V: Nem, a vezérlő újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amelyet bárhol használhat, ahol csak akar. Egy teljesen feltöltött akkumulátor akár 3-4 órát is kibír (üzem módtól és intenzitástól függően).
4. kérdés: Mit tegyek, ha úgy érzem, hogy a masszáz ereje túl gyenge vagy túl erős?
- A.4: Az intenzitás 40 mmHg és 150 mmHg között van, válassza ki az Önnek megfelelő intenzitást. Ha a legalsó nyomban beállításnál is túl erősnek érzi magát, hagyja abba a készülék használatát, javasoljuk, hogy a további használat előtt konzultáljon orvosával. 5. kérdés: Mennyi ideig kell használnom?
- A.5: Ajánlott naponta egyszer vagy kétszer használni, egyszerre legfeljebb 30 percig. Azonban hosszabb ideig is használhatja, ha túl fáradtnak érzi magát, és azt szeretné, hogy hosszabb ideig masszírozza a fájdalmat.
6. kérdés: Miért van egy hátsó a vezérlő hátulján?
- A.6: A hátsó borítás egy másik lég tömlővel együtt a lég tömlő csatlakozási csatlakozásba illeszthető, így egyetlen mandzsettával önállóan is működhet.

-3-

K.7: Használatom a készüléket csak az egyik lábamon?

A7: Igen, megteheti. Használja a szilikon gumit, hogy elzárja az egyik légnyílást, majd az egyik újat a kívánt lábán viselheti. Javasoljuk, hogy a jobb tehermentesítés érdekében mindkét újat egyszerre használja.

K.8:Miért ad ki hangot a vezető?

A8: A hang a vezetőben lévő működő léggömbből származik, amely folyamatosan levegővel látja el a légzsákokat az ujjakban, ez egy halk hang, és ez normális jelenség.

9. kérdés: Mikor használjam ezt a terméket?

A9: Ez a termék a vér áramlását toja, hatékonyan megszünteti az izomfájdalmat és a fáradtságot, bármikor használhatja, amikor csak akarja. Használhatja edzés előtt az izmok bemelegítésére, edzés után a jobb és gyorsabb regenerálódás érdekében, vagy amikor egy hosszú munkanap után hazatér.

I Műszaki adatok:

Modell	S9061B
Név	Újratölthető légnyítő visszanyerő rendszer
Adapter	AC bemenet: 100-240 Volt, AC 50/60Hz, DC kimenet: 12V 2A
Névleges teljesítmény:	24W
Tömörítési mód	3 üzemmód: szekvencia / keringetési / kombináció
Intenzitási szintek/ nyomástartomány	40-150mmHg
Idő	15-60 perc
A termék súlya	2.92 KG
Csomagoló súly	4.38 KG
Az ujjak típusa	4 - Kamrás hüvely - lábfej / alsó vádli / felső vádli / comb
Akkumulátor	2500mAh Akkumulátor kapacitás: 3-4 óra Feltöltési idő
Cipőméret	: 33.9 hüvelyk; Maximális comb szélesség: 28.3 hüvelyk; Maximális lábszélesség: 14 hüvelyk.

-4-



I Hibaelhárítás

Problémák	Lehetséges okok	Megoldás
Nem működik, és a képernyő ki.	Nincs bekapcsolva	Nyomja meg a bekapsológombot bekapsolja a vezérlőt
	Az akkumulátor lemerült	Kérjük, töltsé fel teljesen az
	Ha bekapsolja a bekapsológombot " " , de ne nyomja meg a gombot Indítás/szünet " " , a vezérlő 2 perc után kikapcsol.	Kezdje a gomb megnyomásával " " Indítás/szünet. " " Indítás/szünet.
A képernyő be van kapcsolva, de az ujjak nem működnek.	Csak egy lég tömlőt csatlakoztasson a vezérlőhöz.	Csatlakoztassa a 2 lég tömlőt (vagy 1 lég tömlőt és a vezérlő háttápját) a vezérlőhöz.
	A lég tömlők teljesen csatlakoztatva	Győződjön meg róla, hogy a lég tömlők megfelelően és teljesen csatlakoztatva vannak a vezérlőhöz (vagyis figyelembe, hogy a gomb "FEL" irányban van).
	Nyomja meg a Start/Pause gombot a szüneteltetéshez.	Indítsa el a Start/Pause gomb megnyomásával
Megszakadt a szivattyúzás működés közben.	Az ujjak sérültek	Ellenőrizze a hüvelyek szivárgását levegő, ha igen, kérjük, lépjen kapcsolatba
	Az akkumulátor lemerült	Kérjük, töltsé fel teljesen az akkumulátort
	A kezelési idő lejárt	A készülék automatikusan kikapcsol, amikor az előre beállított idő letelei, a Ha szükséges, nyomja meg a bekapsológombot egy új munkamenet indításához.

-5-

I Termék leírása

I Vezérlőegység

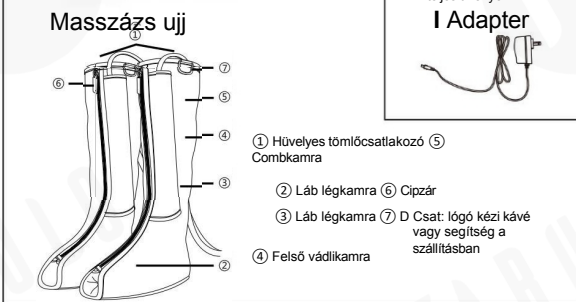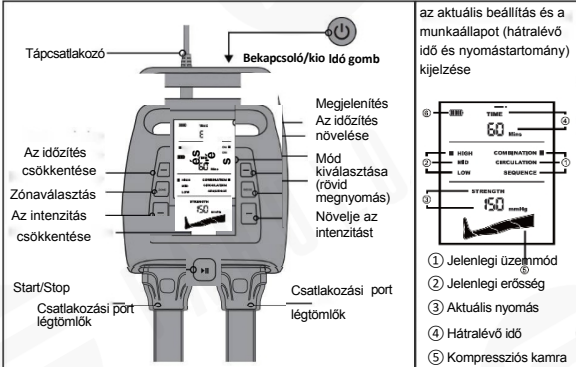

-6-

I Használati utasítás


Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket. A jobb masszáz elérése érdekében használja a készüléket az utasításoknak megfelelően.

1. Győződjön meg róla, hogy mindkét lég tömlő be van dugva a vezérlőhöz, ez az oldal "HORE".



a. Az első használat előtt töltsé fel teljesen az akkumulátort 2-2.5 órán keresztül.

- b. Az akkumulátor töltéséhez:
- Csatlakoztassa az adaptert a vezérlőlap JS töltőportjához.
 - Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorb.
 - A vezérlő képernyőjén az akkumulátor kijelzője mutatja az aktuális töltöttségi szintet. d. Az akkumulátor állapota:
 - Ha , az akkumulátor kijelzője lemerül, és a készülékek kikapcsolnak.
 - Amikor az akkumulátor töltődik, az akkumulátorjelző folyamatosan világog.
 - Ha teljesen feltöltődött, az akkumulátor jelzője nem világ tovább.
- e. Töltsé fel teljesen a készüléket, mielőtt hosszabb ideig nem használná. Ajánlott 5 havonta feltölteni, hogy megelőzze az akkumulátor áramkimaradások miatti károsodását.
2. Helyezze az ujjakat a lábára megfelelően. Nincs különbség a bal és a jobb oldalon lévő ujjak között.

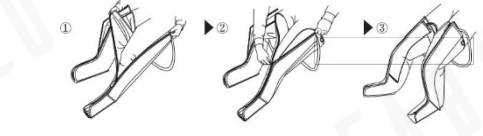

-7-

- * Győződjön meg róla, hogy a cipár teljesen be van zárva, mielőtt felveszi, soha ne próbálja meg használni a rendszert a cipár részlegesen vagy teljesen lezáratlanul.
- * A hüvely tején lévő D-csatot használhatja a gyors bevetéshez.


3. Keresse egy kényelmes , fekvő vagy pozíciót. Nyomja meg hosszan a

bekapsológombot három másodpercig.


- 1). Megszólal a "Di" hang, a képernyő kigyullad, és megjelenik az aktuális beállítás.

Kezdje a " " * Start/Pause.


- 2). Az alapértelmezett beállítással kezdődik: 1. üzemmód (szekvenciális üzemmód), intenzitás 60 mmHg, időtartás 30 perc.

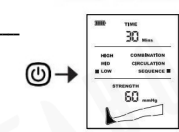

4. Nyomja meg az üzemmód gombot " " gombot a masszáz üzemmód megváltoztatásához. 3. üzemmód választható, a különbséget az A2 GYIK szakaszban.

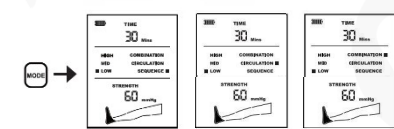


5. Nyomja meg a gombot " " gombot a masszírozni kívánt zóna kiválasztásához, a masszírozni kívánt terület csak egy zónához rögzíthető. Ha ismét az edzés lábat szeretné masszírozni, nyomja meg a MODE gombot, és élvezze a teljes láb masszázst.

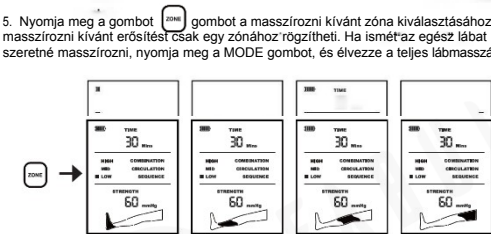


-8-

6. Az intenzitás gomb megnyomása " " gombot a légnyomás intenzitásának beállításához, 40 mmHg-150 mmHg választható.
- *Az első használatához alacsony intenzitással javasoljuk kezdeni, és fokozatosan növelni, ahogy megszokja.

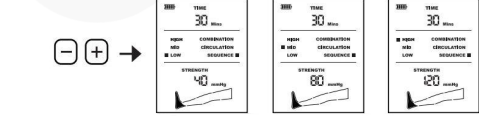


7. Nyomja meg az idő gombot " " az időtartás megváltoztatásához, a kezelések választható időtartama 15-60 perc. Az idő a kezelés során bármikor módosítható.

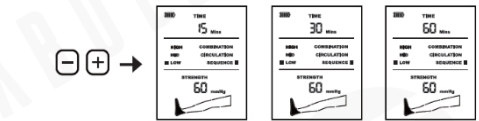

8. A készülék a kezelési idő után automatikusan kikapcsol, bármikor megnyomhatja a bekapsológombot, ha többet szeretne élvezni, vagy korábban befejezni a masszázst.

I Megjegyzések használat után

1. Amikor befejezte a készülék használatát, kapcsolja ki a vezérlőegységet a kapcsolót, és húzza ki az adaptert a vezérlőegységből és a konnektorból.
2. A tömlőt a tömlő tején lévő gomb megnyomásával és lehúzásával válassza le a vezérlőegységről.
3. Minden tartozékot csomagoljon be az eredeti csomagolásukba vagy egy tárolózsákba.

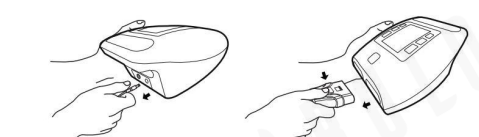

-9-

I Takarítás

- Ne felejtse el kikapcsolni a készüléket, amikor tisztítja a készüléket.
1. Szennyeződés esetén nedves, tiszta ruhával törölje le a vezérlőegységet, a hüvelyeket és a tömlőket.
2. Alaposan szárítsa meg tiszta ruhával.
3. Ne használjon benzint, alkoholt, higított vagy más irritáló folyadékokat a készülék tisztításához, meghibásodást okozhat, vagy az alkatrészek megsérülhetnek vagy kifakulhatnak.
4. Ne engedje, hogy idegen tárgyak kerüljenek a tömlőkre.
5. Ne tisztítsa kémiai úton.

I Tárolás és karbantartás

1. Ne szerelje szét ezt a terméket saját maga. Nincsenek alkatrészei. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon az ügyfélszolgálatához.
2. Csecsemők, gyermekek és önálló használatra nem képes személyek elől elzárva tartandó.
3. Ne helyezze magas hőmérsékletű és páratartalmú környezetbe.
4. Kerülje a közvetlen napfényt.
5. Kerülje a légzsákok és tömlők tükkel történő átszúrását.
6. Ne tegyen rá nehéz dolgokat.
7. Tartsa a nyílásokat, a tömlőcsatlakozásokat és az áramellátást nyitva és szennyeződésektől mentesen.
8. Ne hagyja, hogy szosz vagy por gyűljön össze a vezérlőegységen vagy a tömlőcsatlakozásokon. Ha mégis szosz vagy por gyűlik össze, használat előtt törölje át a rendszert száraz ruhával.

I Eltávolítás

A hulladékok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat

I A csomag tartalma

- 2x Masszázs ujjak
- 1x szűrő
- Tápegység/AC100-240V, 50/60Hz; DC12V2A
- 1xHasználati útmutató
- 1xTöltőkábla