



## Használati utasítás

Fából készült összecusukható masszázstasztal  
Fabulo UNO, UNO Plus, GURU, GURU Plus,  
GURU Oval, DIABLO, DIABLO Plus, DIABLO  
Oval, DIABLO Oval

Fabulo FERRO és TITAN összecusukható  
masszázstasztal fémből és alumíniumból



## Fontos tudnivalók

A termék nem megfelelő használata sérülésekhez vezethet.  
Olvasza el figyelmesen az összes utasítást

Az asztal kicsomagolása közben ellenőrizze a kárpitot. Ne használja az asztalt, ha látható a sérülés bármilyen jele (garanciánk nem terjed ki az asztal nem megfelelő összeszerelése, baleset, helytelen használat vagy a termék rendeltetésétől eltérő célú használata által okozott károokra).

POZOR

**MAXIMÁLIS TERHELÉS** (beleértve az ügyfelet és a tartozékokat)  
Maximális teherbírás: 204 kg  
Statikus terhelhetőség: 1250kg



Mielőtt az ügyfél lefekszik az asztalra, győződjön meg arról, hogy az asztal megfelelően össze van hajtva, és nem dől el, különben az ügyfél elveszítheti az egyensúlyát és leeshet

Kerülje a fejtámla vagy az asztal meghosszabbításainak túlzott terhelését vagy nyomását. Ne tegye ki a terméket nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.

Mivel a masszázsasztal nem játék, tartsa távol a gyermekektől és állatoktól.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az agresszív fertőtlenítő spray-k károsíthatják a kárpitot. A fertőtlenítőszer használata által okozott károokra nem terjed ki a garanciánk (2 év korlátozott garancia a kárpitra).

### **A Fabulo kizárólagos forgalmazója:**

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Szlovák Köztársaság  
Web: [www.fabulo.sk](http://www.fabulo.sk), E-mail: [info@fabulo.sk](mailto:info@fabulo.sk)  
Tel. SK: 0948 223 550, Tel. CZ: 728 241 469

# Használati utasítás a Fabulo masszázstasztalhoz

## Elrendezés

- Helyezze az összehajtott asztalt a gumi ütközőkre, és nyissa ki a zárat (1. ábra).
- Nyissa ki az asztalt, nyújtsa ki az asztal mindkét részét, amíg a lábakat ki tudja egyenesíteni, és vegye ki a tartozékokat. A masszázstasztal akkor állítható fel, ha a lábak egyenesek, és a zsinórok nem akadnak el sehol. (2. és 3. ábra)
- Fogja meg az asztal fogantyúit, támassza meg egyik lábát az asztal alsó lábán, és egy gyors mozdulattal állítsa az asztalt a lábaira úgy, hogy mind a négy lába a földön legyen. (4. ábra)

## Összetétel

- Fordítsa az asztalt az oldalára, ahol a gumi ütközők találhatók. (4. ábra)
- Helyezze vissza a tartozékokat a gumitartó gerendába, vagy rögzítse tépőzárral úgy, hogy ne tolja el az asztallábakat. Miután a kábeleket csatlakoztatta, és az asztallábak a helyükre kerültek, kezdje el az asztal két mozgó részét közelebb hozni egymáshoz, amíg az asztal össze nem záródik, majd rögzítse az asztalt a zárral. (3., 2., 1. ábra)
- Tegye vissza az asztalt a védőzsákba.



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra

## A fejtámla rögzítése

- Helyezze be a fejtámla csőszerű függesztőit az asztal végén lévő lyukakba. Helyezze a beállító kart a helyére (5. ábra).
- Állítsa a fejtámlát a kívánt helyzetbe, és nyomja lefelé a kart a rögzítéshez (6. ábra).
- A fejtámla eltávolításához lazítsa meg a kart, és húzza ki a lyukakból (7. ábra).



5. ábra



6. ábra



7. ábra

## A kartámasz rögzítése

- Fűzze át a csőszerű fejtámla pántokat a kartámla hu rkán (8/11. ábra).
- Csúsztassa a fejtámlát az asztalba, és rögzítse a tépőzáras pántot a fejtámla tetejére az ábrának megfelelően (9/12. ábra).
- Helyezze a párnát a fejtámlára (10/13. ábra).



8. ábra



9. ábra



10. ábra



11. ábra



12. ábra



13. ábra

## Az asztalmagasság beállítása

- A Ferro fa vagy fém masszázstasztal magasságának beállításához csavarja ki az egyes lábakon lévő csavarokat, állítsa be a kívánt magasságot és húzza meg a csavarokat (14., 15. ábra).
- Ha az alumínium masszázstasztal magasságát szeretné beállítani, válassza ki a kívánt magasságnak megfelelő lyukat. Az asztal leengedéséhez vagy felemeléséhez nyomja meg a lábon lévő reteszt. (16. ábra)
- Az asztal használata előtt győződjön meg arról, hogy az asztal minden lába azonos magasságba van-e állítva!



14. ábra



15. ábra



16. ábra

A lán felszabadításának lehetősége a Shiatsu számára

- Távolítsa el a műanyag borításokat, húzza meg és távolítsa el az anyákat a kötelek meghúzásához (17. ábra).
- Távolítsa el a köteleket az asztallábakról (18. ábra).
- Tegye a lábát az asztal belsejébe, és helyezze az asztal tetejét közvetlenül a padlóra (19. ábra).



17. ábra



18. ábra



19. ábra

### Lábtartó/támla beállítása


Kövesse az alábbi lépéseket, ha az összecukható masszázstasztal állítható háttámlával van felszerelve. (20., 21. ábra).

A háttámla megemelése

Emelje fel a háttámlát úgy, hogy az asztal tetejétől felfelé tolja a háttámlát, amíg el nem éri a kívánt pozíciót (segít, ha az ügyfél nem támaszkodik a háttámlára, amikor felemeli).

Fekvő háttámla

Egyik kezével támassza meg az ügyfél hátát és súlyát. Emelje fel a háttámlát a legmagasabbra, majd tegye le (segít, ha az ügyfél nem támaszkodik a háttámlára, amikor leteszi) (20., 21. ábra).

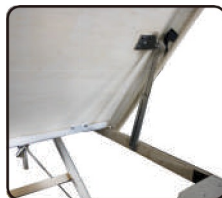

20. ábra



21. ábra

## A lyuk és annak kitöltése

- Távolítsa el a töltőanyagot az asztal felületéről (22. ábra).
- Ha az ügyfél az arcát a lyukba dugja, győződjön meg róla, hogy a lyukon keresztül lélegzik.
- Ha nincs szükség az elülső lyukra, helyezze a hátlapot a lyukba.



22. ábra

## Mellékelt tartozékok



Fejtámla



Memóriahabos párna



Elülső kartámasz



Első háttámla (csak ovális asztaloknál)



Oldalsó kartámaszok - 2x (csak UNO asztalok) Táska



## Kárpitozás ápolása

A termék minőségének megőrzése érdekében tanácsot adunk néhány megelőző lépést a pofahu asztal és tartozékai védelmére:

- Ne tárolja az asztalt rendkívül hideg környezetben, mivel a túlzott hideg miatt az asztal kárpitja megrepedhet. Hideg időben ne tárolja az asztalt fűtetlen helyiségben.
- Ne tárolja az asztalt rendkívül meleg környezetben, mivel a túlzott hő hatására a kárpit megnyúlhat és gyűrődhet. Ügyeljen arra, hogy az asztal ne legyen fűtőtestek, elektromos készülékek közelében, illetve ne legyen közvetlen napfénynek kitéve, és ne tárolja az autójában a forró napokon.
- Védje az asztalt és a tartozékokat ponyvával és takaróval. Javasolunk egy háromrészes, 100% pamut flanelből készült készletet és egy készlet juhgyapjú takarót.
- Kárpitozás Győződjön meg róla minden nap. Javasoljuk a tisztítást vinilre alkalmas enyhe tisztítószerrel (pl. Incidin Habspray vagy Sani-Cloth Active), hogy megóvja az asztalát az olajfoltoktól és a szennyeződésektől, amelyek repedéseket és maradandó elszíneződést okozhatnak.

Gyakori eljárás, hogy egy kis mennyiségű antibakteriális szappant vízzel összekeverünk egy szórófejes flakonban, és tiszta, nedves ruhával áttöröljük az asztalt.

- Használja az asztal mindkét végét. Alkalmanként rögzítse a fejtámlát az asztal másik végéhez, hogy elkerülje az egyenetlen használatot.
- Védje az asztalt a horzsolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.



1. Az alkohollal való törlés kiszárítja a vinilt és repedezést okoz.
2. A szélsőséges hőmérsékletnek való tartós kitettség károsítja a vinilt.

## Biztonsági utasítások

Évente ellenőrizze az összes csatlakozást és drótkötelet.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha a biztonsággal kapcsolatos kopás bármilyen jele jelen van.

A termék jogosulatlan módosítása vagy megváltoztatása tilos.

Köszönjük, hogy megvásárolta masszázstasztalunkat!

Cégünk folyamatosan javítja és fejleszti új termékeinket ügyfeleink érdeklődésének megfelelően.

Az anyagok szigorú kiválasztásával, az ügyes kivitelezéssel, a gondoskodó értékesítés utáni szolgáltatással és a versenyképes árral a masszázstasztalaink lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy érezzék a valódi élet érintését.