

Giovanni Classic kozmetikai készülék - Elektrostimuláció



Tisztelt Ügyfelünk

Köszönjük, hogy termékünket választotta

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet a legjobb eredmény és biztonság elérése érdekében. Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából

Rövid bemutatkozás:

A tökéletes alak kialakítására szolgáló kozmetikai eszköz képes feloldani a testen belüli zsírt, beleértve a belek körüli és a hasi zsírt is. Ugyanakkor csökkentheti a szimpatikus idegek ingerlékenységét és az oxigénfogyasztást elhízott emberekben. A pontstimuláció felhalmozódásának köszönhetően nagyon rövid időn belül fogyhat. Ez a legjobb hagyományos módja a fogyásnak, mert ezzel az eszközzel fogyás után is megőrizheti tökéletes alakját. A készülék szervesen kombinálva frekvencia letapogató áramkörrel és mikroszámítógépes rendszerrel serkentő bioelektromosságot hoz létre, szigorúan betartja az akupunktúra alapjait, a hagyományos kínai orvoslást, a rendszeres mélyaktiválást és masszázst a csatornagyorsulás elérése, a hangulat szabályozása, a nyirokrendszer áttörése érdekében. keringési rendszer, eltávolítja a belső méreganyagokat, javítja a szervezet mikrokeringését, serkenti az anyagcserét, serkenti és helyreállítja a szervezet betegségekkel szembeni erejét, így csökkenthető a zsírsejtek mennyisége és a bőr regenerálódhat.

Funkciók és gyógyhatások

Fogyás: tíz napos kezelés alatt 1-8 kg-ot fogyhat

Testkarcsúsítás: tíz napos kezelés alatt csökkentheti a derékbősséget


2-9 centiméterrel

Mellnagyobbítás: húsz napos kezelés és a mell 1-3-mal megnagyobbítható centiméter

Funkciók: fogyás, karcsúsítás, mellnagyobbítás és fizikoterápia

Előnyök: alacsony frekvencia a fogyáshoz és közepes frekvencia a haj növekedéséhez. A derékbőrség azonnali beállítással 1-2 cm-rel csökkenthető.

Útmutató a panel használatához

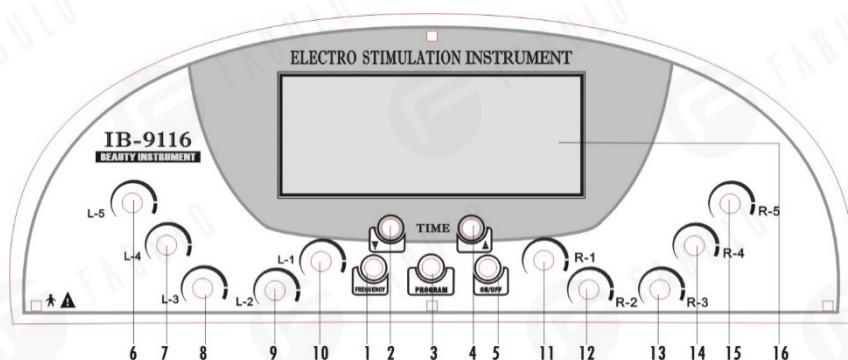

Elektromos stimulációs kimenetek



1. A frekvencia beállítása 

2. Működési idő beállítása (le)

3. Programválasztás (1-9)

4. Működési idő beállítása (fel)

5. Tápellátás (be- és kikapcsolás)

6-15, intenzitás beállítása


16. LCD kijelző

17. Elektromos stimulációs kimenetek

18. Rugalmas szalag

19. Elektróda

20. Elektróda kábel

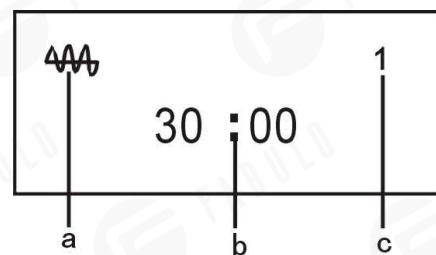

LCD kijelző



21. Mellelektrodák

22. Öntapadó elektrodák

23. Alap

a. Frekvencia kijelzés

b. Idő kijelzés

c. Tekintse meg a programot

Az eljárás leírása:

1. program: Alacsony frekvenciájú lipolitikus biológiai stimuláció (felszíni réteg)

Funkció: A lipolitikus biológiai stimuláció közvetlenül a lipocitákra hat, amelyek lebontják a testzsírt a lipocitákról azáltal, hogy növelik annak permeabilitását.

Használata: Használja a test bármely részén, különösen lokális elhízás esetén.

Program 2: Biológiai stimuláció az aktív lipohisztidierézissel típus (mély szint).

Funkció: Ez a fajta stimuláció hatalmas izomösszehúzódást idézhet elő, kreatin termeléséhez, amely lebontja és eltávolítja a testzsírt.

Használata: Alkalmazza a mély testzsírra

3. program: Mély égetés és az erő biológiai stimulálása

Funkció: Az ilyen típusú stimuláció impulzusszélessége és frekvenciája nagyobb, mint a fenti kettő, ami erősítheti az izomrost stimulációját, és ennek következtében a mély testzsírt teljesebben eltávolíthatja.

Használata: Ha narancsbőrre alkalmazzuk, a hatás nyilvánvaló.

4. program: Biológiai stimuláció aktiválása (erősítése).

Funkció: Ez a fajta stimuláció felgyorsíthatja a belső sejtanyagcserét és a fehérjeszintézist, hogy javítsa az idegszerkezet aktivitása, amikor a lerakódásra hat.

Használata: Vigye fel megereszkedett bőrre.

5. program: Izmok erősítése (erősítés erősítése) biológiai stimuláció

Funkció: Az ilyen típusú stimuláció impulzusszélessége és frekvenciája a

nagyobb, mint a 3. program, amely fokozhatja az izomrostok homomális stimulációját, és ezt követően teljesebben eltávolíthatja a mély testzsírt.

Használata: Cellulit kezelésére alkalmazva a hatás nyilvánvaló.

6. program: Folyamatos mély biológiai stimuláció a fogyásért (méregtelenítés és égetés).

Funkció: Közepes frekvenciájú stimulációt alkalmaz, amely az izom mély szintjét

folyamatosan több ezerszer stimulálja a nyirokerek kitágítására, valamint a nyirokkeringés erősítésére a hidrolitikus zsírsavak és a belső méreganyagok eltávolítására.

Használata: Alkalmazása nyirokkeringési zavarok. A méregtelenítő hatása nyilvánvaló

7. program: Biológiai stimuláció megszakított hullámmal (szépíti a mellet és a csípőt).

Funkció: Ez a stimuláció hasonló a 4-es programhoz, de az ilyen hullám eltérő, szakaszos, ami pihenést ad az izmoknak, hogy elősegítse a testzsír felhalmozódását.

Használata: Alkalmazás testépítésre, megereszkedett bőrre, lapos és kis mellekre.

8. rogram: Szinuszmodulációs hullám és közepes frekvenciájú biológiai stimuláció

Funkció: Ez a stimuláció növelheti a sejtek áteresztőképességét, hogy felgyorsítsa a belső sejtcserét, ami kiterjeszti a nyirokereket és erősíti a nyirokkeringést, hogy eltávolítsa a hidrolitikus zsírsavakat és belső méreganyag és tónusos izmok.

Használata: Alkalmazza megereszkedett mellekre, csípőre és bőrre méregtelenítés.

9. Program: Az 1. program ismétlése a 8. programra.


Használati útmutató

1. Állítsa az egyes kimeneteket kimenet nélküli állapotra.

2. Ellenőrizze és csatlakoztassa a tápegységet a képen látható módon.



Ezután kapcsolja be a kapcsolót.

3. Nyomja meg a Start/Szünet gombot, , és a készülék működésbe lép.

4. Nyomja meg a Program Mode gombot, , és válasszon ki egy programot. . Kilencféle program érhető el, nevezetesen az 1.2.3.4....

5. Állítsa be a működési időt a TIME gombbal

6. Állítsa be a kimeneti intenzitást a 6-15 gombok elforgatásával (lásd az ábrát panelek)



7. Ha a funkció idejét vagy intenzitását működés közben el kell tolni, csak nyomja meg a megfelelő gombot, és a művelet nem áll le.

Kezelési folyamat

1. Vigyen fel karcsúsító gélt vagy krémet az elektródákra, és rögzítse őket a kábellel együtt a testrészhez.

2. Ragassza fel az elektródát a testrészekre az alábbiak szerint:

1. ábra: Nyak és vállak

Funkció: Serkenti a vérkeringést a nyakban és a vállban, ami képes eltávolítani a zsírt és a fáradtságot.



2. ábra: Nyak és vállak és karok

Funkció: Serkenti a vérkeringést a nyakban, vállban és kézben, ami kinyithatja és eltávolíthatja a zsírt.



3. ábra: Mell

Funkció: Serkenti a mell vérkeringését. És serkenti a mell fejlődését, ami képes szabályozni a hormonszekréciót.



4. ábra: Has

Funkció: Serkenti a hasi vérkeringést, eltávolítja a zsírt és erősíti a mellkas izmait.



5. ábra Hát

Funkció: Serkenti a hát vérkeringést és erősíti a hátizmokat, ami eltávolítja a felesleges zsírt és enyhíti a fáradtságot.



6. ábra: Csípő

Funkció: Serkenti a csípő vérkeringését, ezáltal eltávolítja a felesleges zsírt és a csípőízület izomzata megerősödik.



7. ábra: Kezek

Funkció: Serkenti a kéz vérkeringését és megnyitja azokat a csatornákat, amelyek eltávolíthatják a felesleges zsírt és erősíthetik a kar izmait.



8. ábra Lábak

Funkció: Serkenti a lábak vérkeringését és megnyitja a csatornákat, amelyek eltávolíthatják a felesleges zsírt és erősíthetik a lábizmokat.



3. Kapcsolja be a készüléket,  és válassza ki a megfelelő terméket.



- (1) Alkalmazás a test bármely részén, különösen lokális elhízás esetén.
- (2) Alkalmazás mély testzsírra.
- (3) Cellulit alkalmazása
- (4) Alkalmazása megereszkedett bőrre.
- (5) Cellulit alkalmazása
- (6) Alkalmazás nyirokkeringési zavar, elhízás kezelésére.
- (7) Alkalmazás testépítésre, megereszkedett bőrre, lapos és kis mellekre. (8) Alkalmazása megereszkedett mellekre, csípőre és bőrre.


4. Állítsa be az időt a Time Adjust gomb megnyomásával.

 TIME  . (0-60 perc)

Súlycsökkentés: napi 30-40 perc 15 alkalommal egy kezelés.

Mellápolás: 20-30 perc naponta egyszer 15-30 alkalommal egy kezelés

5. A gomb bekapcsolásával  állítsa be az intenzitást az ügyfél kívánsága szerint. Ezután állítsa be a 

négy frekvencia módot. A következő négy mód látható: 

6. A kezelés alatt a gombbal tetszés szerint válthat funkciót, időt és intenzitást.

7. Helyes intenzitás: Mivel az elektromosság tűrése eltérő az embereknél, a különböző ügyfelek számára az alkalmazott villamos energia intenzitása eltérő legyen. Az intenzitás típusai a következők:

I Érzékelési küszöb: elektromosságot érzel

II Összehúzóási határ: Az izmok összehúzódni kezdenek.

III Tűrőképeség határa: A szervezet elviseli az elektromosságot

Testrész	A megfelelő adag
Nyak és vállak	Az érzékelés határa
Láb	Összehúzóási határ, Tűrészatár
Kéz	Összehúzóási határ, Tűrészatár
Has	Összehúzóási határ, Tűrészatár
Mellek	Összehúzóási határ
Hát	Összehúzóási határ, Tűrészatár
Csípő	Összehúzóási határ, Tűrészatár

8. A kezelés után győződjön meg arról, hogy az időkijelző 0, és a kimenetnek kikapcsolt állapotban kell lennie

9. Tisztítsa meg, sterilizálja és tegye félre az elektródákat.

Jegyzet:

1. Ne állítsa túl magasra az intenzitást.
2. Fogyáskor az intenzitás a kliensek érzésének megfelelően legyen.
3. Ha mellápolást végez, válasszon alacsony intenzitást.
4. Tisztítsa meg a bőrfelületet, ahova az elektródát fel szeretné ragasztani, és ellenőrizze, hogy az alsó intenzitáshatár 0-nál van.
5. Kenje fel a kezelni kívánt felületre az elektromosságot leállító közeget.

Egyenletesen kenje fel, hogy a bőr ne fájjon.

6. Bármilyen bőrprobléma esetén, rövidítse le a kezelés idejét.

7. A kezelés során állítsa be az intenzitást a kliens érzése szerint.

Mit kell elkerülni:

1. Vérbetegségben szenvedők nem használhatják ezt a készüléket.
2. Bőrproblémákban szenvedők ezt az eszközt nem használhatják.
3. Szívbetegségben szenvedők szintén nem használhatják.
4. Azok az emberek, akiknek a testükben fém van, nem használhatják.
5. Várandós nők nem használhatják.
6. A rákos betegek nem használhatják.
7. Ezt a készüléket nem arra szánták, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy tapasztalat és tudás hiányában levő személyek (beleértve a gyerekeket is) használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak.
8. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Technológiai paraméterek

Tápellátás: 110V 220V 230V 240V

Működési frekvencia 50Hz 60Hz

Teljesítmény: 40W.

Méret: 53×40×23cm

Bruttó tömeg 6,5Kg 24,5 kg

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Kérjük, ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg olyan műveletet végrehajtani, amelyről a kézikönyvünk nem tesz említést. Minden javítási munkát az általunk elismert szakembernek kell elvégeznie
2. Ne szerelje össze és ne működtesse ezt a készüléket víz közelében vagy vizes a kézzel.

Ne öntsön rá folyadékot.

3. Kérjük, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha a következő körülmények fordulnak elő. Forduljon a professzionális karbantartó állomáshoz, ha:

a. A készülék folyadékot érintett

b. A készüléknek szokatlan szaga van, füstöl vagy hangos zajt bocsát ki

c. A kábel elszakadt

d. A készülék leesett és eltört

4. Ne helyezzen semmit a kábelekre, ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol bárki a kábelre léphet

5. Használat után az Ön biztonsága érdekében húzza ki a tápkábelt

6. Ne dugjon semmit a készülék aljzatába, különben tüzet okozhat, vagy elektromos árammal érintkezhet. Ha valami beleesik a készülékbe, kérjük, ne saját maga távolítsa el, azonnal forduljon a forgalmazóhoz vagy cégünkhöz.

7. Ne helyezze a készüléket olyan tárgyra, amely nem tud szilárdan állni, nehogy felboruljon és megsérüljön.

8. Cégünknek jogában áll a jelen kézikönyvben szereplő információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosítani! Kövesse a fenti utasításokat.