


Használati útmutató

Műszaki adatok:

Munkafeszültség	VÁLTÓÁRAM (110-120V/60Hz) ☐	VÁLTÓÁRAM (220-240V/50Hz) ☐
Névleges teljesítmény	265W	
Méretetek::	Külső: Sz30.2× Ma23.2×V13.7 cm	Belső : Sz25.3× Ma18.2×V8.9 cm
Maximális hőmérséklet	70°C	

Az egyes részek megnevezése

- Az egyes részek neve az ábrán látható módon:

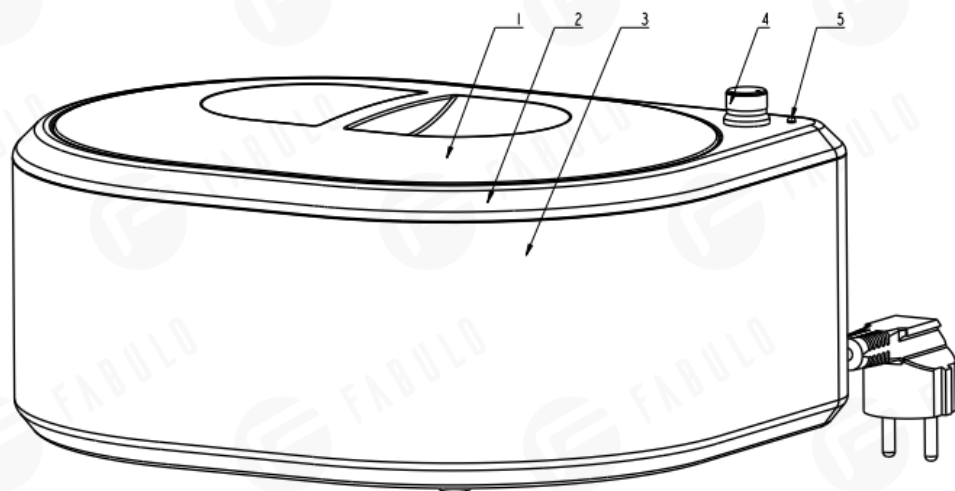

1. fedél 2. középső rész 3. alsó rész 4. forgó gomb 5. 6 jelzőfény

Termék funkciója

Paraffinviasz melegítésére használják

Bevezetés

- ① Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást.
- ② A készülék használatakor olvassa el a használatának módját, a karbantartási módszereket és a figyelmeztetéseket.

Használati mód

● Paraffinviasz kezelése

1. Helyezze az eszközt egy egyenes asztalra;
2. Emelje fel a fedelét, helyezze a paraffinviaszt az eszközbe, majd zárja le a fedelét;
3. Csatlakoztassa a hálózathoz, nyomja meg az alsó kapcsolót 70°C-ra, az eszköz elindul, amikor a jelzőfény pirosan világít;
4. Nyomja meg az alsó kapcsolót 55°C-ra a melegen tartás érdekében, amikor a paraffinviasz megolvadt. Ellenőrizze a viasz hőmérsékletét a használat előtt. Akkor kezdje el használni, amikor a hőmérséklet megfelelő;
5. Tisztítsa meg a bőrt a kezelés előtt;
6. Használjon ecsetet a paraffinviasz egyenletes eloszlásához a bőrön; amikor a paraffinviasz megszáradt, óvatosan távolítsa el;
7. A használat utáni maradék viasz eltávolításához az eszközből használjon speciális tisztítószeret.

Karbantartási módszerek

- A készülék tisztításához javasoljuk a speciális tisztítófolyadék használatát, ne használjon ipari oldószert vagy áttetszőtlen anyagokat a tisztításhoz.
- A készüléket száraz helyen kell elhelyezni.

- Ha a gép meghibásodik, keressen fel a javításhoz egy szakembert.

Biztonsági közlemények

◆ A szimbólumok jelentése

⚠ Ez a szimbólum veszélyt, figyelmeztetést jelöl, figyeljen a cella tartalmára

⊘ Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a cella tartalma tilos

❗ Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ha nem a megadott módon cselekszik, problémák léphetnek fel

▲ Használat előtti figyelmeztetések :

⚠ Figyelmeztetés			
⊘	A gyerekeknek balesetveszély miatt tilos a gép kezelése.	❗	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
⊘	Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felhasználónak nincs bőrirritációja vagy más bőrbetegsége.	⊘	Győződjön meg róla, hogy a készülék belső része használat előtt száraz.
⊘	Győződjön meg róla, hogy a készülék alumínium edényébe használat előtt be van helyezve a paraffinviasz.	⊘	Győződjön meg róla, hogy a készüléket helyesen használják, nem használható a funkcióján kívüli helyen.
⊘	Győződjön meg róla, hogy a feszültség megegyezik a készülékével, máskülönben az elektromos hálózatra csatlakoztatás tilos.	⊘	Más feszültség tűz és elektromos áramütés kockázatát jelentheti.

⊘	Tűz és elektromos áramütés elkerülése érdekében használat előtt tárolja távol bármilyen nedves környezettől.	⊘	Győződjön meg róla, hogy a tápellátás megfelelően földelt.
❗	Ha a terméket hosszabb ideig szállították, balesetek elkerülése érdekében használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy jó állapotban van-e.	⊘	A készülék használata tilos, ha a feszültség nem stabil.
⚡	Bármilyen gázszivárgás esetén a belső térben ne érintse meg a tápellátás kapcsolóját és az indítógombot.	⚡	Tűz és elektromos áramütés elkerülése érdekében ne csatlakoztassa elektromos áramhoz, ha a belső és külső kábel sérült.
⊘	Baleset esetén ne keverje más készülékekkel.	⊘	Ezt a terméket ne módosítsa saját maga.

▲ Használat közbeni figyelmeztetések :

⚠ VESZÉLY			
⊘	Amikor a készülék működik, tartsa távol a gyermekektől.	⊘	Tűz és elektromos áramütés elkerülése érdekében tárolja a készüléket víztől és nedves környezettől távol.
⚠ FIGYELMEZTETÉS			
⊘	Amikor a készülék működik, helyezze egy sima munkalapra.	❗	Húzza ki a dugót és azonnal állítsa le a készülék használatát, ha a készülék bármilyen rendellenes megjelenést mutat.

	Ne használja az elektromos áram instabilitása esetén, hogy elkerülje a károsodást és a baleseteket.		Küldje el javításra, ha a készülék rendellenesnek tűnik, használja tovább, ha normálisan működik.
	Húzza ki azonnal a dugót és állítsa le a készülék használatát, ha elektromos szivárgás jelentkezik.		A készülék használata tilos, ha nincs viasz az edényben.
	Amikor a készülék működik, tartsa távol ittas vagy bármilyen mentális betegségben szenvedő személytől.		Használjon speciális eszközt a viasz kiemeléséhez a viasz megolvadása után. Ne érintse meg közvetlenül az alumínium edényt.
⚠ VIGYÁZAT			
	Maradjon a közelben, amikor a gép működik, kapcsolja ki a tápellátást, ha nem használja. Húzza ki a hálózathoz, ha hosszú ideig nem használja.		

▲ Használat utáni figyelmeztetések :

⚠ FIGYELMEZTETÉS			
	Bármilyen baleset esetén hagyja abba a működésképtelen készülék használatát javítás nélkül.		Nem szakképzett személy számára tilos a készülék javítása, annak rendellenes működése esetén.
⚠ VIGYÁZAT			

	Húzza ki a tápellátást, ha hosszú ideig nem használja a készüléket.		Ha hosszú ideig nem használja, a készüléket be kell csomagolni és megfelelően tárolni.
	A készüléket használat után száraz helyen kell elhelyezni.		Tartsa távol a gyermekektől.
	Tisztítsa meg a készüléket speciális tisztítószerrel, ne vízzel.		A hosszú ideig tartó áramtalanítás károsíthatja a gépet.