

Működési elv

Bár az érintkezési felület nagyon kicsi, a kiropraktikus pisztoly ereje képes áthatolni az összes korrigálandó csigolyán, amennyiben a korrekciós pozíció helyes. A kiropraktikus aktivátor fő jellemzője a sebesség. Ha a sebesség túl alacsony, a test ellenállása nagyobb lesz. A kutatások szerint a gerinc rezonanciafrekvenciája hátulról előrefelé 30-50 Hz, és a csontmozgások 0,3 - 1,6 mm tartomány között van. A kísérlet igazolta, hogy ha 140 N erőt alkalmaznak az L4 csigolyákon is, a maximális 1,6 mm csontmozgás ebben a nagyon rövid időtartamban elegendő lehet a korrekció befejezéséhez. Mivel a korrekció már folyamatban van, a sebesség a korrekció hatékonyságának legfontosabb tényezője. Az igazító eszköz 0,3 milliszekundum alatt továbbítja az erőt, és a csont ebben a rövid időtartamban korrigálódik.


A javallatok a következők:

1. A nyaki, háti, ágyéki, keresztcsonti és farokcsonti csigolyák ízületeinek szubluxációjának vagy elmozdulásának korrekciója.
2. Segítségével kezelhető a fejfájás, a nyak-, a váll-, a hát-, a derékfájdalom és a végtagok zsibbadása, a skolózis, a porckorongsérv, és egyéb, az idegek mozgása és a csigolyák szubluxációja által okozott gerinc betegségek.
3. A fő, háti, ágyéki, keresztcsonti és farokcsonti csigolyák, valamint a medencecsontok szubluxációjából vagy mozgásából eredő izomfájdalmak, érzékenység, zsibbadás és merevség enyhítése.
4. Csonthártyagyulladás, reuma, csontkinövés, csípőizmok megnyúlása stb. által okozott fájdalom és kényelmetlenség kezelése. HA 5. Az izomtónus kiegyenlítése, a szalagok és izmok revitalizálása, a szervek működésének javítása.
5. Mikro arckezelés.

Részletek a manuálterápiás aktivátorról:



Hogyan kell használni.

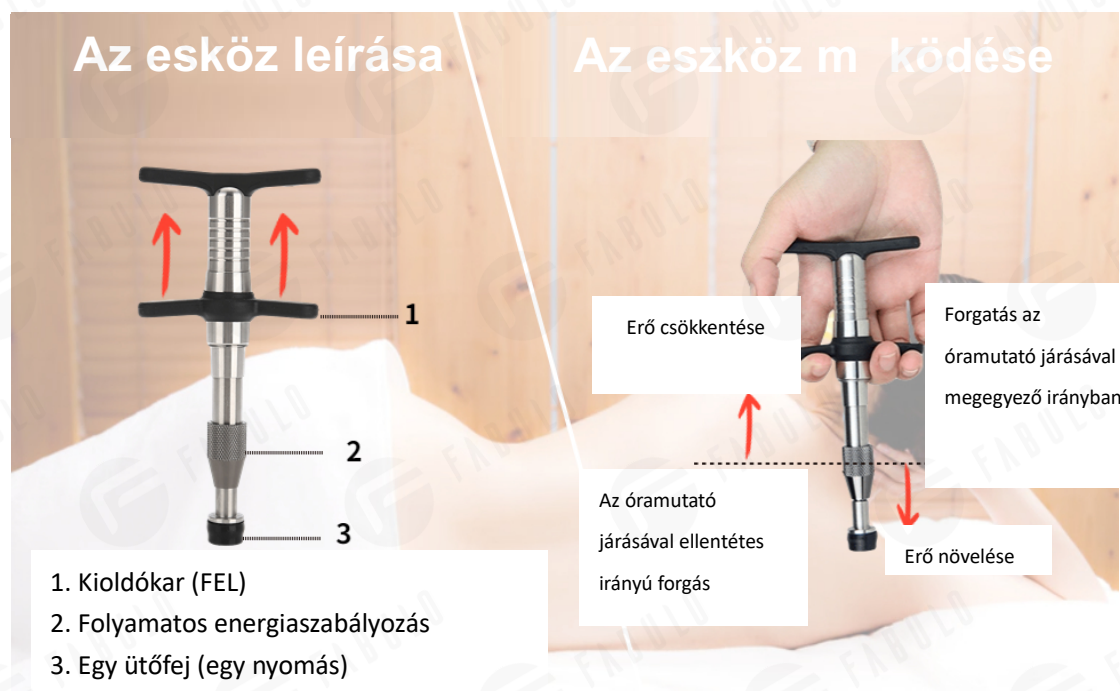

Részletek

Termék: Finom kiropraktikus aktivátor

Modell: HLAM-AMS-003

A pisztoly testének mérete: 19 x 8,8 cm

A külső csomagolás mérete: 26x16x5cm

Intelligens beállítás: Megfelelő erő beállítása

Erő: 80N -280N

Fő anyag: rozsdamentes acél

A csomag tartalma: egy alumínium doboz és egy használati utasítás

Figyelmeztetések

1. Ez a termék szakmai útmutatást igényel használat előtt.
2. Ellenjavallatok (relatív) be nem gyógyult törések. Daganat, tuberkulózis, súlyos csontritkulás.
3. Szívritmusszabályozó.
4. Lokalizált gyulladás duzzanat formájában.
5. Hagyja abba a használatát, ha a rezgésnek való kitettség után kellemetlen érzést tapasztal.

Karbantartás és tárolás

Tisztításkor ne öntsön folyadékot az eszközbe. Ne tárolja magas hőmérsékleten vagy tűz közelében. Az eszköz egy speciális gyártású és tervezésű termék, szükségtelen további karbantartás. Az eszközt ne szerelje szét.