

Használati útmutató

BeautyOne 2240 Eclipse elektromos kozmetikai kezelőágy



Forgalmazó

iM3, s.r.o.

Kistejedi u. 515/8

92901 Dunaszerdahely

Szlovákia


www.fabulo.hu

○ A fehér kör az eredeti funkciót jelöli.


● A fekete kör szélesebb funkcionalitást jelent, és az ügyfelek maguk is bővíthetik a lehetőségeket.




Párna
funkciók

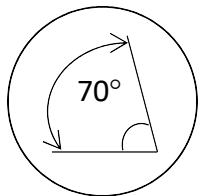


Háttámla
beállítása

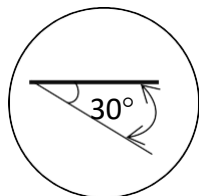

Lábtámla
beállítása

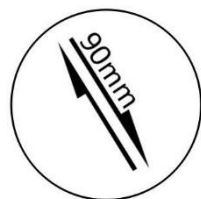

Fejtámla
meghosszabbítása

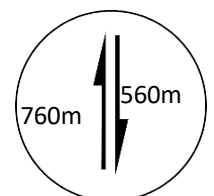

Emelés



Fotel
huzat




Lábvezérlés



Forgó
kerekes
rendszer

A termék formatervezése egyszerű és elegáns, újszerű bőrstílussal és egyedülálló PU bőr használatával a nagyobb kényelemért. Megjelenés szempontjából műanyag burkolatok fedik a fém részeket, hogy az ügyfél által érintett felületek ne legyenek hidegek és nagyobb kényelmet biztosítsanak.


- A termék kialakítása az emberi testhez igazodik, a minimális magasság 560 mm, a termék maximálisan állítható magassága 760 mm.

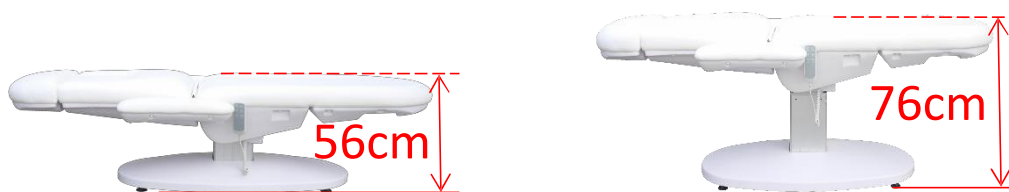

- A termék két oldalán található kartámlák szabadon dönthetők 180° -ban fel- és lefelé, ami nemcsak a felhasználó, de a masször kényelmét is biztosítja. A fejtámla akár 90 mm-re is meghosszabbítható, hogy megfeleljen minden felhasználó kényelmes helyzetének és magasságának.



■ A háttámla szöge elérheti a 70 °-ot, a lábtámla szöge pedig a 30 °-ot.

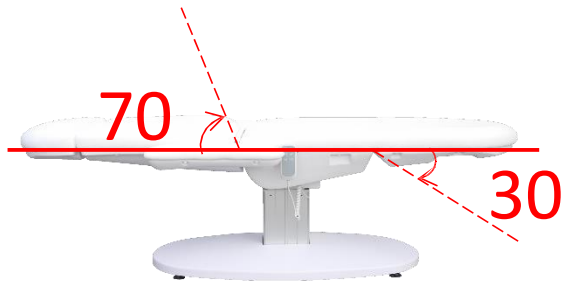

- Állítsa a terméket konnektor közelébe, majd állítsa be.
- A tápkábel csatlakozójának egyik végét szúrja a kezelőszék hátuljába a másik végét pedig a konnektorba
- Ne állítsa a terméket hőforrások, közvetlen napfény vagy nedves helyek közelébe.
- A terméket alacsony, egyenes és széles helyzetben kell elhelyezni, és a faltól 80 cm-nél nagyobb távolságot kell tartani, hogy körülötte szabadon lehessen mozogni.
- A termék használata előtt ismerkedjen meg a kezelőpanellel:

Közös kezelőpanel; csak tartsa lenyomva a gombot a közös kezelőpanel használata közben, a termék a tevékenységekre vonatkozó utasításoknak megfelelően fog működni, engedje el a gombot, a termék leáll.




- ① Háttámla dőlésszög - Fel
- ② Háttámla dőlésszög - Le
- ③ Lábtámla dőlésszög - Fel
- ④ Lábtámla dőlésszög - Le
- ⑤ Magasságállítás - Fel
- ⑥ Magasságállítás - Le



■ Kartámlák felszerelése: lásd telepítési lépések:

- ◆ (A) Először szerelje fel a bal kartámlát. Telepítés előtt állítsa a kartámlát vízszintes helyzetbe, és fordítsa a kartámla fém részében található csapszeget felfelé az alábbiak szerint:


1.1、Fordítsa mindkét kartámla fémrészében található csapot felfelé.

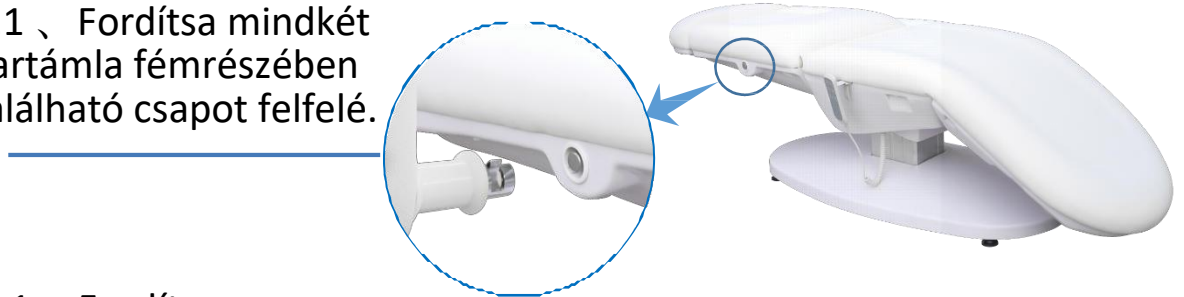

2.1、Fordítsa a kartámlát felfelé, amíg a fejrész felfelé nem kerül

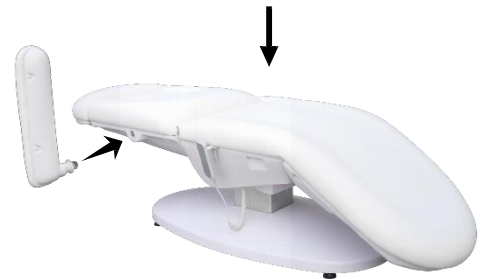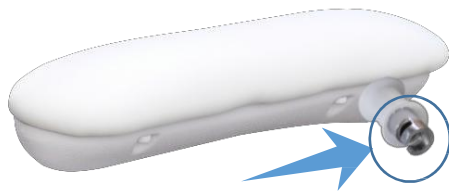


2.2、Győződjön meg róla, hogy a belső fémrészben van egy rés. A csapnak igazodnia kell a réshez, majd illessze be a támlát.

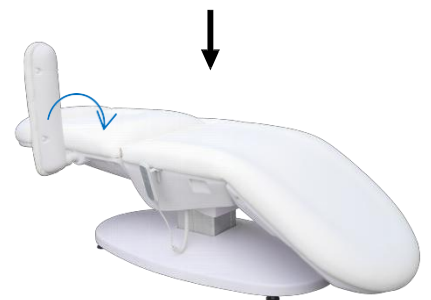

- ◆ (B) Ugyanezen a módon helyezze fel a jobb támlát is.

- ◆ (C) A támlák felszerelése után csatlakoztassa a tápkábelt, és hajtsa végre a tesztet. A terméket csak ellenőrzés után használja.

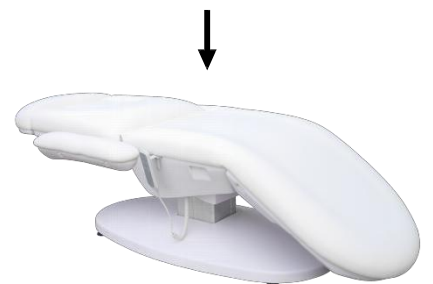

Elhasználódásra hajlamos alkatrészek

Sz.	Név	Termék-fotó	A károsodások	Következménye	Felhasználási idő
01	Műanyag távtartó		Gyakori használat során elkopik	A párna és fogantyú műanyag anyójával a párnát nem lehet rögzíteni	10000-szer
02	Műanyag takaró		Gyakori használat során elkopik	A párna és fogantyú műanyag anyójával a párnát nem lehet rögzíteni	10000-szer
03	Csavarok		A termék karbantartás során megsérülnek	Rozsdásodást okoz a terméken	
04	Akaszto		A termék karbantartás során megsérül	Rozsdásodást okoz a terméken	
05	Elektromos motor		Túlterhelés	A széket nem lehet felemelni vagy nem állítható be a hát- és lábtámla szöge	10000-szer
06	Stabil láb				

Ezek az alkatrészek a gyakori használat során előregedhetnek, károsodhatnak stb. Ez normális jelenség, nem ad okot aggodalomra. A felhasználók biztonsága érdekében azonban rendszeresen kell ellenőrizni, karbantartani és cserélni az előregedő alkatrészeket a balesetek elkerülése érdekében. Ezek az alkatrészek beszerezhetők a kereskedőtől. Ellenőrzéseket és karbantartásokat csak szakképzett személyzet végezhet.

A termék karbantartása

- (1) Ha nem használja a terméket, kapcsolja ki;
- (2) Ne helyezzen apró tárgyakat a termék tetejére, ne használjon éles szerszámokat;
- (3) A terméket nedves helyett száraz környezetben kell elhelyezni;
- (4) A termék érzékeny az ütésekre, ezért ne helyezzen 100 kg-nál nagyobb súlyú tárgyakat a termék fölé.;
- (5) A termék terhelésének határa 200 kg, ha a terméket 150 kg biztonsági terheléssel használja, kerülje a 160 kg-os személyek által történő használatát.;
- (6) Ha a termék nem működik, forduljon a termék forgalmazójának!

A termék tisztítása

- (1) Tisztítás előtt húzza ki az elektromos aljzatból;
- (2) A termék tisztításakor ügyeljen arra, hogy távolítsa el róla más tárgyakat, hogy megakadályozza a megcsúszást, baleseteket és a termék sérülését.;
- (3) A termék tisztításakor ne permetezzen rá vizet, különben az a termékbe szivároghat vagy rövidzárlatot, áramütést vagy a termék károsodását, meghibásodását okozhatja.;
- (4) Tisztításkor használjon speciális tisztítószeret, nem tisztítható olyan olajos folyadékokkal, amely a bőr szennyeződését, korróziót és egyéb károsodásokat okozna.;
- (5) Tisztításhoz ne használjon folyékony színezékeket tartalmazó tisztítószereket, mert megváltoztathatja a bőr színét;
- (6) Ne használjon maró folyadékot tartalmazó tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a műanyagot és a bőrt.

Fontos biztonsági utasítások

- Használatba vétel előtt telepítse és helyezze el megfelelően a terméket.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa az áramellátáshoz telepítés előtt.
- A termék áthelyezése vagy tisztítása közben kapcsolja ki az áramellátást. Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóhoz, személyi sérülést, áramütést, tüzet vagy a termék meghibásodását okozhatja.
- A termék tápkábelét tilos meghúzni, becsípni vagy dörzsölni, különben a termék működése leállhat.
- Ne rázza vagy üsse meg a terméket, különben összedőlhet és személyi sérüléseket okozhat vagy megsérülhet a műanyag burkolat.
- A termék működése közben a maximális áram elérheti a 10 A-t vagy annál is többet, ezért az elektromos csatlakozónak ilyen mértékű elektromos árammal megfelelőnek kell lennie. Ha lehetséges, használjon külön aljzatot az áramkimaradás vagy a túlterhelés okozta tüzek megelőzésére.
- A termék tápfeszültsége 110 V / 220 V, kérjük, válassza ki a megfelelő feszültséget, hogy megakadályozza a belső elektromos alkatrészek kiégését.
- Ha a tápkábel megsérült, cseréltesse ki a lehető leghamarabb, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az értékesítés utáni szervizzel kapcsolatban.
- Ne helyezzen gyúlékony anyagokat a termékre.
- Ne helyezzen olyan tárgyakat a termékre, amelyek nem egyeznek a felülete színével, különben elszíneződhet.
- A termék tisztításakor ne permetezzen rá vizet, különben az a termékbe szivároghat vagy rövidzárlatot, áramütést vagy a termék károsodását, meghibásodását okozhatja.
- Ne tegye ki a terméket napfénynek, különben a színe megváltozik.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha a terméket hosszú ideig nem használja.