SILVERFOX

F-311B / F-312B / F-313B / F-314B / F-315B / F-316B / F-317B / F-318B / F-319B

Kozmetikai készülék

Használati útmutató

Köszönjük, hogy termékeinket választotta.
Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
A vállalat fenntartja a jogot a termékek kialakításának javítására és módosítására előzetes értesítés nélkül.

Tartalom

Az útmutatóról ---- **1**

Biztonsági előírások ---- **1**

F-311B Ultrahangos bőrtisztító – leírás és paraméterek ---- **2/3**

F-312B Ultrahang – leírás és paraméterek ---- **4/5**

F-313B Galvanikus kezelés – leírás és paraméterek ---- **6/7**

F-314B Magasfrekvencia – leírás és paraméterek ---- **8/9**

F-315B Forgókefe – leírás és paraméterek ---- **10/11**

F-316B Vákuum és spray – leírás és paraméterek ---- **12/13**

F-317B Rádiófrekvencia – leírás és paraméterek ---- **14/15**

F-318B Hideg-meleg kalapács – leírás és paraméterek ---- **16/17**

F-319B Gyémánt dermabrázió – leírás és paraméterek ---- **18/19**

Hibaelhárítás ---- **20**

Az útmutatóról

Ez az útmutató kizárólag ennek a konkrét modellnek a kezeléséhez szolgál referenciaként. Ha az útmutatót más célra használják, a SILVERFOX vállalat a keletkező következményekért semmilyen felelősséget nem vállal. Az útmutató valamennyi információja szerzői jogi védelem alatt áll, és a SILVERFOX vállalat írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem egészben nem másolható és nem fordítható le.

Biztonsági előírások

A termék helyes és biztonságos használata érdekében használat előtt olvassa el az összes utasítást!
Tartsa be az összes biztonsági óvintézkedést!

⚠	**Figyelmeztetés!**	**Olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely figyelmen kívül hagyása esetén az élet súlyos veszélyeztetéséhez vezethet.** • Ez a termék kizárólag szakképzett kozmetikusok számára készült. • Ne használja és ne tárolja a terméket nedves helyen, például fürdőszobában – meghibásodás és veszély fenyeget. • Ne használja a terméket gyúlékony anyagok közelében (pl. alkohol, hígító, benzin, körömlakklemosó, spray stb.). • Ne használja a terméket az alábbi esetekben: ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve felmelegszik; ha a csatlakozódugó meglazult az aljzatban. • Ne csatlakoztassa és ne húzza ki a tápkábelt nedves kézzel, és így ne is használja a terméket. • Győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megfelel a termék névleges feszültségének. • Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó és a tápkábel csatlakozója teljesen be van-e dugva, nehogy veszély alakuljon ki. • Ha nem használja a terméket, kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. • Rendszeresen tisztítsa meg a csatlakozódugón és a tápkábel csatlakozóján felhalmozódott port, nehogy a nedvesség, a por és egyéb tényezők miatt a szigetelés meghibásodjon. • Kizárólag a termékhez mellékelt tápkábelt használja. Ne használja más készülékhez. • Ne tekerje a tápkábelt a termék köré – eldeformálódhat és megsérülhet. • Tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek használják a terméket. • Ne alakítsa át, ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a terméket. Ha javításra van szükség, forduljon a gyártóhoz, a képviselethez vagy szakszervizhez, nehogy veszély alakuljon ki. • Ha a csatlakozódugó sérült, forduljon a forgalmazóhoz, a szervizközponthoz vagy megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező személyhez. • A terméket kizárólag az útmutatóban megadott célra használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékot.
⚠	**Figyelem!**	**Olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérüléshez vezethet.** • A kezelőnek használat közben fokozott figyelmet kell fordítania a személyek és a berendezés biztonságára. • Ha a termék nem működik megfelelően, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz. • A termékkel és a tartozékokkal bánjon óvatosan. • A csomagolóanyagot kezelje felelősségteljesen, nehogy baleset, például gyermekek fulladása következzen be; tartsa gyermekektől távol.


◆ F-311B Ultrahangos bőrtisztító





Antisztatikus csuklópánt

1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Üzemmódváltó
7. Start / Szünet

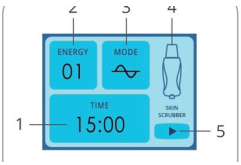

1. Idő
2. Intenzitásszint
3. Üzemmód választása
4. Működési állapot
5. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa a lapátot és az antisztatikus csuklópántot a kozmetikai készülék megfelelő aljzataiba. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít. A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint folyamatos hullámú kimenetre van állítva; az 1. szintű intenzitás 15 percre van beállítva.
2. Igény szerint különböző üzemmódokat választhat – a „Mode switch“ gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő szondakimeneti módot: folyamatos hullám, szaggatott hullám vagy vegyes hullám.
3. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
4. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomása előtt helyezze fel a vendégre az antisztatikus csuklópántot. Az intenzitás 1-től 10-ig állítható.
5. Ha a kezelés közben leveszik az antisztatikus csuklópántot, a készülék automatikusan leáll.
6. Ha a kezelés közben le szeretné állítani a készüléket, nyomja meg a „Pause“ gombot.
7. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg a lapátot és az antisztatikus csuklópántot 75%-os alkohollal, és tárolja őket száraz helyen.

Ajánlott kezelési idő

Normál bőrállapot esetén a kezelés ne haladja meg a 15 percet.

Figyelmeztetések a használathoz

⚠ Figyelmeztetés

- Bekapcsolt készülék mellett ne érintse meg a lapát kimeneti csatlakozóját.
- Ne érintse a lapátot közvetlenül a szemhez.
- A használat az alábbi személyeknél tilos:
  ① allergiás vendégek;
  ② égési és forrázási sérülés, leégés, gyulladás vagy egyéb bőrsérülés;
  ③ szívbetegségben, fertőző betegségben, idegrendszeri betegségben szenvedő vendégek, valamint a kezelés idején testükben fémet viselő vendégek.
- A működő lapát fejét ne hagyja a bőr egy pontján, nehogy a bőr megsérüljön.
- Ha a bőr felülete nincs elegendő krémmel hidratálva, időben pótolja azt.
- A lapáttal végzett munka során ügyeljen a nyomásra és a lapát bőrrel bezárt szögére.
- Munka közben ügyeljen a tartozék és a készülék csatlakozására. Ne húzza túlzottan a kábelt, nehogy a csatlakozás meglazuljon.
- Munka közben ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje víz vagy más korrozív folyadék.
- Ne használjon deformálódott vagy sérült rozsdamentes felületű lapátot, nehogy a bőr megsérüljön.
- Bármilyen rendellenesség esetén forduljon a forgalmazóhoz, és kérjen szakszervizi ellenőrzést; javítás céljából ne nyissa fel a készüléket.


⚠ Figyelem

- Tartsa a lapátot mindig tisztán, és minden használat után fertőtlenítse 75%-os alkohollal.
- A bőr egy pontján történő időzés nem haladhatja meg az 5 másodpercet.


Termékparaméterek

Termék típusa	F-311B
Tápellátás	AC 100V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	10W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 1
	Lapát × 1
	Antisztatikus csuklópánt × 1
	Tápkábel × 1

◆ F-312B Ultrahang (csak kozmetikai célra)

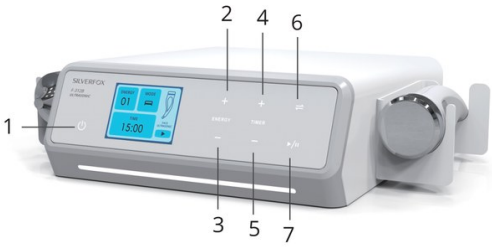

1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Üzemmódváltó
7. Start / Szünet

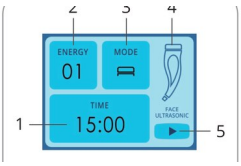

1. Idő
2. Intenzitásszint
3. Szonda üzemmódja
4. Működési állapot
5. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa az ultrahangos szondát a készülék megfelelő aljzatába. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít.
   A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint a szemkörnyéki szonda kimenetére van állítva; az 1. szintű intenzitás 15 percre van beállítva.
2. Igény szerint különböző üzemmódokat választhat – a „Mode switch“ gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti módot: pozitív kimenet, negatív kimenet vagy vegyes kimenet.
3. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
4. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomásával indítsa el a kezelést. Az intenzitás 1-től 10-ig állítható.
5. Ha a kezelés közben le szeretné állítani az ultrahangos szondát, nyomja meg a „Pause“ gombot.
6. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg az ultrahangos szondát 75%-os alkohollal, és tárolja száraz helyen.

Ajánlott kezelési idő

Az időt igazítsa a bőr vastagságához, a kezelés általában nem haladja meg a 15 percet.

Figyelem: A szonda fém részét ne érje víz

Figyelmeztetések a használathoz

⚠ Figyelmeztetés

- Ne irányítsa a szondát közvetlenül a szemgolyóra, ne érintse a szemet, és ne masszírozza a felső szemhéjat.
- A használat az alábbi csoportoknál tilos:
  ① várandós nők és szívritmus-szabályozóval élő személyek;
  ② daganatos vendégek és súlyos szívbetegek;
  ③ égési és forrázási sérülés, leégés, gyulladás vagy egyéb bőrsérülés;
  ④ allergiás vendégek és kontakt dermatitiszben szenvedők.
- Tilos a szondát kozmetikai alkalmazás nélkül bekapcsolni – magas hőmérséklet okozta égés veszélye áll fenn, és a túlmelegedés csökkenti a szonda élettartamát.
- Ne szerelje szét saját maga a rozsdamentes szondát és a markolatot. A rozsdamentes szonda és a markolat elcsavarása a szonda sérülését okozhatja.
- Ez a funkció kozmetikai céltól eltérő célra nem használható.


⚠ Figyelem

- A kezelés előtt vigyen fel elegendő krémet vagy szérumot a kezelendő területre, hogy a szonda és a bőr között megfelelő közeg legyen, és a bőr ne feszüljön.
- Munka közben a szondának a bőrhöz kell simulnia, hogy ne alakuljon ki kavitáció és bőrsérülés.
- A bekapcsolt szonda nem maradhat a bőrrel való érintkezés nélkül, nehogy megsérüljön és csökkenjen az élettartama.
- Ha a szonda túl forró, megégeti a bőrt, ezért a kezelés ne haladja meg a 15 percet; érzékeny bőr esetén csökkentse az időt és az intenzitást. Az idő megnyújtása nem fokozza a hatást, és veszélyes lehet. A bőr egy pontján történő időzés nem haladhatja meg az 5 másodpercet.
- A kezelés után rövid ideig bőrpír jelentkezhet, amelyet a szonda rezgése és a hőtermelés okoz, fokozva a vérkeringést – ez normális állapot.


Termékparaméterek

Termék típusa	F-312B
Tápellátás	AC 100V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	11W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 2
	Rozsdamentes ultrahangos lapos szonda heggyel × 1
	Rozsdamentes ultrahangos lapos szonda × 1
	Tápkábel × 1

◆ F-313B Galvanikus kezelés

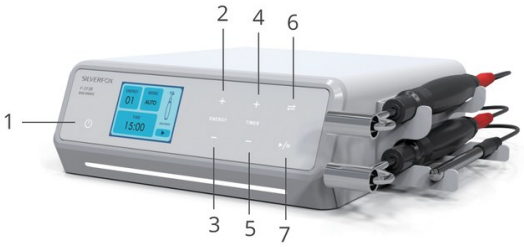

1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Üzemmódváltó
7. Start / Szünet

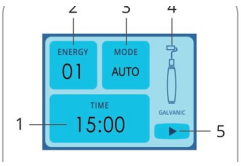

1. Idő
2. Intenzitásszint
3. Üzemmód választása
4. Működési állapot
5. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa a galvanikus tartozékot a készülék megfelelő aljzatába. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít. A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint a szemkörnyéki szonda kimenetére van állítva; az 1. szintű intenzitás 15 percre van beállítva.
2. Igény szerint különböző üzemmódokat választhat – a „Mode switch“ gomb megnyomásával válassza ki az arcra vagy a szemkörnyékre megfelelő szondát.
3. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
4. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomásával indítsa el a kezelést. Az intenzitás 1-től 10-ig állítható.
5. Ha a kezelés közben le szeretné állítani a galvanikus szondát, nyomja meg a „Pause“ gombot.
6. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg a galvanikus szondát 75%-os alkohollal, és tárolja száraz helyen.

Ajánlott kezelési idő

1) Hatóanyag-bejuttatás: 2 perc anionos fázis, majd 6 perc kationos fázis.
2) Tisztító kezelés: 6 perc anionos fázis és 2 perc kationos fázis.

Figyelmeztetések a használathoz

⚠ Figyelmeztetés

- Ne dolgozzon a görgővel közvetlenül a szemgolyón, és ne érintse vele a szemet.
- A termék használata az alábbi személyeknél és testtájakon tilos:
  ① várandós nők és testükben fémet viselő személyek;
  ② allergiás és daganatos vendégek;
  ③ égési és forrázási sérülés, leégés, gyulladás vagy egyéb bőrsérülés;
  ④ tágult hajszálerekkel rendelkező személyek.
- Tilos erősen lúgos oldatot bejuttatni, nehogy káros kémiai sérülés következzen be.
- Ez a funkció kozmetikai céltól eltérő célra nem használható.

⚠ Figyelem

- A kozmetikai készítmények savasságának, illetve lúgosságának meg kell felelnie a görgő pólusának. Pozitív pólus esetén a bejuttatott anyag savas (+); negatív pólus esetén a bejuttatott anyag lúgos (−). Ha a készítményen nincs feltüntetve a kémhatás, lakmuszpapírral ellenőrizheti.
- Munka közben ne érintse a görgőt közvetlenül a kézi pálcához. Óvatlan érintkezés esetén a készülék automatikus védelmet aktivál, és lekapcsolja a kimenetet.
- Vastagabb elszarusodott réteggel rendelkező vendégeknél először végezzen peelinget, majd vigye fel egyenletesen a bejuttatandó anyagot a kezelendő területre.
- Különböző anyagokat (két vagy több vegyszert) tilos egyszerre vagy egymás után ugyanarra a területre bejuttatni, függetlenül a töltésüktől.
- Normál körülmények között az iontoforézis hatása fordítottan arányos a bejuttatott anyag molekulatömegével: minél nagyobb a molekulatömeg, annál rosszabb a bejuttatás, és minél kisebb a molekulatömeg, annál jobb a bejuttatás.


Termékparaméterek

Termék típusa	F-313B
Tápellátás	AC 100V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	4W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 1
	Görgős pálca × 2
	Kézi pálca × 2
	Tápkábel × 1

◆ F-314B Magasfrekvencia (csak kozmetikai célra)



1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Start / Szünet

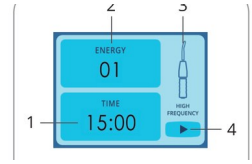

1. Idő
2. Intenzitásszint
3. Működési állapot
4. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa a magasfrekvenciás markolatot a készülék megfelelő aljzatába. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít. A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint folyamatos hullámú kimenetre van állítva; az 1. szintű intenzitás 15 percre van beállítva.
2. Igény szerint több üzemmód közül választhat – helyezze fel a magasfrekvenciás elektroterápiás markolatra a megfelelő elektródát.
3. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
4. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomásával indítsa el a kezelést. Az intenzitás 1-től 10-ig állítható.
5. Ha a kezelés közben le szeretné állítani a szondát, nyomja meg a „Pause“ gombot.
6. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg az elektródát 75%-os alkohollal, és tárolja száraz helyen.

Ajánlott kezelési idő

1) Zsíros bőr: 10–15 perc
2) Száraz és dehidratált bőr: 3–5 perc

Figyelem: Az elektróda fém részét ne érje víz


Figyelmeztetések a használathoz F-314B

⚠ Figyelmeztetés


- Bekapcsolt főegység mellett tilos megérinteni a főegység kimeneti csatlakozóját és a magasfrekvenciás elektroterápiás markolat kimeneti csatlakozóját.
- Ne irányítsa az elektródát közvetlenül a szemre, és ne érintse vele a szem környékét.
- A termék használata az alábbi személyeknél és testtájakon tilos:
  ① várandós nők és beültetett készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) viselő személyek;
  ② érbetegségben szenvedő és fokozottan érzékeny bőrű személyek;
  ③ fém implantátummal vagy fém fogpótlással élő személyek;
  ④ bőrsérüléssel és egyéb bőrproblémával élő személyek;
  ⑤ erősen szőrös testtájak.
- Ne használjon alkoholtartalmú bőrápoló készítményt – az alkohol fokozottan gyúlékony. Ha alkoholos arctonikra van szükség, azt csak a termék használata után vigye fel.
- A kezelés közben ne fogja kézzel a magasfrekvenciás markolat és az elektróda csatlakozási pontját – áramütés veszélye áll fenn.
- A bőr egy pontján történő időzés nem haladhatja meg az 5 másodpercet.
- Ez a funkció kozmetikai céltól eltérő célra nem használható.

⚠ Figyelem

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az elektróda vagy a rajta lévő fémfej nem lazult-e meg, és hogy az elektróda nem repedt vagy sérült-e. Ebben az esetben ne használja, és azonnal cserélje ki.
- Az intenzitást fokozatosan csökkentse nullára, kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, mielőtt az elektródát behelyezi vagy kiveszi.
- Az elektróda behelyezésekor és kivételekor először húzzon gumikesztyűt, és az elektródát hüvelyk- és mutatóujjal fogja: tolja be a furat aljáig, amíg szilárdan nem tart, és ne nyomja tenyérrel, nehogy az üveg eltörjön és sérülést okozzon. Tilos az elektródát hirtelen kirántani, nehogy a fémfej letörjön vagy összetörjön és sérülést okozzon.

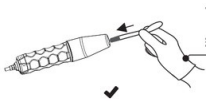

Viseljen gumikesztyűt, az elektródát hüvelyk- és mutatóujjal fogja, és tolja be ütközésig.

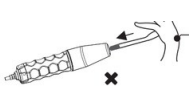


Viseljen gumikesztyűt, az elektródát ne nyomja be tenyérrel.

- Használat közben az elektródából kilépő nagyfeszültségű kimenet zavart okoz.
- Tilos a magasfrekvenciás kozmetikai készülékkel a főegység és más elektromos készülékek közelébe menni. A zavar a főegység működésképtelenségét vagy károsodását okozhatja.
- Ha az elektróda 2,5 cm-nél közelebb van a bőrhöz, de nem érinti azt, és a szikrázás irritálja a bőrt, azonnal csökkentse az intenzitást. Ha a vendég továbbra is érzi a szikrázást, helyezzen az arcára egy darab száraz pamuttörlőt (nejlon és egyéb szintetikus törlő nem használható).
- A kezelés közben tartsa az elektródát folyamatosan a vendég bőrén. Közvetett magasfrekvenciás alkalmazásnál a készülék be- és kikapcsolásakor az egyik kéznek mindig érintkeznie kell a vendég bőrével, soha ne emelje el. Ellenkező esetben mindkét fél kellemetlen áramütést érez.
- Használat után először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, és vegye ki az elektródát a magasfrekvenciás markolatból; az elektródát sterilizálja, hagyja megszáradni, és tegye a tartozékdobozba.


Termékparaméterek

Termék típusa	F-314B
Tápellátás	AC 100V–120V vagy AC 220V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	15W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 1
	Magasfrekvenciás elektroterápiás markolat × 1
	Kanál alakú elektróda × 1
	Pont alakú elektróda × 1
	Szögletes elektróda × 1
	Gomba alakú elektróda × 1
	Tápkábel × 1

◆ F-315B Forgókefe

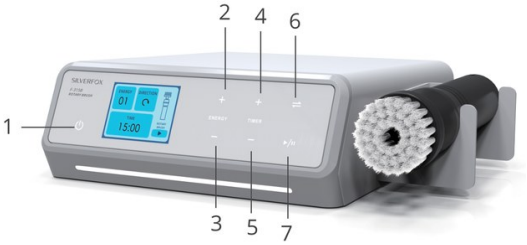

1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Üzemmódváltó
7. Start / Szünet

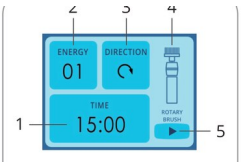

1. Idő
2. Intenzitásszint
3. Forgásirány
4. Működési állapot
5. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa a forgókefét a készülék megfelelő aljzatába. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít. A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint kimeneti üzemmódban van; az 1. szintű intenzitás 15 percre van beállítva.
2. Igény szerint több üzemmód közül választhat – helyezze fel a forgókefe markolatára a megfelelő csiszolófejet.
3. Az üzemmódváltó gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő üzemmódot: óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú forgás.
4. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
5. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomásával indítsa el a kezelést. Az intenzitás 1-től 10-ig állítható.
6. Ha a kezelés közben le szeretné állítani a készüléket, nyomja meg a „Pause“ gombot.
7. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg a forgókefe markolatát és a csiszolófejet 75%-os alkohollal, és tárolja őket száraz helyen.

Ajánlott kezelési idő

Az időt igazítsa a bőr állapotához, a kezelés általában nem haladja meg a 10 percet.

Figyelmeztetések a használathoz

F-315B

⚠ Figyelmeztetés

- Ne használja a szem alatti területen.
- A kefe funkció használata az alábbi csoportoknál tilos:
  ① allergiás vendégek;
  ② égési és forrázási sérülés, leégés, gyulladás vagy egyéb bőrsérülés.

⚠ Figyelem

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a kefefej szilárdan rögzül-e a markolaton.
- Ne használja a kefét úgy, hogy magát a kefefejet fogja.
- A kefefejet ne helyezze fel és ne cserélje használat közben.
- Ne fékezze a kefe forgását kézzel vagy más tárggyal.
- Ne használja a kefe funkciót túl hosszan, nehogy a kefemarkolat túlmelegedjen.
- A vendég bőrével való érintkezés előtt fordítsa lefelé a kefefejet. A vendég bőrével érintkezve finoman nyomja, hogy a vendégnek ne legyen kellemetlen.


Termékparaméterek

Termék típusa	F-315B
Tápellátás	AC 100V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	25W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 1
	Kis kefe × 1
	Nagy kefe × 1
	Kis homokkő csiszolófej × 1
	Nagy homokkő csiszolófej × 1
	Tápkábel × 1

◆ F-316B Vákuum és spray



1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Üzemmódváltó
7. Start / Szünet

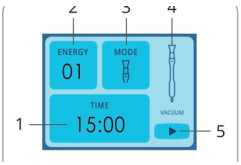

1. Idő
2. Intenzitásszint
3. Üzemmód választása
4. Működési állapot
5. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa a levegőcsövet a főegység levegőcső-aljzatába. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít. A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint kimeneti üzemmódban van; az 1. szintű intenzitás 15 percre van beállítva.
2. Az üzemmódváltó gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő üzemmódot: elszívás (Suction) vagy hidratálás (Hydration). Elszívás üzemmód esetén megfelelő üvegpipettát kell felhelyezni.
3. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
4. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomásával indítsa el a kezelést. Az intenzitás 1-től 10-ig állítható.
5. Ha a kezelés közben le szeretné állítani a készüléket, nyomja meg a „Pause“ gombot.
6. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg a hidratáló feltétet, az elszívó tollat és az üvegpipettát 75%-os alkohollal, és tárolja őket száraz helyen.

Ajánlott kezelési idő

Elszívás és hidratálás egyaránt legfeljebb 10 perc

Figyelmeztetések a használathoz

F-316B

⚠ Figyelmeztetés

- Ne használja az elszívás funkciót a szemen és annak környékén.
- Az elszívás és a spray funkció használata az alábbi személyeknél tilos:
  ① allergiás vendégek;
  ② égési és forrázási sérülés, leégés, gyulladás vagy egyéb bőrsérülés.


⚠ Figyelem

- Ha a készülék bekapcsolása után nem érezhető szívás, ez normális jelenség. Várjon egy kicsit, és a szívás helyreáll.
- Ha a hidratáló feltét porlasztása nem megfelelő, állítsa be a feltét végén lévő szabályozógombbal.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az üvegpipetta nem repedt vagy törött-e. Ebben az esetben ne használja, és azonnal cserélje ki.
- Az üvegpipettával ne időzzön túl hosszan egy helyen. Az elszívó tollat mozgassa gyorsan, nehogy a bőr megsérüljön.
- Ügyeljen arra, hogy a fúvókát ne dugja az elszívó aljzatba – a kozmetikai készítmény beszívódhat a légszivattyúba, és károsíthatja a főegységet.
- Ne húzza hirtelen a levegőcsövet, nehogy megsérüljön.
- Használat után a készüléket le kell választani a hálózatról.


Termékparaméterek

Termék típusa	F-316B
Tápellátás	AC 100V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	65W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 1
	Elszívó toll markolata × 1
	Lapos szájú üvegpipetta × 1
	Kerek szájú üvegpipetta × 1
	Hegyes szájú üvegpipetta × 1
	Készüléktartozékok × 1
	Tápkábel × 1

◆ F-317B Rádiófrekvencia (csak kozmetikai célra)

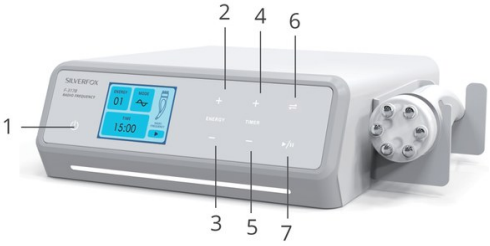

1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Üzemmódváltó
7. Start / Szünet

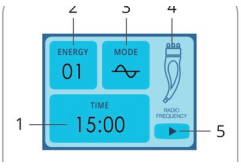

1. Idő
2. Intenzitásszint
3. Szonda üzemmódja
4. Működési állapot
5. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa az RF (rádiófrekvenciás) szondát a főegység aljzatába. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít. A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint folyamatos hullámú kimenetre van állítva; az 1. szintű intenzitás 15 percre van beállítva.
2. Az üzemmódváltó gomb megnyomásával válassza ki az igényeinek megfelelő üzemmódot.
3. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
4. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomásával indítsa el a kezelést az RF szondával. Az intenzitás az „Energy increase/decrease“ gombokkal 1-től 10-ig állítható.
5. Ha a kezelés közben le szeretné állítani a készüléket, nyomja meg a „Pause“ gombot.
6. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg az RF szondát 75%-os alkohollal, és tárolja száraz helyen.

Figyelmeztetések a használathoz

⚠ Figyelmeztetés

- A terméket a megfelelő névleges feszültségen használja, és ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó teljesen be legyen dugva, ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
- Ne használja fürdőszobában vagy nedves helyiségben – áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- Ne használja festékek, bevonatok, oxigén és egyéb gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ha nem használja a funkciót, nyomja meg a szünet gombot.
- Ez a funkció nem használható szívbetegségben, cukorbetegségben, pajzsmirigy-túlműködésben, rosszindulatú daganatban, súlyos magas vérnyomásban, epilepsziában és bőrbetegségekben – ideértve a bőrrákot is – szenvedő, valamint fém implantátummal vagy szívritmus-szabályozóval élő személyeknél. Ha a terméket testi, érzékszervi vagy mentális fogyatékossággal élő, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) használják, felelős személynek kell felügyelnie őket, és felelnie a biztonságukért. Akadályozza meg, hogy gyermekek hozzáférjenek a termékhez, és játsszanak vele.
- A terméket várandós nők, szoptató nők és menstruáló nők nem használhatják.
- Ne használja sérült területeken és ízületeken, nehogy a sebgyógyulás zavart szenvedjen.
- Ez a funkció kozmetikai céltól eltérő célra nem használható.

⚠ Figyelem

- Javasolt, hogy a bőr egy pontján történő időzés ne haladja meg az 5 másodpercet, nehogy égési sérülés alakuljon ki.
- A kezelés során a szondával kerülje a szemgolyót és a pajzsmirigyet.
- A kezelés után fertőtlenítse a szondát 75%-os alkohollal, hagyja alaposan megszáradni, és tárolja el.
- Ez a funkció nem ajánlott olyan területeken, ahol mesterséges töltőanyagot, például szilikongélt alkalmaztak.
- A funkció használata előtt javasolt minden fém kiegészítő levétele.


Termékparaméterek

Termék típusa	F-317B
Tápellátás	AC 100V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	60W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 1
	RF (rádiófrekvenciás) szonda tartozékai × 1
	Tápkábel × 1

◆ F-318B Hideg-meleg kalapács



1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Üzemmódváltó
7. Start / Szünet

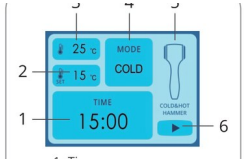

1. Idő
2. Beállított hőmérséklet
3. Aktuális hőmérséklet
4. Szonda üzemmódja
5. Szonda működési állapota
6. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa a hideg-meleg kalapácsot a főegység aljzatába. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít. A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint melegítésre van állítva. Az alapbeállítás stabil 35 °C 15 percen át.
2. Az üzemmódváltó gomb megnyomásával válassza ki az igényeinek megfelelő üzemmódot.
3. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
4. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomásával indítsa el a kezelést a hideg-meleg kalapáccsal. Az intenzitás az „Energy increase/decrease“ gombokkal 1-től 10-ig állítható.
5. Ha a kezelés közben le szeretné állítani a hideg-meleg kalapácsot, nyomja meg a „Pause“ gombot.
6. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg a hideg-meleg kalapácsot 75%-os alkohollal, és tárolja száraz helyen.

Ajánlott kezelési idő

Az időt igazítsa a kezelt területhez és a bőr állapotához,
a kezelés általában 10–15 percig tart.

⚠ Figyelmeztetés

- Ez a funkció az alábbi személyeknél és testtájakon tilos:
  ① hegben visszatérő kiütéssel élő és allergiás vendégek;
  ② égési és forrázási sérülés, leégés, gyulladás vagy egyéb bőrsérülés;
  ③ csökkent immunitást okozó immunszuppresszív betegségben szenvedő vagy immunszuppresszív gyógyszert szedő személyek;
  ④ az elmúlt 3 hónapban keletkezett műtéti sebek.
- A kozmetikus nem hagyhatja magára a készüléket, amíg a kalapács működik, nehogy baleset történjen.

⚠ Figyelem

- A hideg-meleg kalapács kizárólag beltérben használható, körülbelül 25 °C-os hőmérséklet ajánlott. Működését befolyásolja a környezeti hőmérséklet – túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten nem feltétlenül éri el a szükséges üzemi hőmérsékletet és a várt hatást.
- A kozmetikai készülék minden bekapcsolása után, valamint a hideg és meleg funkció átváltása után várjon egy kicsit, amíg a kalapács eléri a beállított hőmérsékletet. Normál körülmények között a bekapcsolás utáni felfutás körülbelül 5 percig tart; a meleg és hideg közötti átváltáskor a hőmérséklet körülbelül 3 perc alatt változik.
- Használat közben ne takarja el a kalapács körüli levegőrést, nehogy víz kondenzálódjon benne, és rövidzárlat keletkezzen.
- A kezelés során a kalapácsot szorosan a bőrre helyezze; a homlok és a homlokcsont kezelésekor finoman nyomja.
- Ha a kalapács hőmérséklete magas, ne időzzön a bőr egy pontján.
- A hideg-meleg kalapácsot ne használja ütögető eszközként.
- Ha a kalapácsfej két végén karcolások vannak, használat előtt cserélje ki a tartozékot újra.
- Ne húzza túlzottan a kalapács spirálkábelét, ügyeljen a mozgástartományára.


Termékparaméterek

Termék típusa	F-318B
Tápellátás	AC 100V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	35W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 1
	Hideg-meleg kalapács tartozékai × 1
	Tápkábel × 1

◆ F-319B Gyémánt dermabrázió



1. Főkapcsoló
2. Intenzitás növelése +
3. Intenzitás csökkentése –
4. Idő növelése +
5. Idő csökkentése –
6. Start / Szünet

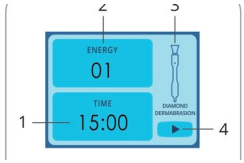

1. Idő
2. Intenzitásszint
3. Működési állapot
4. Üzemállapot

Használat menete

1. Csatlakoztassa az elszívó tollat vagy pálcát a főegység aljzatába. Ha a készülék megfelelően csatlakozik a tápkábelhez, a „Power switch“ gomb pirosan világít. A „Power Switch“ gomb megnyomásával üzemmódba lép, és a gomb fehéren jelenik meg a kijelzőn. A készülék alapértelmezés szerint az 1. szintre van állítva 15 percre.
2. Válassza ki a kezelt területnek és a kívánt hatásnak megfelelő mikrokristályos csiszolófejet.
3. A „Time increase/decrease“ gombokkal 1 – 30 perc közötti munkaidőt állíthat be.
4. A „Start“/„Pause“ gomb megnyomásával indítsa el a kezelést az elszívó pálcával. Az intenzitás az „Energy increase/decrease“ gombokkal 1-től 10-ig állítható.
5. Ha a kezelés közben le szeretné állítani az elszívó pálcát, nyomja meg a „Pause“ gombot.
6. A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket a „power switch“ gombbal; a gomb ekkor pirosan világít. A csatlakozódugó kihúzása után tisztítsa meg az elszívó pálcát és a mikrokristályos csiszolófejet 75%-os alkohollal, és tárolja őket száraz helyen.

Figyelmeztetések a használathoz

F-319B

⚠ Figyelmeztetés

- Ez a funkció nem alkalmas magas vérnyomásban, szívbetegségben és cukorbetegségben szenvedő személyeknek.
- A terméket várandós nők, szoptató nők és menstruáló nők nem használhatják.
- A használat fertőző betegségben és daganatos betegségben szenvedő személyeknél tilos.
- Tilos a használat azoknál, akik az elmúlt egy évben botulinumtoxin-kezelésen estek át.
- Hegszövettel és kollagénhiánnyal élő személyek nem használhatják ezt a funkciót, ellenkező esetben maradandó bőrkárosodás következik be.
- Ez a funkció kozmetikai céltól eltérő célra nem használható.
- Akadályozza meg, hogy gyermekek hozzáférjenek a termékhez, és játsszanak vele – ez veszélyes lehet.

⚠ Figyelem

- A kezelés előtt mérje fel a vendég bőrének állapotát, és válassza ki a megfelelő csiszolófejet és a megfelelő szívóerőt.
- Minden használat után meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni az elszívó pálcában lévő szűrőt.
- A kezelés után mossa le az arcot vízzel.
- A kezelés után fertőtlenítse a csiszolófejet 75%-os alkohollal, és tárolja száraz, megfelelő helyen.

Termékparaméterek

Termék típusa	F-319B
Tápellátás	AC 100V–240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	30W
Termék mérete	20.8×23×7.5 cm
Csomag mérete	37×27.5×14 cm
A csomag tartalma	**Főegység × 1**
	Tartozéktartó polc × 1
	Mikrocsiszoló tartozékok (9 féle mikrocsiszoló fejjel) **× 1**
	Tápkábel × 1

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Ok	Megoldás
A főegység nem működik vagy lefagy.	1. Nincs tápellátás.	1. Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték a tápegység biztosítéktartójában. Ha kiégett, cserélje ki azonos paraméterű biztosítékra. 2. Nyomja meg a start gombot, bekapcsolás után világítani fog.
	2. A tápkábel nincs megfelelően bedugva vagy csatlakoztatva.	2. Dugja be vagy csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt.
A kijelző nem működik.	1. Nincs tápellátás.	1. Kapcsolja be a tápellátást.
A tartozék szondája nem működik.	1. Rossz csatlakozóérintkezés.	1. Húzza ki a kimeneti kábelt, majd dugja vissza az aljzatba.
Gyenge teljesítmény a hideg-meleg kalapácsnál, ultrahangnál, bőrtisztítónál, RF-nél, galvanikus kezelésnél és egyéb tartozékoknál.	1. A fokozat nincs megfelelően beállítva; 2. A tartozék magas hőmérséklete csökkenti a kimeneti teljesítményt.	1. Állítson be magasabb fokozatot; 2. Használja mértékkel, ne hagyja túl sokáig bekapcsolva. Ha a tartozékot nem használja, kapcsolja ki a tápellátást.
A dermabrázió szívása gyenge.	1. A fokozat nincs megfelelően beállítva; 2. A dermabrázió belül eltömődött; 3. Elhasználódott levegőcső; 4. A levegőcső és az elszívó toll csatlakozása meglazult.	1. Állítsa be a fokozatot, és szabályozza a levegőszabályozó szelepet; 2. Cserélje ki a dermabrázió tartozékait; 3. Cserélje ki a levegőcsövet újra, és dugja be a csatlakozóba.
A porlasztó gyengén porlaszt.	1. A fokozat nincs megfelelően beállítva; 2. A hidratáló feltét belül eltömődött; 3. Elhasználódott levegőcső; 4. A levegőcső és a hidratáló feltét csatlakozása meglazult; 5. Kevés a víz a tartályban.	1. Állítson be magasabb fokozatot; 2. Cserélje ki a hidratáló feltét tartozékait; 3. Cserélje ki a levegőcsövet újra, és dugja be a csatlakozóba; 4. Figyelje a tartályban lévő víz mennyiségét, és időben pótolja.
Az elszívó toll gyengén szív.	1. A fokozat nincs megfelelően beállítva; 2. A toll elszívócsöve belül eltömődött; 3. Elhasználódott levegőcső; 4. A levegőcső és az elszívó toll csatlakozása meglazult.	1. Állítson be magasabb fokozatot; 2. Cserélje ki az elszívó toll feltétjét; 3. Cserélje ki a levegőcsövet újra, és dugja be a csatlakozóba.
Gyenge a magasfrekvenciás elektroterápia teljesítménye.	1. A fokozat nincs megfelelően beállítva; 2. Elhasználódás az elektróda hosszú távú használata után.	1. Állítson be magasabb fokozatot; 2. Cserélje ki az elektroterápiás tartozékot.
A főegység rezeg.	1. Eltömődött tartozék.	1. Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a tartozék levegőcsöve.

Ha a probléma a fenti lépések után sem szűnik meg, forduljon a szervizközponthoz vagy a forgalmazóhoz.

Importőr: iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda
Szlovákia
www.fabulo.hu



A régi vagy hibás készülékeket ne dobja a háztartási hulladék közé;
adja le azokat a nyilvános gyűjtőhelyeken.

▲ Használat előtt ellenőrizze a termék specifikációját. Ez az útmutató csak tájékoztató jellegű. A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.