




Fabulo Nexus elektromos terápiás kezelőágy

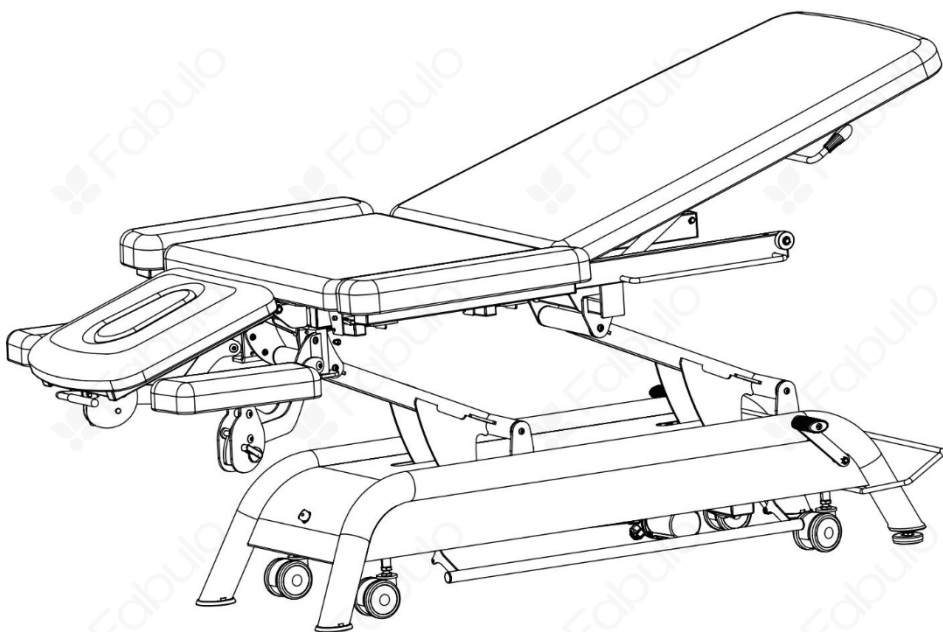




iM3 s.r.o.
Kistejedi utca (Malotejedská) 515/8
929 01 Dunaszerdahely (Dunajská Streda)
Szlovákia

Fabulo.sk - Fabulo.cz - Fabulo.hu - Fabulo.ro

Kérjük, az üzembe helyezés előtt olvassa el ezeket az utasításokat.

Specifikáció



Fabulo Nexus XB1

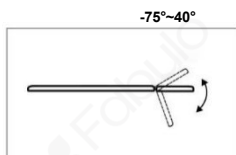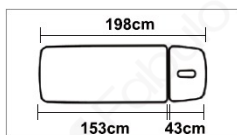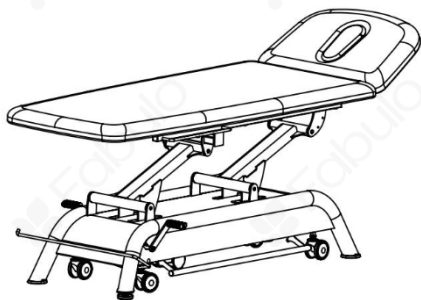

- Hossz: 78"/198cm
- Szélesség: 27"/69cm, 29"/74cm
- Magasság: 21"/53cm ~ 37.5"/95cm
- Hab: 2.5 "/ 6.5cm szilárd nagy sűrűségű hab
- Pneumatikus fejtámla állítás: -75°~40°
- Munkakapacitás: 440 font/200kg

HU

Fabulo Nexus XC1

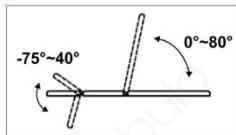
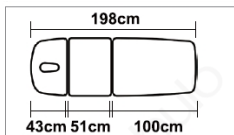


- Hossz: 78"/198cm
- Szélesség: 27"/69cm, 29"/74cm
- Magasság: 21"/53cm ~ 37.5"/95cm
- Hab: 2.5 "/ 6.5cm szilárd nagy sűrűségű hab
- Pneumatikus fejtámla állítás: -75°~40°
- Pneumatikus háttámla állítás: 0-80°
- Munkakapacitás: 440 font/200kg

Specifikáció



HU

Fabulo Nexus XF3

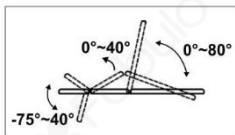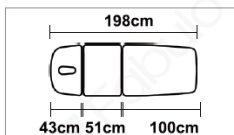

- Hossz: 78"/198cm
- Szélesség: 27"/69cm, 29"/74cm
- Magasság: 21"/53cm ~ 37.5"/95cm
- Hab: 2.5 "/ 6.5cm szilárd nagy sűrűségű hab
- Pneumatikus fejtámla állítás: -75°~40°
- Pneumatikus háttámla állítás: 0-80°
- Elektromos löketközép-állítás: 0-40°
- Munkakapacitás: 440 font/200kg




Fabulo Nexus XR1

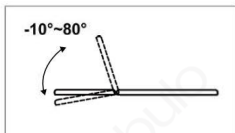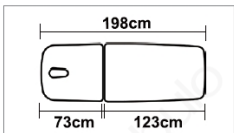

- Hossz: 78"/198cm
- Szélesség: 27"/69cm, 29"/74cm
- Magasság: 21"/53cm ~ 37.5"/95cm
- Hab: 2.5 "/ 6.5cm szilárd nagy sűrűségű hab
- Pneumatikus háttámla állítás: -10°-80°
- Munkakapacitás: 440 font/200kg

Specifikáció

Fabulo Nexus XA1

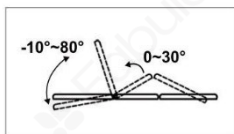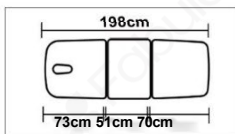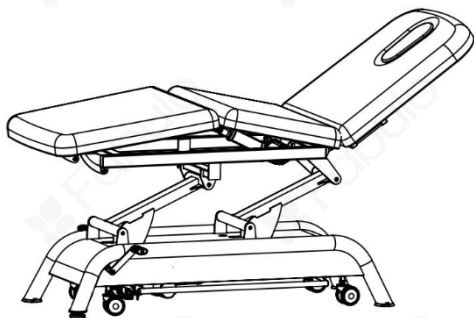

- Hossz: 78"/198cm
- Szélesség: 27"/69cm, 29774cm
- Magasság: 21"/53cm ~ 37.5795cm
- Hab: 2.5 "/ 6.5cm szilárd nagy sűrűségű hab
- Pneumatikus háttámla állítás: -10°~80°
- Elektromos emelés középén: 0-30°
- Munkakapacitás: 440lbs/200kg


HU

Használati utasítás

HU

Teljesítmény



1. Vegye ki az asztalt a csomagolásából, és helyezze egy sima felületre.
2. Csatlakoztassa az asztal tápkábelét egy fali konnektorba.
3. Minden használat előtt fordítsa a biztonsági zárat "ON" állásba (1. ábra), hogy lehetővé váljon a hálózati csatlakozás.

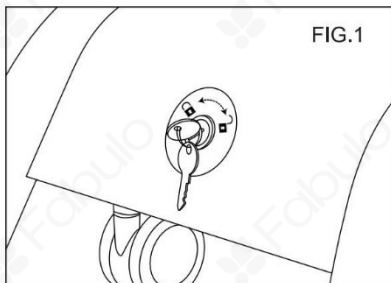

Emlékeztető:
Remind.

- A biztonsági zárat csak az eredeti gyártó szerelheti be, és a felhasználók nem szerelhetik be magáncélra.
- Miután a kijelölt orvos vagy kezelő távozik, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a kábelt.


Magasságszabályozás

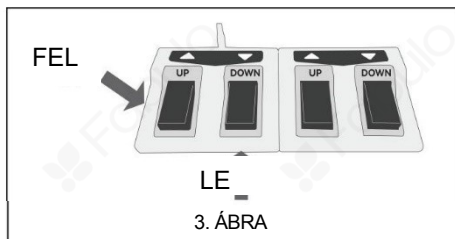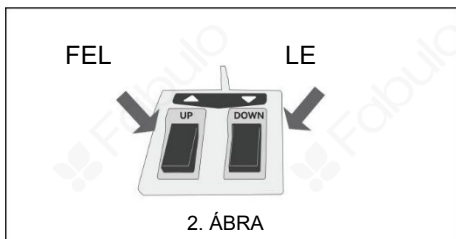


Lábpedálos vezérlés

A lábszabályzóval emelje vagy csökkentse az asztal magasságát a 2. vagy 3. ábrán látható módon.

Magasságszabályozás

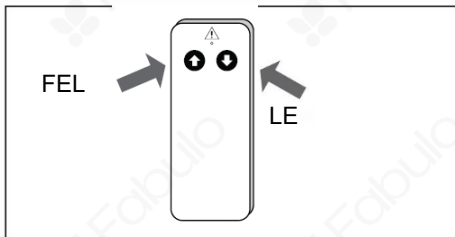

4. ÁBRA

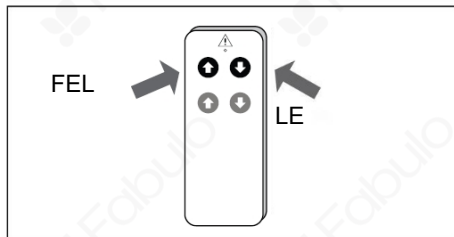

5. ÁBRA

HU

Kézi vezérlés

A kézi vezérlővel emelje vagy csökkentse az asztal magasságát a 4. vagy 5. ábrán látható módon.

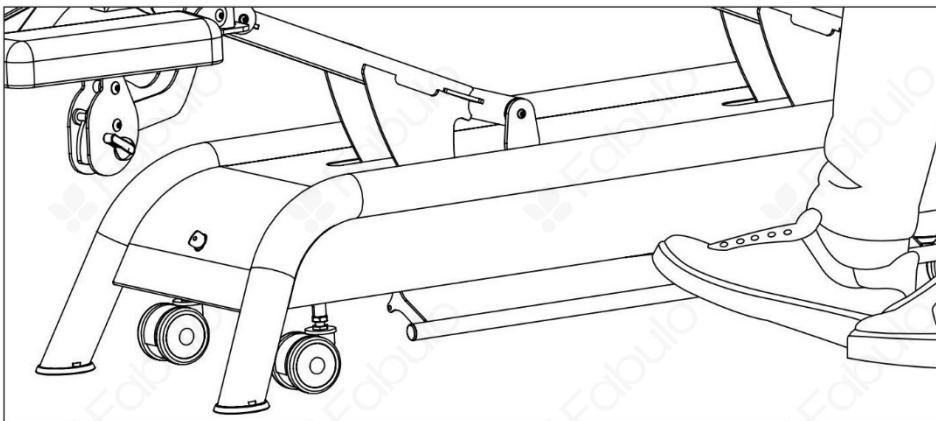


FIG.6


Lábvezérlő

A lábvezérlő rendszer az asztal magasságának szabályozására és beállítására használható. A válaszfal lefelé nyomása növeli az asztal magasságát, a válaszfal felfelé emelése pedig csökkenti az ágy magasságát (6. ábra).

Az asztal középső részének szögének beállítása

(Elérhető a Fabulo Nexus XA1, Fabulo Nexus XF3 modellekhez)


HU

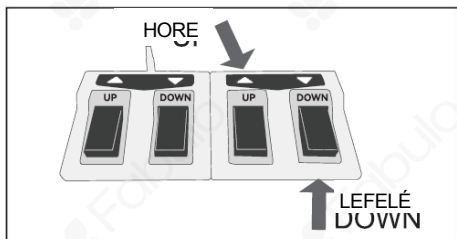

7. ÁBRA

Lábpedálos vezérlés


A lábpedárral állítsa be a középtűs szögét a 7. ábrán látható módon.

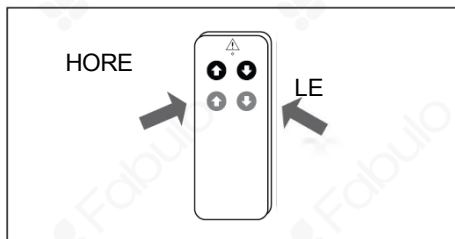

8. ÁBRA

Kézi vezérlés

A kézi vezérlővel állítsa be a középtűs löket szögét a 8. ábrán látható módon.

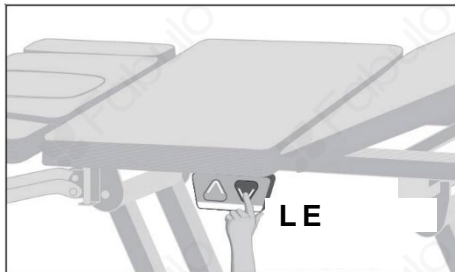

Oldalpanel vezérlés


Az oldalsó panelen található vezérlővel beállítható a középtűs rész szöge. A "Fel" gomb megnyomásával növelheti az asztal szögét, a "Le" gomb megnyomásával pedig csökkentheti azt. Engedje el a gombot, amikor az asztal felülete a kívánt szögben van.

Használati utasítás


HU

Első kartámasz beállítása

Emelje fel a kartámaszt a kívánt magasságba (9. ábra), majd a konzol oldalán lévő kioldó felfelé fordításával engedje le. (10. ÁBRA)

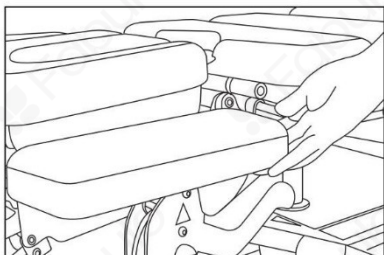

9. ÁBRA

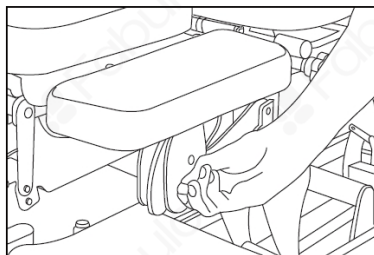

10. ÁBRA

Emelje fel az első kartámaszt, és forgassa el, hogy beállítsa a 11. ábrán látható helyzetét.


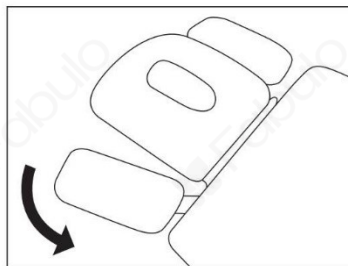


FIG.11

Állítható, elforgatható, meghosszabbított oldalsó kartámasz

Fogja meg az oldalsó kartámaszt, és csúsztassa oldalra, hogy leengedje.

Fogja meg az oldalsó kartámaszt, emelje fel a fémplatformra, és helyezze rá. (12. ÁBRA)

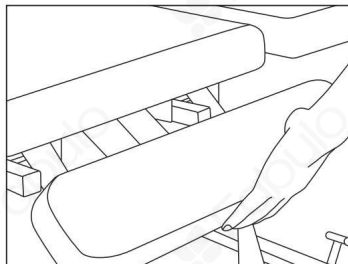

12. ÁBRA

Használati utasítás

HU

A fejtámla dőlésszögének beállítása

Fogja meg a fogantyút a fejtámla részről, emelje vagy csökkentse a kívánt szögbe, majd engedje el.

(13. ÁBRA)



FIG.13

Lábtartó szögbeállítása

Egyik kezével húzza felfelé az asztal lábtartó része alatti bármelyik kart, miközben a másik kezével az asztal tetejét tartja. Emelje vagy csökkentse a kívánt szögig, majd engedje el. (14. ÁBRA)

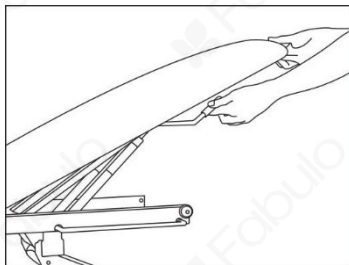



FIG.14

Forgatható fémkorlát (opcionális tartozék) Engedje le a

korlátot: húzza meg a fémkorlát elülső végén lévő csapot, és döntse lefelé, amíg

az ágy felületére merőlegesen. Csúsztassa vissza a csapot a rögzítették a fémkorlátot. (15. ábra)

A kapaszkodó felszerelése: Húzza ki a fém kapaszkodó elülső végén lévő csapot, fordítsa el a kapaszkodót, és helyezze be a kapaszkodót felfelé, amíg merőlegesen áll az ágy felületére, és tűzzük be csúsztassa vissza, hogy lezárja a fémkorlátot. (15. ábra)

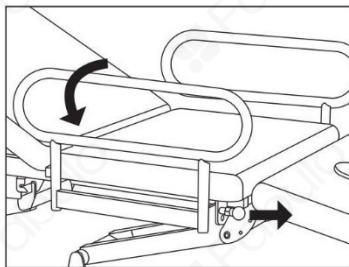

15. ÁBRA

Készenléti kerérendszer

Asztali mozgás

Nyomja le a rudat a lábával, hogy a négy kerék kioldódjon, majd vigye a rudat egy sík felületre. (16. ÁBRA)

Működés közben legyen óvatos a lábával.

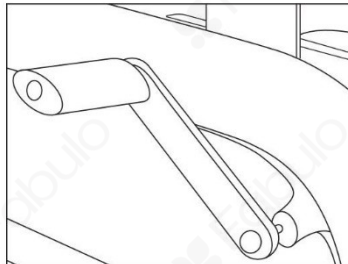


FIG.16

HU

Garancia

Asztali keret	Hajtómű	Tartozékok	Kárpitozás	Pneumatikus szivattyú
5 év garancia	3 év garancia	2 év garancia	2 év garancia	1 év garancia

- Minden garancia a gyári cserealkatrészekre, gyári javításra vagy cserére korlátozódik, kivéve, ha a terméket az Ön költségén visszaküldték.
- Ezek a garanciák a teljes garanciát jelentik. Nincs semmilyen más szavatosság vagy garancia, sem kifejezett, sem hallgatólagos.
- A garancia csak a normál használat során fellépő mechanikai meghibásodásokra terjed ki. Bármilyen mesterséges sérülés, jogosulatlan módosítás, nem megfelelő szállítás, helytelen használat, visszaélés vagy a jelen kézikönyvben leírtakon túli használat már nem tartozik a garancia hatálya alá.

Biztonsági utasítások

Ez a Fabulo Nexus sorozatú elektromos terápiás asztal megfelel a biztonsági előírásoknak. A nem megfelelő használat károsíthatja az emberi testet, a tárgyakat és a terméket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket a használati utasításokat.

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságos működésre és a megfelelő használatra vonatkozóan, hogy megóvja az emberi testet a sérülésektől és megelőzze a termék károsodását. Ha a használat során az alábbi körülmények bekövetkeznek, a gyártó nem vállal garanciát vagy felelősséget személyi sérülésekért, vagyoni károkért, a termékekben vagy más tárgyakban keletkezett károkért.

Biztonsági utasítások

- A felhasználó 18 év alatti
- A termék funkcionalitásán túli használat
- A beteg fizikai vagy érzékszervi fogyatékossgal vagy alacsony intelligenciával rendelkezik, és nincs tapasztalata vagy megfelelő ismeretei.
- Helytelen használat
- A termék teherbírását meghaladó tárgyak emelése
- Hibás vagy nem hatékony védőfelszereléssel történő szállítás és szállítás
- A berendezés kialakításának jogosulatlan megváltoztatása
- A termék további használata a szerkezeti károsodás észlelése után
- Nem megfelelő karbantartás
- Külső katasztrófák és vis maior
- A berendezések szélsőséges hidegnek, hőségnek, napfénynek és páratartalomnak való kitettsége

Elektromos veszélyek

- Ha a tápkábel megsérült, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében azonnal cserélje ki.
- Ne használja a készüléket nedves padlón vagy nedves környezetben. A környezeti hőmérsékletet 10 °C és 30 °C között kell tartani.
- Ne használja a berendezést olyan környezetben, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok vagy gőzök vannak jelen.

Balesetveszély

- Semmilyen körülmények között ne helyezzen tárgyakat vagy testrészeket a szerkezetbe, hogy elkerülje a tárgyak sérülését vagy sérülését, ha a berendezés váratlanul megemelkedik vagy összeomlik.
- Ne álljon a berendezésre, hogy megakadályozza annak leesését vagy felborulását.

Bőrápolás

- A bőrmattac huzat repedezésének megelőzése érdekében kerülje a párás környezetet, az ágy felületén lévő vizet, valamint a hideg vagy túlmelegedett környezetet.
- Semleges tisztítószerrel törölje le; törölje le és szárítsa meg alaposan.
- Kerülje az éles vagy kemény tárgyak érintkezését a bőrfelülettel.